



**TECSA®**  
laboratórios

# Portfólio de Exames **2026**



# Prezado (a) colega,

Apresentar o Portfólio 2026 do TECSA é, acima de tudo, reafirmar um propósito que nos acompanha desde o início: realizar diagnóstico com responsabilidade, critério técnico e profundo respeito à medicina veterinária.

Vivemos um momento em que a qualidade do diagnóstico é cada vez mais decisiva para a conduta clínica. Por isso, seguimos investindo continuamente em tecnologia, rigor científico e na formação de equipes altamente capacitadas, sempre com foco em entregar resultados confiáveis, consistentes e clinicamente relevantes.

O Portfólio 2026 reflete esse cuidado. Mais do que prestar serviços laboratoriais, o TECSA tem orgulho de atuar como um parceiro próximo, acessível e comprometido com a excelência em cada etapa do processo diagnóstico.

Agradeço a confiança depositada em nosso trabalho e a parceria construída ao longo do tempo.

Atenciosamente,

Arminda Gaspar  
Médica Veterinária  
VP laboratórios



**Referência em  
medicina diagnóstica  
veterinária** presente  
em mais de  
**500 cidades no Brasil**



Tubo de  
**Tampa Vermelha**  
Sem anticoagulante



Tubo de  
**Tampa Verde**  
com Heparina



Tubo de **Tampa Roxa**  
com EDTA



Tubo de  
**Tampa Amarela**



Tubo de  
**Tampa Azul**  
com Citrato



Tubo de  
**Tampa Branca**



Tubo de  
**Tampa Cinza/Preta**  
com Fluoreto



Lâmina



Fezes



Swab



Swab em  
meio de  
transporte



Embalagem  
de transporte



Urina



Tufo  
de pelo



Esfregação  
sanguínea



Líquor

**TECSA**  
laboratórios

## **As melhores viagens, são feitas com os melhores amigos!**

Realize com o TECSA laboratórios o exame de sorologia de Raiva, exigido para a entrada dos Pets na União Europeia, Japão, EUA e outros países.



---

VIAGENS INTERNACIONAIS	07
PETS NÃO CONVENCIONAIS	09
BIOLOGIA MOLECULAR PCR PAINEL CANINO	12
BIOLOGIA MOLECULAR PCR PAINEL FELINO	19
BIOLOGIA MOLECULAR PCR INDIVIDUAL	27
BIOLOGIA MOLECULAR PCR SILVESTRE	70
CITOLOGIA	84
ANATOMIA PATOLÓGICA	88
MICROBIOLOGIA	102
IMUNOLOGIA	110
PARASITOLOGIA	125
HORMÔNIOS	128
HEMATOLOGIA	138
BIOQUÍMICA	148
UROANÁLISE	165
DIVERSOS	168
TESTES GENÉTICOS	174
ANIMAIS SILVESTRES	178
PERFIL TECSA FACILITADORES	199



---

# VIAGENS INTERNACIONAIS

---

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1230	<b>SOROLOGIA DE RAIVA - VIAGEM INTERNACIONAL JAPÃO</b>		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b>            Recomendado jejum de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/ amarela).            Cópia da carteira de vacinação e certificado de microchipagem para comprovação das informações preenchidas no formulário online.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            1,0 mL de soro.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerada.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina e felina.</p> <p><b>Causa(s) de Rejeição:</b>            Volume insuficiente, hemólise moderada a intensa, intensa lipemia.</p> <p><b>Nota:</b>            Em nosso site existem protocolos específicos que podem ser consultados no Guia Fácil - Viagem Internacional de PETS, ou consultar o site do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).</p>	7	  
945	<b>TITULAÇÃO DE ANTICORPOS NEUTRALIZANTES PARA RAIVA</b>		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b>            Recomendado jejum de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/ amarela).            Cópia da carteira de vacinação e certificado de microchipagem para comprovação das informações preenchidas no formulário online.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            1,0 mL de soro.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerada.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina e felina.</p> <p><b>Causa(s) de Rejeição:</b>            Volume insuficiente, hemólise moderada a intensa, intensa lipemia.</p> <p><b>Nota:</b>            Em nosso site existem protocolos específicos que podem ser consultados no Guia Fácil - Viagem Internacional de PETS, ou consultar o site do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).</p>	7	  
995	<b>VIAGEM INTERNACIONAL - LEISHMANIOSE (ELISA + RIFI)</b>	2	
	<p><b>Preparo de Paciente:</b>            Recomendado jejum de 8 horas</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            0,5 mL de soro.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado (soro).</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina.</p>		 



---

# PETS NÃO CONVENCIONAIS

---

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1376	<b>CORONAVIRUS ENTERICO DE FERRET (FRECV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>		
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Fezes frescas ou swab retal (Coletor universal estéril).		
	<b>Quantidade necessária:</b> Swab com material orgânico visível ou 5g fezes.	3	
	<b>Formas de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécies atendidas:</b> Ferret e mustelídeos.		
1374	<b>HELICOBACTER SPP - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>		
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Fezes frescas ou swab retal (Coletor universal estéril); fragmentos de biópsia gástrica.		
	<b>Quantidade necessária:</b> Swab com material orgânico visível ou 5g fezes. Fragmentos de biópsia gástrica representativos	3	
	<b>Formas de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécies atendidas:</b> Canina, felina, ferret, mustelídeos		
1378	<b>PAINEL DIARREIA FERRET E MUSTELIDEOS BASICO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>		
	Coronavírus entérico de ferret (FRECV), <i>Helicobacter</i> spp., <i>Giardia</i> spp.		
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Fezes frescas ou swab retal (Coletor universal estéril).		
	<b>Quantidade necessária:</b> Swab com material orgânico visível ou 5g fezes.	3	
	<b>Formas de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécies atendidas:</b> Ferret.		
1379	<b>PAINEL DIARREIA FERRET E MUSTELIDEOS COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>		
	Coronavírus entérico de ferret (FRECV), Cinomose CDV, <i>Helicobacter</i> spp., <i>Campylobacter</i> spp., <i>Giardia</i> spp., <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>Yersinia</i> spp.		
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Fezes frescas ou swab retal (Coletor universal estéril).		
	<b>Quantidade necessária:</b> Swab com material orgânico visível ou 5g fezes.	3	
	<b>Formas de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécies atendidas:</b> Ferret.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1380	<b>PAINEL DOENÇAS VIRAIS FERRETS E MUSTELÍDEOS - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> Cinomose CDV, Parvovírus da doença aleutiana (AMDV), Coronavírus Entérico de ferret (FRECV).		  
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Fezes frescas ou swab retal (Coletor universal estéril). Sangue total em EDTA (Tampa roxa). <b>Quantidade necessária:</b> Swab com material orgânico visível ou 5g fezes. No mínimo 0,4 mL de sangue total em EDTA (Tampa roxa). <b>Formas de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécies atendidas:</b> Ferret, mustelídeos.	3	
1377	<b>PARVOVIRUS DA DOENÇA ALEUTIANA (AMDV) - FERRETS E MUSTELÍDEOS - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>		  
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal em frasco estéril. Fragmentos de intestino ou estômago em frasco estéril. Fragmento de coração, baço, fígado, placenta e rins em frasco estéril. <b>Quantidade necessária:</b> 5g fezes. Swab com material orgânico visível. <b>Formas de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécies atendidas:</b> Ferret, mustelídeos.	3	
1373	<b>VIRUS DA CINOMOSE (CDV) PARA FERRETS E MUSTELÍDEOS - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>		   
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Sinais clínicos multissistêmicos (sinais respiratórios, gastrointestinais, oftalmológicos, neurológicos e outros): swab conjuntival, swab nasal, swab orofaríngeo, fezes, swab retal, urina, líquor (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa), de acordo com os sinais clínicos. Sinais clínicos neurológicos (sem sinais clínicos multissistêmicos): urina ou líquor. <b>Quantidade necessária:</b> Swab com material orgânico visível. No mínimo 0,4 mL de sangue total. No mínimo 0,6 mL de líquor. No mínimo 2,0 mL de urina. <b>Formas de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécies atendidas:</b> Ferret, mustelídeos.	1	
1375	<b>YERSINIA spp - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>		 
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal em frasco estéril. <b>Quantidade necessária:</b> 5g fezes. Swab com material orgânico visível. <b>Formas de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécies atendidas:</b> Canina, felina, ferret, mustelídeos.	3	



---

**BIOLOGIA  
MOLECULAR  
PCR PAINEL  
CANINO**

---

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
965	<b>PAINEL ABORTO CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Brucella spp., Campylobacter spp., Herpesvírus canino 1 (CHV-1), Leptospira spp., Neospora caninum, Toxoplasma gondii e Parvovírus canino 2 (CPV-2).</i> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Fragmento de placenta fresco em frasco estéril.            Fragmento de baço, fígado e rins fetais em frasco estéril.            Conteúdo estomacal fetal e/ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) da fêmea (mãe).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Fragmentos de tecido</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina.</p>	1
1065	<b>PAINEL ANEMIA CANINA - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Leishmania infantum (chagasi), Mycoplasma haemocanis, Rangelia vitalii, Hepatozoon spp., Leptospira spp., Rickettsia spp., Ehrlichia spp., Anaplasma spp. e Babesia spp.</i> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina.</p>	1
1131	<b>PAINEL BABESIOSE CANINA - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Babesia canis canis, Babesia canis vogeli, Babesia gibsoni e Babesia canis rossi.</i> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina.</p>	1
1006	<b>PAINEL CHECK UP DOENÇAS INFECCIOSAS CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Parvovírus canino 2 (CPV-2), Adenovírus canino 1 (CAV-1), Babesia canis vogeli, Vírus da Cinomose canina (CDV), Leishmania infantum (chagasi) e Ehrlichia canis.</i> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
960	<p><b>PAINEL DERMATOPATIA FÚNGICA CANINA - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>  <i>Microsporum</i> spp., <i>Trichophyton</i> spp. e <i>Malassezia</i> spp.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>  Raspado ou swab de lesão cutânea (área transicional entre pele afetada e pele saudável), fragmento de pele, pelos da borda da lesão com raízes em frasco estéril.  Fragmentos de unhas + raspado de leito ungueal em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>  Swab com material orgânico visível.  Tufo de pelo.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>  Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>  Canina.</p>	1
806	<p><b>PAINEL DIARREIA CANINA BÁSICO -REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>  Parvovírus canino 2 (CPV-2), Cinomose canina (CDV) e Coronavírus canino (CCoV).</p> <p><b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b>  Fezes ou swab retal em frasco estéril</p> <p><b>Quantidade necessária:</b>  Swab com material orgânico visível.  5g fezes.</p> <p><b>Formas de envio:</b>  Refrigerada ou congelada.</p> <p><b>Espécies atendidas:</b>  Canina.</p>	1
911	<p><b>PAINEL DIARREIA CANINA COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>  Coronavírus canino (CCoV), <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>Giardia</i> spp., Parvovírus canino 2 (CPV-2), Vírus da Cinomose canina (CDV), Circovírus canino (CaCV), <i>Salmonella</i> spp., <i>Campylobacter</i> spp., <i>Clostridium perfringens</i> alfa toxina (CPA) - Real Time PCR quantitativo e <i>Clostridium perfringens</i> enterotoxina (CPE) - Real Time PCR quantitativo.</p> <p><b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b>  Fezes ou swab retal em frasco estéril</p> <p><b>Quantidade necessária:</b>  Swab com material orgânico visível.  5g fezes.</p> <p><b>Formas de envio:</b>  Refrigerada ou congelada.</p> <p><b>Espécies atendidas:</b>  Canina.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1262	<b>PAINEL DOADOR CÃO ESSENCIAL - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Anaplasma platys, Babesia canis vogeli, Dirofilaria immitis, Ehrlichia canis e Leishmania infantum (chagasi).</i> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.</p>	1
958	<b>PAINEL DOADOR SANGUÍNEO CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Anaplasma platys, Babesia canis vogeli, Brucella spp., Ehrlichia canis, Leishmania infantum (chagasi) e Mycoplasma haemocanis.</i> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.</p>	1
793	<b>PAINEL HEMOPARASITAS BÁSICO - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b> <i>Babesia spp., Ehrlichia spp. e Anaplasma spp.</i> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.</p>	1
1291	<b>PAINEL HEMOPARASITAS CANINO BÁSICO II - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Anaplasma spp., Babesia spp., Ehrlichia spp. e Leishmania infantum (chagasi).</i> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.</p>	1
905	<b>PAINEL HEMOPARASITAS CANINO COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Leishmania infantum (chagasi), Mycoplasma haemocanis, Rangelia vitalii Hepatozoon spp., Ehrlichia spp., Babesia spp., Anaplasma spp. e Dirofilaria immitis.</i> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1149	<p><b>PAINEL HIPERTERMIA ATÍPICA CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>  <i>Babesia spp., Rickettsia spp., Hepatozoon spp., Histoplasma capsulatum, Brucella spp., Bartonella spp., Cryptococcus spp., Toxoplasma gondii, Blastomyces dermatitidis, Neospora caninum, Leptospira spp., Trypanosoma spp., Ehrlichia spp., Anaplasma spp. e Leishmania infantum (chagasi).</i></p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina.</p>	1
1062	<p><b>PAINEL MICOSES SISTÊMICAS - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>  <i>Blastomyces dermatitidis, Cryptococcus spp., Histoplasma capsulatum e Coccidioides spp.</i></p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p>Fezes em frasco estéril.</p> <p>Swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, aspirado de linfonodo ou fragmento de pele em frasco estéril.</p> <p>Bloco de parafina (quando houver indicação na análise histopatológica)</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.</p> <p>5g fezes.</p> <p>No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina e felina.</p>	1
1157	<p><b>PAINEL NEUROLÓGICO CANINO COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>  <i>Vírus da Cinomose canina (CDV), Neospora caninum, Toxoplasma gondii, Ehrlichia spp., Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, Coccidioides spp., Babesia spp. e Cryptococcus spp.</i></p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Líquor (coletor universal estéril), Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) e urina (somente como amostra adicional).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p>No mínimo 0,6 mL de líquor.</p> <p>No mínimo 2,0 mL de urina.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
904	<b>PAINEL NEUROLÓGICO CANINO BÁSICO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> Vírus da Cinomose canina (CDV), <i>Neospora caninum</i> e <i>Toxoplasma gondii</i> .	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Líquor (coletor universal estéril), Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) e urina (apenas como amostra adicional). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). No mínimo 0,6 mL de líquor. No mínimo 2,0 mL de urina. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	1
1163	<b>PAINEL NEUROTOXINAS BOTULÍNICAS (GENES BONT B, C E D) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Conteúdo estomacal ou ruminal, conteúdo gastrointestinal, lavado estomacal ou intestinal, fezes, swab de cloaca ou ceco, forragem deteriorada, alimentos suspeitos, solo sob as áreas afetadas, fragmento de estômago ou intestino em frasco estéril. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 5,0 mL para amostra líquida. No mínimo 5,0 g para amostra sólida. Swab com material orgânico visível. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.	5
1148	<b>PAINEL TOXINFECÇÃO CLOSTRIDIUM PERFRINGENS- REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b> <i>Clostridium perfringens</i> alfa toxina (CPA) e <i>Clostridium perfringens</i> enterotoxina (CPE).	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal (coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (coletor universal estéril). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.	1
1162	<b>TESTE PARR - DIAGNÓSTICO E IMUNOFENOTIPAGEM DE LINFOMAS</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Punção de linfonodos (porta lâmina com lâminas), líquidos cavitários (coletor universal estéril) ou lâminas de citologia coradas (porta lâmina com lâminas). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 5,0 mL de líquido cavitário. 3 lâminas com material visível. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	5

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1362	<b>VÍRUS DA CINOMOSE CANINA (CDV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sinais clínicos multissistêmicos (sinais respiratórios, gastrointestinais, oftalmológicos, neurológicos e outros): swab conjuntival, swab nasal, swab orofaríngeo, fezes, swab retal, urina, líquor (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa), de acordo com os sinais clínicos. Sinais clínicos neurológicos (sem sinais clínicos multissistêmicos): urina ou líquor.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo. No mínimo 0,6 mL de líquor. No mínimo 2,0 mL de urina.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	
1008	<b>PAINEL ZOONOSES CANINA - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Brucella spp., Leishmania infantum (chagasi), Leptospira spp., Rickettsia spp. e Giardia spp.</i>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo (tampa roxa) e fezes	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). 5g fezes.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	
959	<b>PAINEL RESPIRATÓRIO CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab orofaríngeo profundo, swab conjuntival em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	
1284	<b>PCR PARA ONCOGENE C-KIT EM MASTOCITOMA</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina e laudo histopatológico.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	5
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	



---

**BIOLOGIA  
MOLECULAR  
PCR PAINEL  
FELINO**

---

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
946	<p><b>PAINEL ABORTO FELINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>            Coronavírus felino (FCoV), Herpesvírus felino 1 (FHV-1), Panleucopenia felina (FPV, Parvovírus felino), Vírus da Leucemia felina (FeLV) - DNA proviral, Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) - DNA proviral, <i>Leptospira</i> spp., <i>Toxoplasma gondii</i> e <i>Chlamydophila felis</i>.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Fragmento de placenta fresco (coletor universal estéril).            Fragmento de baço, fígado e rins fetais (coletor universal estéril).            Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total com EDTA (tampa roxa) da fêmea (mãe).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Felina.</p>	1
1063	<p><b>PAINEL AFECÇÃO ORAL FELINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>  <i>Bartonella</i> spp., Calicivírus felino (FCV), Herpesvírus felino (FHV-1), Vírus da Leucemia felina (FeLV), Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) e <i>Mycoplasma felis</i>.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Swab lesão gengival/oral (coletor universal estéril).            Fragmento de tecido da região oral acometido (coletor universal estéril).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Felina.</p>	1
913	<p><b>PAINEL ANEMIA FELINA BÁSICO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>  <i>Mycoplasma haemofelis</i>, <i>Bartonella</i> spp., Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) - DNA proviral e Vírus da Leucemia felina (FeLV) - DNA proviral.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Felina.</p>	1
912	<p><b>PAINEL ANEMIA FELINA COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>            Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) - DNA proviral, Vírus da Leucemia felina (FeLV) - DNA proviral, <i>Mycoplasma haemofelis</i>, Coronavírus felino (FCoV), <i>Cytauxzoon</i> spp., <i>Bartonella</i> spp., <i>Ehrlichia</i> spp., <i>Anaplasma</i> spp., <i>Candidatus mycoplasma haemominutum</i> e <i>Candidatus mycoplasma turicensis</i>.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Felina.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1007	<p><b>PAINEL CHECK UP DOENÇAS INFECCIOSAS FELINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>            Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) - DNA proviral, Vírus da Leucemia felina (FeLV) - DNA proviral, Coronavírus felino (FCoV) e Panleucopenia felina (FPV, Parvovírus felino).</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Felina.</p>	1
970	<p><b>PAINEL DERMATOPATIA FÚNGICA FELINA BÁSICO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>  <i>Microsporum</i> spp., <i>Trichophyton</i> spp. e <i>Malassezia</i> spp.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Raspado ou swab de lesão cutânea (área transicional entre pele afetada e pele saudável), fragmento de pele, pelos da borda da lesão com raízes (coletor universal estéril).            Fragmentos de unhas + raspado de leito ungueal (coletor universal estéril).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Felina.</p>	1
957	<p><b>PAINEL DERMATOPATIA FÚNGICA FELINA COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>  <i>Microsporum</i> spp., <i>Trichophyton</i> spp., <i>Sporothrix</i> spp., <i>Malassezia</i> spp. e <i>Cryptococcus</i> spp.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Raspado ou swab de lesão cutânea (área transicional entre pele afetada e pele saudável), fragmento de pele, pelos da borda da lesão com raízes (coletor universal estéril).            Fragmentos de unhas + raspado de leito ungueal (coletor universal estéril).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Felina.</p>	1
916	<p><b>PAINEL DIARREIA FELINA COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>  <i>Coronavirus felino</i>, <i>Cryprosporidium</i> spp., <i>Giardia</i> spp., <i>Toxoplasma gondii</i>, <i>Tritrichomonas foetus</i>, Vírus da Panleucopenia felina (FPV), <i>Campylobacter</i> spp., <i>Salmonella</i> spp., <i>Clostridium perfringens</i> alfa toxina (CPA) - Real Time PCR Quantitativo e <i>Clostridium perfringens</i> enterotoxina (CPE) - Real Time PCR Quantitativo.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Fezes ou swab retal em frasco estéril.            Possível analisar pool de até 3 amostras.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.            5g fezes.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Felina.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
914	<b>PAINEL FELV PLUS (RNA E DNA) - REAL TIME PCR</b> Vírus da Leucemia felina (FeLV) quantitativo e DNA proviral e Vírus da Leucemia felina (FeLV) qualitativo.  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	1
915	<b>PAINEL FIV PLUS (RNA E DNA) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> Vírus da imunodeficiência felina (FIV) quantitativo - DNA proviral e Vírus da imunodeficiência felina (FIV) qualitativo.  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	1
1150	<b>PAINEL HIPERTERMIA ATÍPICA FELINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> Calicivírus felino (FCV), <i>Cytauxzoon</i> spp., <i>Bartonella</i> spp., <i>Anaplasma</i> spp., <i>Mycoplasma haemofelis</i> , <i>Candidatus Mycoplasma haemominutum</i> , <i>Candidatus Mycoplasma turicensis</i> , Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) - DNA proviral, Vírus da Leucemia felina (FeLV) - DNA proviral, <i>Cryptococcus</i> spp., <i>Salmonella</i> spp., Coronavírus felino (FCoV), Panleucopenia felina (FPV, Parvovírus felino) e <i>Ehrlichia</i> spp.  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	1
1136	<b>PAINEL MICOPLASMOSE HEMOTRÓPICA FELINA - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Mycoplasma haemofelis</i> , <i>Candidatus Mycoplasma haemominutum</i> e <i>Candidatus Mycoplasma turicensis</i> .  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de baço ou fígado em frasco estéril. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1062	<p><b>PAINEL MICOSES SISTÊMICAS - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>  <i>Blastomyces dermatitidis, Cryptococcus spp., Histoplasma capsulatum e Coccidioides spp.</i></p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Fezes em frasco estéril.            Swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, aspirado de linfonodo ou fragmento de pele em frasco estéril.            Bloco de parafina (quando houver indicação na análise histopatológica)</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.            5g fezes.            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina e felina.</p>	1
917	<p><b>PAINEL NEUROLÓGICO FELINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>            Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) - DNA proviral, Vírus da Leucemia felina (FeLV) - DNA proviral, Coronavírus felino (FCoV), <i>Cryptococcus spp.</i>, <i>Toxoplasma gondii</i>, Panleucopenia felina (FPV, Parvovírus felino) e <i>Bartonella spp.</i></p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Líquor em frasco estéril ou sangue total com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            No mínimo 0,6 mL de líquor.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Felina.</p>	1
1163	<p><b>PAINEL NEUROTOXINAS BOTULÍNICAS (GENES BONT B, C E D) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b></p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Conteúdo estomacal ou ruminal, conteúdo gastrointestinal, lavado estomacal ou intestinal, fezes, swab de cloaca ou ceco, forragem deteriorada, alimentos suspeitos, solo sob as áreas afetadas, fragmento de estômago ou intestino em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 5,0 mL para amostra líquida.            No mínimo 5,0 g para amostra sólida.            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Aves e mamíferos.</p>	5

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1064	<b>PAINEL OFTALMOPATIA FELINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Bartonella spp., Cryptococcus spp., Coronavírus felino (FCoV), Herpesvírus felino (FHV-1), Vírus da Leucemia felina (FeLV) - DNA proviral, Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) - DNA proviral e Toxoplasma gondii.</i> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Swab conjuntival em frasco estéril.            Humor aquoso (Tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            No mínimo 0,6 mL de humor aquoso.            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Felina.</p>	1
907	<b>PAINEL RESPIRATÓRIO FELINO BÁSICO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Herpesvírus felino 1 (FHV-1) e Calicivírus felino (FCV).</i> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Swab orofaríngeo profundo, swab conjuntival (coletor universal estéril).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Felina.</p>	1
906	<b>PAINEL RESPIRATÓRIO FELINO COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Herpesvírus felino 1 (FHV-1) e Calicivírus felino (FCV), <i>Bordetella bronchiseptica</i>, <i>Chlamydophila felis</i> e <i>Mycoplasma felis</i>.</i> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Swab orofaríngeo profundo, swab conjuntival em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Felina.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
824	<b>PAINEL RETROVIROSES DNA PROVIRAL - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b> Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) - DNA proviral e Vírus da Leucemia felina (FeLV) - DNA proviral <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.</p>	1
1097	<b>PAINEL RETROVIROSES FELINAS (FIV E FELV) - RNA VIRAL E DNA PROVIRAL - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> Vírus da Imunodeficiência felina (FIV) - DNA proviral, Vírus da Imunodeficiência felina (FIV), Vírus da Leucemia felina (FeLV) - DNA proviral e Vírus da Leucemia felina (FeLV). <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.</p>	1
1148	<b>PAINEL TOXINFECÇÃO CLOSTRIDIUM PERFRINGENS- REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b> <i>Clostridium perfringens</i> alfa toxina (CPA) e <i>Clostridium perfringens</i> enterotoxina (CPE). <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal (coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (coletor universal estéril).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1009	<b>PAINEL ZOONOSES FELINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Rickettsia spp., Bartonella spp., Toxoplasma gondii e Giardia spp.</i>  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo (tampa roxa) e fezes. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). 5g fezes. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	1
1162	<b>TESTE PARR - DIAGNÓSTICO E IMUNOFENOTIPAGEM DE LINFOMAS</b>  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Punção de linfonodos (porta lâmina com lâminas), líquidos cavitários (coletor universal estéril) ou lâminas de citologia coradas (porta lâmina com lâminas). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 5,0 mL de líquido cavitário. 3 lâminas com material visível. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina. <b>Causa(s) de Rejeição:</b> Material inadequado e volume insuficiente.	5



---

**BIOLOGIA  
MOLECULAR  
PCR  
INDIVIDUAL**

---

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
--------	-------	------------

**803 ADENOVÍRUS CANINO 1 (CAV-1) - REAL TIME PCR QUALITATIVO**

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).  
Fezes frescas ou swab retal, urina, biopsia de tecido hepático (Coletor universal estéril).  
Sinais respiratórios: Swab nasal e/ou conjuntival (Coletor universal estéril).

**Quantidade(s) necessária(s):**

No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).  
No mínimo 2,0 mL de urina.  
Swab com material orgânico visível.  
5g fezes.

1

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Canina.

**951 ADENOVÍRUS CANINO 1 (CAV-1) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).  
Fezes frescas ou swab retal, urina, biopsia de tecido hepático (Coletor universal estéril).  
Sinais respiratórios: Swab nasal e/ou conjuntival (Coletor universal estéril).

**Quantidade(s) necessária(s):**

No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).  
No mínimo 2,0 mL de urina.  
Swab com material orgânico visível.  
5g fezes.

1

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Canina.

**896 ADENOVÍRUS CANINO 2 (CAV-2) - REAL TIME PCR QUALITATIVO**

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Sinais respiratórios: Swab nasal, swab de faringe, swab de conjuntiva, biopsia de tecido hepático em frasco estéril ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).  
Sinais entéricos: Fezes frescas, swab retal, biopsia de tecido hepático (Coletor universal estéril) ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

**Quantidade(s) necessária(s):**

No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).  
Swab com material orgânico visível.  
5g fezes.

1

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Canina.

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
952	<b>ADENOVÍRUS CANINO 2 (CAV-2) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sinais respiratórios: Swab nasal, swab de faringe, swab de conjuntiva, biopsia de tecido hepático em frasco estéril ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Sinais entéricos: Fezes frescas, swab retal, biopsia de tecido hepático (Coletor universal estéril) ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	
873	<b>ANAPLASMA PLATYS - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço (aspirado em swab seco), líquido sinovial ou carrapato (Coletor universal estéril). Sinais neurológicos: Líquor (Coletor universal estéril).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea (Tampa roxa). No mínimo 0,6 mL de líquor ou líquido sinovial. Aspirado de tecido em swab seco estéril.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	
874	<b>ANAPLASMA PLATYS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço (aspirado em swab seco), líquido sinovial ou carrapato (Coletor universal estéril). Sinais neurológicos: Líquor (Coletor universal estéril).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea (Tampa roxa). No mínimo 0,6 mL de líquor ou líquido sinovial. Aspirado de tecido em swab seco estéril.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1109	<b>ANAPLASMA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço (aspirado em swab seco), líquido sinovial ou carrapato (Coletor universal estéril).            Sinais neurológicos: Líquor (Coletor universal estéril).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea (Tampa roxa).            No mínimo 0,6 mL de líquor ou líquido sinovial.            Aspirado de tecido em swab seco estéril.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina, felina, equina, bovina e aves.</p>	1
1110	<b>ANAPLASMA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço (aspirado em swab seco), líquido sinovial ou carrapato (Coletor universal estéril).            Sinais neurológicos: Líquor (Coletor universal estéril).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea (Tampa roxa).            No mínimo 0,6 mL de líquor ou líquido sinovial.            Aspirado de tecido em swab seco estéril.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina, felina, equina, bovina e aves.</p>	1
1034	<b>ASPERGILLUS SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Swab nasal, swab de lesão ou swab orofaríngeo (Coletor universal estéril).            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Cultura microbiológica.            Fragmento de órgão (pulmão, pele, sacos aéreos) (Coletor universal estéril).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina, felina e aves.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1035	<b>ASPERGILLUS SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Swab nasal, swab de lesão ou swab orofaríngeo (Coletor universal estéril).            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Cultura microbiológica.            Fragmento de órgão (pulmão, pele, sacos aéreos) (Coletor universal estéril).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina, felina e aves.</p>	1
769	<b>BABESIA CANIS VOGELI - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).            Fragmento ou aspirado de baço (Coletor universal estéril/ swab seco estéril).            Carrapato (Coletor universal estéril).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina.</p>	1
1044	<b>MYCOPLASMA SPP - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sinais articulares: Líquido sinovial em frasco estéril.            Sinais reprodutivos: Lavado prepucial/vaginal, swab vaginal ou fragmento de órgão reprodutivo em frasco estéril.            Sinais respiratórios: Swab orofaríngeo, swab conjuntival, swab nasal em frasco estéril.            Sinais sistêmicos: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Aves: Fezes, swab de cloaca, swab orofaríngeo, órgãos em frasco estéril ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            No mínimo 0,6 mL de líquido sinovial ou lavado prepucial/vaginal.            Swab com material orgânico visível.            5g fezes.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Mamíferos, aves e répteis.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1045	MYCOPLASMA spp - REAL TIME PCR QUANTITATIVO	

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Sinais articulares: Líquido sinovial em frasco estéril.  
 Sinais reprodutivos: Lavado prepucial/vaginal, swab vaginal ou fragmento de órgão reprodutivo em frasco estéril.  
 Sinais respiratórios: Swab orofaríngeo, swab conjuntival, swab nasal em frasco estéril.  
 Sinais sistêmicos: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).  
 Aves: Fezes, swab de cloaca, swab orofaríngeo, órgãos em frasco estéril ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

**Quantidade(s) necessária(s):**

No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).  
 No mínimo 0,6 mL de líquido sinovial ou lavado prepucial/vaginal.  
 Swab com material orgânico visível.  
 5g fezes.

1

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Mamíferos, aves e répteis.

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
633	BABESIA CANIS VOGELI - REAL TIME PCR QUALITATIVO	

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).  
 Fragmento ou aspirado de baço (Coletor universal estéril/ swab seco estéril).  
 Carrapato (Coletor universal estéril).

**Quantidade(s) necessária(s):**

No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).

1

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Canina.

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1012	<b>BABESIA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de baço (Coletor universal estéril/swab seco estéril). Carrapato (Coletor universal estéril). Sinais neurológicos: Líquor (Coletor universal estéril). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Aspirado de tecido em swab seco. No mínimo 0,6 mL de líquor. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina, bovina, equina e primatas.	1
1013	<b>BABESIA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de baço (Coletor universal estéril/swab seco estéril). Carrapato (Coletor universal estéril). Sinais neurológicos: Líquor (Coletor universal estéril). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Aspirado de tecido em swab seco. No mínimo 0,6 mL de líquor. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina, bovina, equina e primatas.	1
1036	<b>BARTONELLA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO:</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	1
1037	<b>BARTONELLA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1038	<b>BLASTOMYCES DERMATITIDIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Amostra depende da manifestação clínica:            Sinais neurológicos: líquor (Coletor universal estéril).            Swab orofaríngeo ou swab de lesões cutâneas (Coletor universal estéril).            Aspirado de linfonodo, fragmento de pulmão ou outros órgãos (baço, fígado, pele) (Coletor universal estéril).            Lavado broncoalveolar ou aspirado percutâneo de lesão pulmonar (Coletor universal estéril).            Cultura microbiológica.            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            No mínimo 0,6 mL de líquor ou lavado broncoalveolar.            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina, felina e equina.</p>	1
1039	<b>BLASTOMYCES DERMATITIDIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Amostra depende da manifestação clínica:            Sinais neurológicos: líquor (Coletor universal estéril).            Swab orofaríngeo ou swab de lesões cutâneas (Coletor universal estéril).            Aspirado de linfonodo, fragmento de pulmão ou outros órgãos (baço, fígado, pele) (Coletor universal estéril).            Lavado broncoalveolar ou aspirado percutâneo de lesão pulmonar (Coletor universal estéril).            Cultura microbiológica.            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            No mínimo 0,6 mL de líquor ou lavado broncoalveolar.            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina, felina e equina.</p>	1
875	<b>BORDETELLA BRONCHISEPTICA - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Swab profundo de faringe (Coletor universal estéril).            Swab conjuntival (Coletor universal estéril).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina, felina, suína, equina, lagomorfos (coelhos) e aves.</p> <p><b>Causa(s) de Rejeição:</b>            Swab em meio de cultura.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
876	<b>BORDETELLA BRONCHISEPTICA - REAL TIME PCR QUANTITATIVO :</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Swab profundo de faringe (Coletor universal estéril).            Swab conjuntival (Coletor universal estéril).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina, felina, suína, equina, lagomorfos (coelhos) e aves.</p> <p><b>Causa(s) de Rejeição:</b>            Swab em meio de cultura.</p>	1
895	<b>BRUCELLA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sêmen, urina ou tecido de placenta (Coletor universal estéril).            Swab cérvix/vaginal ou uretral/prepucial (Coletor universal estéril).            Leite (Coletor universal estéril).            Feto abortado: fragmento de baço, rins, fígado ou conteúdo estomacal (Coletor universal estéril).            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab de mucosas de tecido reprodutivo com material orgânico visível.            No mínimo 2,0 mL de urina, sêmen ou leite.            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina, equina, suína e ruminantes.</p>	1
967	<b>BRUCELLA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sêmen, urina ou tecido de placenta (Coletor universal estéril).            Swab cérvix/vaginal ou uretral/prepucial (Coletor universal estéril).            Leite (Coletor universal estéril).            Feto abortado: fragmento de baço, rins, fígado ou conteúdo estomacal (Coletor universal estéril).            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab de mucosas de tecido reprodutivo com material orgânico visível.            No mínimo 2,0 mL de urina, sêmen ou leite.            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina, equina, suína e ruminantes.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
--------	-------	------------

728

#### **CALICIVÍRUS FELINO (FCV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO**

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

- Coriza: swab orofaríngeo, swab conjuntival ou swab nasal (Coletor universal estéril).
- Bucoestomatite: swab orofaríngeo coletado a partir das lesões (Coletor universal estéril).
- Variantes sistêmicas hipervirulentas: sangue total em tubo (tampa roxa) ou raspado cutâneo (caso ocorra lesões cutâneas) (Coletor universal estéril).
- Status de animais assintomáticos e monitoramento após recuperação: swab orofaríngeo coletado na região de tonsilas (Coletor universal estéril)
- Outras amostras possíveis: efusão abdominal ou pleural, pulmão (Coletor universal estéril).

**Quantidade(s) necessária(s):**

- Swab com material orgânico visível.
- No mínimo 2,0 mL de efusão abdominal ou pleural.

1

**Forma(s) de envio:**

- Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

- Felina.

918

#### **CALICIVÍRUS FELINO (FCV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

- Coriza: swab orofaríngeo, swab conjuntival ou swab nasal (Coletor universal estéril).
- Bucoestomatite: swab orofaríngeo coletado a partir das lesões (Coletor universal estéril).
- Variantes sistêmicas hipervirulentas: sangue total em tubo (tampa roxa) ou raspado cutâneo (caso ocorra lesões cutâneas) (Coletor universal estéril).
- Status de animais assintomáticos e monitoramento após recuperação: swab orofaríngeo coletado na região de tonsilas (Coletor universal estéril)
- Outras amostras possíveis: efusão abdominal ou pleural, pulmão (Coletor universal estéril).

**Quantidade(s) necessária(s):**

- Swab com material orgânico visível.
- No mínimo 2,0 mL de efusão abdominal ou pleural.

1

**Forma(s) de envio:**

- Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

- Felina.

961

#### **CAMPYLOBACTER SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO**

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

- Desordens gastrointestinais: fezes frescas ou swab retal (Coletor universal estéril).
- Desordens reprodutivas: fragmento de placenta, swab ou lavado prepucial/vaginal, sêmen, conteúdo estomacal de fetos abortados e/ou órgãos fetais (baço, fígado, rins) (Coletor universal estéril), Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) da fêmea (mãe).

**Quantidade(s) necessária(s):**

- Swab com material orgânico visível.
- No mínimo 2,0 mL lavado prepucial/vaginal ou sêmen.
- 5g fezes.
- No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

1

**Forma(s) de envio:**

- Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

- Canina, felina, suína, bovina e aves.

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
962	<b>CAMPYLOBACTER SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Desordens gastrointestinais: fezes frescas ou swab retal (Coletor universal estéril). Desordens reprodutivas: fragmento de placenta, swab ou lavado prepucial/vaginal, sêmen, conteúdo estomacal de fetos abortados e/ou órgãos fetais (baço, fígado, rins) (Coletor universal estéril), Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) da fêmea (mãe).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. No mínimo 2,0 mL lavado prepucial/vaginal ou sêmen. 5g fezes. No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina, suína, bovina e aves.	
1060	<b>CANDIDA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO :</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab ou raspado cutâneo da região afetada (Coletor universal estéril). Pelos/penas com raízes/bulbos da região acometida (Coletor universal estéril). Urina, fezes ou fragmento de órgão (sistema digestório) (Coletor universal estéril). Cultura microbiológica.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Swab com material orgânico visível. No mínimo 2,0 mL de urina. 5g fezes. No mínimo 10 penas com bulbo ou tufo de pelos.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.	
1061	<b>CANDIDA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab ou raspado cutâneo da região afetada (Coletor universal estéril). Pelos/penas com raízes/bulbos da região acometida (Coletor universal estéril). Urina, fezes ou fragmento de órgão (sistema digestório) (Coletor universal estéril). Cultura microbiológica.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Swab com material orgânico visível. No mínimo 2,0 mL de urina. 5g fezes. No mínimo 10 penas com bulbo ou tufo de pelos.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1133	<b>CANDIDATUS MYCOPLASMA HAEMOMINUTUM - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Biópsia ou aspirado de baço ou fígado (Coletor universal estéril/ swab seco estéril). Monitoramento da eficácia do tratamento: sangue total em tubo (tampa roxa). Detecção de animais assintomáticos: sangue total em tubo (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou aspirado do baço (swab seco estéril).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea (Tampa roxa). Aspirado de tecido em swab seco.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	
1132	<b>CANDIDATUS MYCOPLASMA HAEMOMINUTUM - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Biópsia ou aspirado de baço ou fígado (Coletor universal estéril/ swab seco estéril). Monitoramento da eficácia do tratamento: sangue total em tubo (tampa roxa). Detecção de animais assintomáticos: sangue total em tubo (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou aspirado do baço (swab seco estéril).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea (Tampa roxa). Aspirado de tecido em swab seco.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	
1134	<b>CANDIDATUS MYCOPLASMA TURICENSIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Biópsia ou aspirado de baço ou fígado (Coletor universal estéril/ swab seco estéril). Monitoramento da eficácia do tratamento: sangue total em tubo (tampa roxa). Detecção de animais assintomáticos: sangue total em tubo (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou aspirado do baço (swab seco estéril).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea (Tampa roxa). Aspirado de tecido em swab seco.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
--------	-------	------------

**1135 CANDIDATUS MYCOPLASMA TURICENSIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).  
Biópsia ou aspirado de baço ou fígado (Coletor universal estéril/ swab seco estéril).  
Monitoramento da eficácia do tratamento: sangue total em tubo (tampa roxa).  
Detecção de animais assintomáticos: sangue total em tubo (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou aspirado do baço (swab seco estéril).

**Quantidade(s) necessária(s):**

No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea (Tampa roxa).  
Aspirado de tecido em swab seco.

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

1

**Espécie(s) atendida(s):**

Felina.

**729 CHLAMYDOPHILA FELIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO**

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Swab faríngeo profundo, swab conjuntival, swab nasal (Coletor universal estéril).  
Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) da fêmea (mãe).

**Quantidade(s) necessária(s):**

Swab com material orgânico visível.

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

1

**Espécie(s) atendida(s):**

Felina.

**919 CHLAMYDOPHILA FELIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Swab faríngeo profundo, swab conjuntival, swab nasal (Coletor universal estéril).  
Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) da fêmea (mãe).

**Quantidade(s) necessária(s):**

Swab com material orgânico visível.

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

1

**Espécie(s) atendida(s):**

Felina.

## 723 VÍRUS DA CINOMOSE CANINA (CDV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Sinais clínicos multissistêmicos (sinais respiratórios, gastrointestinais, oftalmológicos, neurológicos e outros): swab conjuntival, swab nasal, swab orofaríngeo, fezes, swab retal, urina, líquor (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa), de acordo com os sinais clínicos.

Sinais clínicos neurológicos (sem sinais clínicos multissistêmicos): urina ou líquor.

**Quantidade(s) necessária(s):**

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo.

No mínimo 0,6 mL de líquor.

No mínimo 2,0 mL de urina.

1

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Canina.

## 899 CIRCOVÍRUS CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Desordens gastrointestinais: fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).

Vasculite e hemorragia intracavitária: sangue total em tubo (tampa roxa), aspirados teciduais ou biópsias (baço, linfonodos, rim, pâncreas, intestino) (Coletor universal estéril).

Sinais neurológicos progressivos (tetraparesia): líquor (Coletor universal estéril).

**Quantidade(s) necessária(s):**

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

No mínimo 0,6 mL de líquor.

1

5g fezes.

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Canina.

## 968 CIRCOVÍRUS CANINO - REAL TIME PCR QUANTITATIVO

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Desordens gastrointestinais: fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).

Vasculite e hemorragia intracavitária: sangue total em tubo (tampa roxa), aspirados teciduais ou biópsias (baço, linfonodos, rim, pâncreas, intestino) (Coletor universal estéril).

Sinais neurológicos progressivos (tetraparesia): líquor (Coletor universal estéril).

**Quantidade(s) necessária(s):**

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

No mínimo 0,6 mL de líquor.

1

5g fezes.

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Canina.

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1144	<b>CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ALFA TOXINA (CPA) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (Coletor universal estéril).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.	
1145	<b>CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ALFA TOXINA (CPA) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (Coletor universal estéril).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.	
1146	<b>CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ENTEROTOXINA(CPE) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (Coletor universal estéril).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.	
1147	<b>CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ENTEROTOXINA(CPE) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (Coletor universal estéril).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1015	<b>CLOSTRIDIUM SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (Coletor universal estéril).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.	
1155	<b>COCCIDIOIDES SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), líquor, swab nasal, swab orofaríngeo, swab/ raspado de lesões tegumentares, pus de abscesso, lavado brônquico, aspirado de lesões ósseas e articulações, urina, aspirado de medula óssea, aspirado de linfonodos ou fragmento de órgão (tecido tegumentar, pulmonar, cerebral) (Coletor universal estéril). Amostra ideal depende da manifestação clínica.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).	1
	No mínimo 0,6 mL de líquor ou lavado brônquico. Swab com material orgânico	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina, suína, ovina, bovina e primatas não humanos.	
1156	<b>COCCIDIOIDES SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), líquor, swab nasal, swab orofaríngeo, swab/ raspado de lesões tegumentares, pus de abscesso, lavado brônquico, aspirado de lesões ósseas e articulações, urina, aspirado de medula óssea, aspirado de linfonodos ou fragmento de órgão (tecido tegumentar, pulmonar, cerebral) (Coletor universal estéril). Amostra ideal depende da manifestação clínica.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).	1
	No mínimo 0,6 mL de líquor ou lavado brônquico. Swab com material orgânico	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina, suína, ovina, bovina e primatas não humanos.	
1014	<b>CLOSTRIDIUM SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (Coletor universal estéril).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
920	<b>CORONAVÍRUS CANINO (CCOV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).            Contaminação ambiental: swab ambiental (local de convívio do cão com suspeita clínica) (Coletor universal estéril).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.            5g fezes.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina.</p>	1
921	<b>CORONAVÍRUS CANINO (CCOV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).            Contaminação ambiental: swab ambiental (local de convívio do cão com suspeita clínica) (Coletor universal estéril).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.            5g fezes.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina.</p>	1
730	<b>CORONAVÍRUS FELINO (FCOV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Animais assintomáticos: fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).            Peritonite infecciosa felina (PIF) - Forma seca (não efusiva): líquor (sinais neurológicos), humor aquoso (sinais oftalmológicos), punção ou fragmento de rim ou fígado, sangue total em tubo (tampa roxa).            Peritonite infecciosa felina (PIF) - Forma úmida (efusiva): fluido abdominal ou sangue total EDTA (tampa roxa).            Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.            5g fezes.            No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            No mínimo 0,6 mL de fluido abdominal ou torácico.            No mínimo 0,6 mL de líquor.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Felina.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
782	<b>CORONAVÍRUS FELINO (FCOV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b></p> <p>Animais assintomáticos: fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).</p> <p>Peritonite infeciosa felina (PIF) - Forma seca (não efusiva): líquor (sinais neurológicos), humor aquoso (sinais oftalmológicos), punção ou fragmento de rim ou fígado, sangue total em tubo (tampa roxa).</p> <p>Peritonite infeciosa felina (PIF) - Forma úmida (efusiva): fluido abdominal ou sangue total EDTA (tampa roxa).</p> <p>Desordens reprodutivas: fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais (Coletor universal estéril). Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total em tubo (tampa roxa) da fêmea (mãe).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b></p> <p>Swab com material orgânico visível.</p> <p>5g fezes.</p> <p>No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p>No mínimo 0,6 mL de fluido abdominal ou torácico.</p> <p>No mínimo 0,6 mL de líquor.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b></p> <p>Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b></p> <p>Felina.</p>	1
900	<b>CRYPTOCOCCUS SPP. (NEOFORMANS/GATTII) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b></p> <p>Swab retal, fezes, swab orofaríngeo, líquor (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa).</p> <p>Síndrome neurológica: líquor (Coletor universal estéril) e/ou sangue total em tubo (tampa roxa).</p> <p>Síndrome ocular/respiratória: swab conjuntival, swab de faringe, swab nasal ou lavado brônquico (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa).</p> <p>Síndrome cutânea: swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, aspirado de tecido ou fragmento de pele (Coletor universal estéril).</p> <p>Micose sistêmica: sangue total em tubo (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b></p> <p>Swab com material orgânico visível.</p> <p>5g fezes.</p> <p>No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo.</p> <p>No mínimo 0,6 mL de lavado</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b></p> <p>Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b></p> <p>Aves e mamíferos.</p>	1
901	<b>CRYPTOCOCCUS SPP. (NEOFORMANS/GATTI) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b></p> <p>Swab retal, fezes, swab orofaríngeo, líquor (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa).</p> <p>Síndrome neurológica: líquor (Coletor universal estéril) e/ou sangue total em tubo (tampa roxa).</p> <p>Síndrome ocular/respiratória: swab conjuntival, swab de faringe, swab nasal ou lavado brônquico (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa).</p> <p>Síndrome cutânea: swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, aspirado de tecido ou fragmento de pele (Coletor universal estéril).</p> <p>Micose sistêmica: sangue total em tubo (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b></p> <p>Swab com material orgânico visível.</p> <p>5g fezes.</p> <p>No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo.</p> <p>No mínimo 0,6 mL de lavado</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b></p> <p>Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b></p> <p>Aves e mamíferos.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
--------	-------	------------

898 CRYPTOSPORIDIUM SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).

**Quantidade(s) necessária(s):**

Swab com material orgânico visível.

5g fezes.

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Aves e mamíferos.

1

922 CRYPTOSPORIDIUM SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).

**Quantidade(s) necessária(s):**

Swab com material orgânico visível.

5g fezes.

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Aves e mamíferos.

1

1026 CYTAUXZON SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

Fragmento ou aspirado de órgãos (baço, fígado, medula óssea) (Coletor universal estéril/  
swab seco estéril).

**Quantidade(s) necessária(s):**

No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

Aspirado de tecido em swab seco.

1

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Felina.

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1027	<b>CYTAUXZON SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento ou aspirado de órgãos (baço, fígado, medula óssea) (Coletor universal estéril/swab seco estéril).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Aspirado de tecido em swab seco.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	
1153	<b>DIROFILARIA IMMITIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos.	
1154	<b>DIROFILARIA IMMITIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO:</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos.	
615	<b>EHRLICHIA CANIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço, líquido sinovial ou carrapato (Coletor universal estéril). Sinais neurológicos: líquor (Coletor universal estéril).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). No mínimo 0,6 mL de líquor ou líquido sinovial.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
--------	-------	------------

**771 EHRLICHIA CANIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço, líquido sinovial ou carrapato (Coletor universal estéril).

Sinais neurológicos: líquor (Coletor universal estéril).

**Quantidade(s) necessária(s):**

No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).

No mínimo 0,6 mL de líquor ou líquido sinovial.

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

1

**Espécie(s) atendida(s):**

Canina e felina.

**1151 EHRLICHIA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO**

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço, líquido sinovial ou carrapato (Coletor universal estéril).

Sinais neurológicos: líquor (Coletor universal estéril).

**Quantidade(s) necessária(s):**

No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).

No mínimo 0,6 mL de líquor ou líquido sinovial.

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

1

**Espécie(s) atendida(s):**

Canina, felina e equina.

**1152 EHRLICHIA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO**

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço, líquido sinovial ou carrapato (Coletor universal estéril).

Sinais neurológicos: líquor (Coletor universal estéril).

**Quantidade(s) necessária(s):**

No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).

No mínimo 0,6 mL de líquor ou líquido sinovial.

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

1

**Espécie(s) atendida(s):**

Canina, felina e equina.

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
--------	-------	------------

**731 GIARDIA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO****Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).

**Quantidade(s) necessária(s):**

5g fezes.

Swab com material orgânico visível.

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Mamíferos e aves.

1

**784 GIARDIA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO****Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).

**Quantidade(s) necessária(s):**

5g fezes.

Swab com material orgânico visível.

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Mamíferos e aves.

1

**1022 HEPATOZOON SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO****Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

**Quantidade(s) necessária(s):**

No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Mamíferos e répteis.

1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1023	<b>HEPATOZOON SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Mamíferos e répteis.</p>	1
897	<b>HERPESVÍRUS CANINO 1 (CHV-1) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Desordens reprodutivas: sangue total em tubo (tampa roxa), swab vaginal ou prepucial, sêmen ou urina (Coletor universal estéril).            Abortos: fragmento de fígado, baço, pulmão ou rim do feto abortado (Coletor universal estéril).            Desordens respiratórias: sangue total em tubo (tampa roxa), swab orofaríngeo profundo, swab conjuntival (Coletor universal estéril).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            No mínimo 2,0 mL de urina.            No mínimo 0,5 mL de sêmen.            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina.</p>	1
969	<b>HERPESVÍRUS CANINO 1 (CHV-1) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Desordens reprodutivas: sangue total em tubo (tampa roxa), swab vaginal ou prepucial, sêmen ou urina (Coletor universal estéril).            Abortos: fragmento de fígado, baço, pulmão ou rim do feto abortado (Coletor universal estéril).            Desordens respiratórias: sangue total em tubo (tampa roxa), swab orofaríngeo profundo, swab conjuntival (Coletor universal estéril).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            No mínimo 2,0 mL de urina.            No mínimo 0,5 mL de sêmen.            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1265	<b>HERPESVÍRUS EQUINO 1 (EHV-1) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab nasal ou nasofaríngeo profundo (um de cada narina) (Coletor universal estéril). Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Líquor (Tubo de transporte). Fragmento de tecido (pulmão, fígado, cérebro ou medula espinhal) (Coletor universal estéril).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo. No mínimo 0,6 mL de líquor.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Equina.	
871	<b>HERPESVÍRUS FELINO (FHV-1) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sinais oftalmológicos: swab conjuntival (Coletor universal estéril). Coriza: swab conjuntival, swab nasal, swab orofaríngeo, efusão pleural ou fragmento de pulmão (Coletor universal estéril). Abortos ou desordens reprodutivas: swab vaginal, swab prepucial, placenta, sêmen ou órgãos fetais (Coletor universal estéril). Determinação de status de portadores assintomáticos: swab orofaríngeo. Outros materiais: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) ou swab de lesão.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo com EDTA. No mínimo 0,5 mL de sêmen No mínimo 2,0 mL efusão pleural. Swab com material orgânico visível.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	
872	<b>HERPESVÍRUS FELINO (FHV-1) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO (RINOTRAQUEÍTE INFECIOSA FELINA)</b>	1
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sinais oftalmológicos: swab conjuntival (Coletor universal estéril). Coriza: swab conjuntival, swab nasal, swab orofaríngeo, efusão pleural ou fragmento de pulmão (Coletor universal estéril). Abortos ou desordens reprodutivas: swab vaginal, swab prepucial, placenta, sêmen ou órgãos fetais (Coletor universal estéril). Determinação de status de portadores assintomáticos: swab orofaríngeo. Outros materiais: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) ou swab de lesão.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo com EDTA. No mínimo 0,5 mL de sêmen No mínimo 2,0 mL efusão pleural. Swab com material orgânico visível.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1040	<b>HISTOPLASMA CAPSULATUM - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b></p> <p>Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), urina, lavado brônquico, fezes, swab retal, swab de lesão cutânea, aspirado de linfonodo em swab seco (Coletor universal estéril).</p> <p>Fragmento de órgão (pulmão, baço, fígado, nódulos em pele) (Coletor universal estéril).</p> <p>Cultura microbiológica.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b></p> <p>No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). No mínimo 2,0 mL de urina ou lavado brônquico. Swab com material orgânico visível. 5g fezes.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b></p> <p>Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b></p> <p>Canina e felina.</p>	1
1041	<b>HISTOPLASMA CAPSULATUM - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b></p> <p>Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), urina, lavado brônquico, fezes, swab retal, swab de lesão cutânea, aspirado de linfonodo em swab seco (Coletor universal estéril).</p> <p>Fragmento de órgão (pulmão, baço, fígado, nódulos em pele) (Coletor universal estéril).</p> <p>Cultura microbiológica.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b></p> <p>No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). No mínimo 2,0 mL de urina ou lavado brônquico. Swab com material orgânico visível. 5g fezes.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b></p> <p>Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b></p> <p>Canina e felina.</p>	1
483	<b>LEISHMANIA INFANTUM (CHAGASI) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b></p> <p>Diagnóstico inicial: Medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou punção de baço em frasco estéril.</p> <p>Acompanhamento de Tratamento: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou fragmento de pele (ponta de orelha) em frasco estéril.</p> <p>Suspeita clínica (em ordem de indicação): Medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), fragmento de pele (ponta de orelha) em frasco estéril, Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), swab de lesão em frasco estéril ou líquido sinovial em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p>Animal saudável: Medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b></p> <p>No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA, medula óssea ou líquido sinovial (Tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b></p> <p>Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b></p> <p>Mamíferos.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1332	<b>LEISHMANIA INFANTUM (CHAGASI) – REAL TIME PCR EM BLOCO DE PARAFINA</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina (informar nas observações qual dos agentes disponíveis deseja).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1 bloco de parafina	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	5
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos.	
785	<b>LEPTOSPIRA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Urina em frasco estéril ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de tecido: Fígado, rim, pulmão ou cérebro em frasco estéril. Desordens reprodutivas: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), órgãos do feto abortado ou swab vaginal em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). No mínimo 2,0 mL de urina. Swab com material orgânico visível.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina, bovina, caprina, ovina, equina e suína.	
680	<b>LEISHMANIA INFANTUM (CHAGASI) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Diagnóstico inicial: Medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou punção de baço em frasco estéril. Acompanhamento de Tratamento: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou fragmento de pele (ponta de orelha) em frasco estéril. Suspeita clínica (em ordem de indicação): Medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), fragmento de pele (ponta de orelha) em frasco estéril, Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), swab de lesão em frasco estéril ou líquido sinovial em tubo com EDTA (tampa roxa). Animal saudável: Medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).	1
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA, medula óssea ou líquido sinovial (Tampa roxa).	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos.	
786	<b>LEPTOSPIRA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Urina em frasco estéril ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de tecido: Fígado, rim, pulmão ou cérebro em frasco estéril. Desordens reprodutivas: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), órgãos do feto abortado ou swab vaginal em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). No mínimo 2,0 mL de urina. Swab com material orgânico visível.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina, bovina, caprina, ovina, equina e suína.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1054	<b>LEUCOCYTOZOON SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de órgão (fígado, baço) em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos, aves e répteis.	
1055	<b>LEUCOCYTOZOON SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de órgão (fígado, baço) em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos, aves e répteis.	
1018	<b>LISTERIA MONOCYTOGENES - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Desordens neurológicas: Líquor em frasco estéril. Desordens reprodutivas: Órgãos de feto abortado, placenta, material exsudativo, swab cervical/vaginal em frasco estéril. Desordens sistêmicas: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). No mínimo 0,6 mL de líquor ou material exsudativo.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos, aves e peixes.	
1019	<b>LISTERIA MONOCYTOGENES - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Desordens neurológicas: Líquor em frasco estéril. Desordens reprodutivas: Órgãos de feto abortado, placenta, material exsudativo, swab cervical/vaginal em frasco estéril. Desordens sistêmicas: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). No mínimo 0,6 mL de líquor ou material exsudativo.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos, aves e peixes.	
955	<b>MALASSEZIA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Raspado cutâneo (área transicional entre pele afetada e pele saudável), swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, fragmento de pele, swab de ouvido, pelos da borda da lesão com raiz em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
956	<b>MALASSEZIA spp. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Raspado cutâneo (área transicional entre pele afetada e pele saudável), swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, fragmento de pele, swab de ouvido, pelos da borda da lesão com raiz em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	
947	<b>MICROSPORUM spp. - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Raspado ou swab de lesão cutânea (área transicional entre pele afetada e pele saudável), fragmento de pele, pelos da borda da lesão com raízes em frasco estéril. Fragmentos de unhas + raspado de leito ungueal em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	
948	<b>MICROSPORUM spp. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Raspado ou swab de lesão cutânea (área transicional entre pele afetada e pele saudável), fragmento de pele, pelos da borda da lesão com raízes em frasco estéril. Fragmentos de unhas + raspado de leito ungueal em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	
1048	<b>MYCOBACTERIUM spp. - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes, swab retal/cloacal, aspirado de linfonodo, lavado brônquico, lavado gástrico, fragmento de órgão (baço, pulmão, fígado, gônadas, pele, sacos aéreos) em frasco estéril, sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,6 mL de lavado brônquico ou gástrico. 5g fezes.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos e aves.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1049	<b>MYCOBACTERIUM spp. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes, swab retal/cloacal, aspirado de linfonodo, lavado brônquico, lavado gástrico, fragmento de órgão (baço, pulmão, fígado, gônadas, pele, sacos aéreos) em frasco estéril, sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,6 mL de lavado brônquico ou gástrico. 5g fezes. Swab com material orgânico visível. No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos e aves.	
1213	<b>MYCOPLASMA CYNOS - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab nasal, swab orofaríngeo ou tecido de via aérea em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	
1214	<b>MYCOPLASMA CYNOS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab nasal, swab orofaríngeo ou tecido de via aérea em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	
923	<b>MYCOPLASMA FELIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sinais oftalmológicos: swab conjuntival em frasco estéril. Coriza, rinosinusite, pneumonia: swab orofaríngeo, swab conjuntival, swab nasal, Fragmento de pulmão em frasco estéril, fluido torácico ou lavado brônquico (Tampa roxa). Status de animais assintomáticos: swab orofaríngeo em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. No mínimo 0,6 mL de fluido torácico ou lavado brônquico.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	

CÓDI-	EXAME	DIAS ÚTEIS
924	<b>MYCOPLASMA FELIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sinais oftalmológicos: swab conjuntival em frasco estéril.            Coriza, rinosinusite, pneumonia: swab orofaríngeo, swab conjuntival, swab nasal, Fragmento de pulmão em frasco estéril, fluido torácico ou lavado brônquico (Tampa roxa).            Status de animais assintomáticos: swab orofaríngeo em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.            No mínimo 0,6 mL de fluido torácico ou lavado brônquico.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Felina.</p>	1
548	<b>MYCOPLASMA HAEMOCANIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).            Biopsia de baço ou hepática em frasco estéril.            Monitoramento da Eficácia do Tratamento: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Detecção de animais assintomáticos: Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou aspirado do baço em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea (Tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina.</p>	1
775	<b>MYCOPLASMA HAEMOCANIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).            Biopsia de baço ou hepática em frasco estéril.            Monitoramento da Eficácia do Tratamento: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Detecção de animais assintomáticos: Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou aspirado do baço em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea (Tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
547	<b>MYCOPLASMA HAEMOFELIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).            Biopsia de baço ou hepática em frasco estéril.            Monitoramento da Eficácia do Tratamento: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Detecção de animais assintomáticos: Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou aspirado do baço em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea (Tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Felina.</p>	1
774	<b>MYCOPLASMA HAEMOFELIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).            Biopsia de baço ou hepática em frasco estéril.            Monitoramento da Eficácia do Tratamento: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Detecção de animais assintomáticos: Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou aspirado do baço em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea (Tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Felina.</p>	1
902	<b>NEOSPORA CANINUM - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Líquor, fezes ou swab retal em frasco estéril, Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Fragmento de tecidos de fetos abortados (cérebro e coração), líquido amniótico, líquor de fetos abortados, leite ou sêmen em frasco estéril, Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 2,0 mL de líquido amniótico, leite ou sêmen.            5g fezes.            Swab com material orgânico visível.            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            No mínimo 0,6 mL de líquor.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Mamíferos.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
--------	-------	------------

**903 NEOSPORA CANINUM - REAL TIME PCR QUANTITATIVO****Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Líquor, fezes ou swab retal em frasco estéril, Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

Fragmento de tecidos de fetos abortados (cérebro e coração), líquido amniótico, líquor de fetos abortados, leite ou sêmen em frasco estéril, Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

**Quantidade(s) necessária(s):**

No mínimo 2,0 mL de líquido amniótico, leite ou sêmen.

5g fezes.

Swab com material orgânico visível.

No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

No mínimo 0,6 mL de líquor.

1

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Mamíferos.

**931 PANLEUCOPENIA FELINA (FPV, PARVOVIRUS FELINO) - REAL TIME PCR QUALITATIVO****Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Fezes ou swab retal em frasco estéril.

Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

Fragmentos de intestino ou estômago em frasco estéril.

Desordens neurológicas (filhotes): Líquor ou tecido encefálico em frasco estéril.

Desordens reprodutivas: Fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais em frasco estéril.

Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total com EDTA (Tampa roxa) da fêmea (mãe).

Contaminação ambiental: Swab ambiental em frasco estéril.

**Quantidade(s) necessária(s):**

No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

No mínimo 0,6 mL de líquor.

1

5g fezes.

Swab com material orgânico visível.

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Felina.

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
932	PANLEUCOPENIA FELINA (FPV PARVOVIRUS FELINO) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b></p> <p>Fezes ou swab retal em frasco estéril.            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Fragmentos de intestino ou estômago em frasco estéril.            Desordens neurológicas (filhotes): Líquor ou tecido encefálico em frasco estéril.            Desordens reprodutivas: Fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais em frasco estéril.            Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total com EDTA (Tampa roxa) da fêmea (mãe).            Contaminação ambiental: Swab ambiental em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b></p> <p>No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            No mínimo 0,6 mL de líquor.            5g fezes.            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b></p> <p>Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b></p> <p>Felina.</p>	1
925	PARVOVÍRUS CANINO 2 (CPV-2) - REAL TIME PCR QUALITATIVO	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b></p> <p>Fezes ou swab retal em frasco estéril.            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Fragmentos de intestino ou estômago em frasco estéril.            Fragmento de coração: Filhotes até 3 meses (morte súbita) em frasco estéril.            Fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais em frasco estéril.            Contaminação ambiental: Swab ambiental em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b></p> <p>No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            5g fezes.            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b></p> <p>Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b></p> <p>Canina.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
926	<b>PARVOVÍRUS CANINO 2 (CPV-2) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal em frasco estéril. Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmentos de intestino ou estômago em frasco estéril. Fragmento de coração: Filhotes até 3 meses (morte súbita) em frasco estéril. Fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais em frasco estéril. Contaminação ambiental: Swab ambiental em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). 5g fezes. Swab com material orgânico visível.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	
1284	<b>PCR PARA ONCOGENE C-KIT EM MASTOCITOMA</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina e laudo histopatológico.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	5
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	
963	<b>RANGELIA VITALII - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de órgãos: Linfonodos, plexo coroide, rins, pulmões e região medular da glândula adrenal em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	
964	<b>RANGELIA VITALII - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de órgãos: Linfonodos, plexo coroide, rins, pulmões e região medular da glândula adrenal em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1020	RICKETTSIA SPP (RICKETTSIA RICKETTSII: FEBRE MACULOSA) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). 1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos.	
1021	RICKETTSIA SPP (RICKETTSIA RICKETTSII: FEBRE MACULOSA) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). 1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos.	
1016	SALMONELLA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes, swab ou fragmento (fígado, baço, coração, vesícula biliar, aparelho reprodutor, cecos) em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 5g fezes. Swab com material orgânico visível.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. 1	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves, mamíferos e répteis.	
1017	SALMONELLA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes, swab ou fragmento (fígado, baço, coração, vesícula biliar, aparelho reprodutor, cecos) em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 5g fezes. Swab com material orgânico visível.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. 1	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves, mamíferos e répteis.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
953	<b>SPOROTHRIX SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO (ESPOROTRICOSE)</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Ulcerações cutâneas: Raspado cutâneo (área transicional entre pele afetada e pele saudável), swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, aspirado de tecido ou fragmento de pele em frasco estéril            Linfonodos aumentados: Aspirado de linfonodo ou fragmento de linfonodo em frasco estéril.            Secreção nasal: Swab nasal em frasco estéril.            Fragmentos de unhas + raspado de leito ungueal em frasco estéril.            Desordens neurológicas: Líquor em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.            No mínimo 0,6 mL de líquor.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina e felina.</p>	1
954	<b>SPOROTHRIX SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO (ESPOROTRICOSE)</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Ulcerações cutâneas: Raspado cutâneo (área transicional entre pele afetada e pele saudável), swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, aspirado de tecido ou fragmento de pele em frasco estéril            Linfonodos aumentados: Aspirado de linfonodo ou fragmento de linfonodo em frasco estéril.            Secreção nasal: Swab nasal em frasco estéril.            Fragmentos de unhas + raspado de leito ungueal em frasco estéril.            Desordens neurológicas: Líquor em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.            No mínimo 0,6 mL de líquor.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina e felina.</p>	1
1161	<b>TESTE PARA MUTAÇÃO DO GENE BRAF PARA CARCINOMA DE VESÍCULA URINÁRIA E PROSTATA DE CÃES</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Urina ou lavado vesical acondicionados em frasco estéril ou tubo sem aditivos (Tubo Tampa Branca).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Mínimo 2,0 mL de urina ou lavado vesical.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado (estabilidade de 3 dias sob refrigeração ou congelada por 30 dias).</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            canina.</p>	3

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1162	<b>TESTE PARR - DIAGNÓSTICO E IMUNOFENOTIPAGEM DE LINFOMAS</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Punção de linfonodos (porta lâmina com lâminas), líquidos cavitários (coletor universal estéril) ou lâminas de citologia coradas (porta lâmina com lâminas).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            5,0 mL de líquido cavitário.            3 lâminas com material visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina e felina.</p> <p><b>Causa(s) de Rejeição:</b>            Material inadequado e volume insuficiente.</p>	5
733	<b>TOXOPLASMA GONDII - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sinais neurológicos: Líquor ou cérebro em frasco estéril.            Abortamento (cães, pequenos ruminantes): Swab vaginal, placenta, líquido amniótico, tecidos fetais (figado, baço, pulmão, coração, intestino) em frasco estéril.            Sinais gastrointestinais ou determinação de portadores assintomáticos: Fezes ou swab retal em frasco estéril.            Sinais respiratórios: Lavado brônquico, fluido broncoalveolar, fluido torácico ou fragmento de pulmão em frasco estéril.            Sinais oftalmológicos (uveíte; comum em gatos): Humor aquoso em frasco estéril.            Febre: sangue total com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.            No mínimo 0,6 mL de líquor ou humor aquoso.            No mínimo 2,0 mL de líquido amniótico, lavado brônquico, fluido broncoalveolar ou fluido torácico.            5g fezes.            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Mamíferos.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
783	<b>TOXOPLASMA GONDII - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sinais neurológicos: Líquor ou cérebro em frasco estéril. Abortamento (cães, pequenos ruminantes): Swab vaginal, placenta, líquido amniótico, tecidos fetais (fígado, baço, pulmão, coração, intestino) em frasco estéril. Sinais gastrointestinais ou determinação de portadores assintomáticos: Fezes ou swab retal em frasco estéril. Sinais respiratórios: Lavado brônquico, fluido broncoalveolar, fluido torácico ou fragmento de pulmão em frasco estéril. Sinais oftalmológicos (uveíte; comum em gatos): Humor aquoso em frasco estéril. Febre: sangue total com EDTA (Tampa roxa).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. No mínimo 0,6 mL de líquor ou humor aquoso. No mínimo 2,0 mL de líquido amniótico, lavado brônquico, fluido broncoalveolar ou fluido torácico. 5g fezes. No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos.	
949	<b>TRICHOPHYTON SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Raspado ou swab de lesão cutânea (área transicional entre pele afetada e pele saudável), fragmento de pele, pelos da borda da lesão com raízes em frasco estéril. Fragmentos de unhas + raspado de leito ungueal em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. Tufo de pelo.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	
950	<b>TRICHOPHYTON SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Raspado ou swab de lesão cutânea (área transicional entre pele afetada e pele saudável), fragmento de pele, pelos da borda da lesão com raízes em frasco estéril. Fragmentos de unhas + raspado de leito ungueal em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. Tufo de pelo.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
--------	-------	------------

**927 TRITRICHOMONAS FOETUS - REAL TIME PCR QUALITATIVO****Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Felino: Fezes ou swab retal em frasco estéril.

Bovino: Raspado prepucial (escarificação da mucosa do prepúcio e do pênis), lavado prepucial, swab prepucial, swab vaginal ou sêmen, líquido abomasal de fetos abortados em frasco estéril.

**Quantidade(s) necessária(s):**

Swab com material orgânico visível.

5g de fezes.

No mínimo 2,0 mL lavado prepucial, líquido abomasal ou sêmen.

**Forma(s) de envio:**

1

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Felina e bovina.

**928 TRITRICHOMONAS FOETUS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO****Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Felino: Fezes ou swab retal em frasco estéril.

Bovino: Raspado prepucial (escarificação da mucosa do prepúcio e do pênis), lavado prepucial, swab prepucial, swab vaginal ou sêmen, líquido abomasal de fetos abortados em frasco estéril.

**Quantidade(s) necessária(s):**

Swab com material orgânico visível.

5g de fezes.

No mínimo 2,0 mL lavado prepucial, líquido abomasal ou sêmen.

1

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Felina e bovina.

**1010 TRYPANOSOMA SPP - REAL TIME PCR QUALITATIVO****Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

**Quantidade(s) necessária(s):**

No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

**Forma(s) de envio:**

1

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Mamíferos.

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1011	<b>TRYPANOSOMA SPP - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos.	1
894	<b>VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Desordens reprodutivas: Fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais em frasco estéril. Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total com EDTA (Tampa roxa) da fêmea (mãe). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	1
929	<b>VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Desordens reprodutivas: Fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais em frasco estéril. Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total com EDTA (Tampa roxa) da fêmea (mãe). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
816	<b>VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - RNA VIRAL - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
820	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b></p> <p>Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).            Lesões bucais (estomatite, gengivite e outras): Swab orofaríngeo em frasco estéril ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Desordens neurológicas: Líquor ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Desordens reprodutivas: Fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais em frasco estéril.            Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total com EDTA (Tampa roxa) da fêmea (mãe).            Doença ocular (uveíte): Humor aquoso ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b></p> <p>No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).            No mínimo 0,6 mL de humor aquoso ou líquor.            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b></p> <p>Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b></p> <p>Felina.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
893	<b>VÍRUS DA LEUCEMIA FELINA (FELV) - DNA PROVIRAL - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Desordens reprodutivas: Fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais em frasco estéril. Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total com EDTA (Tampa roxa) da fêmea (mãe). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	1

930	<b>VÍRUS DA LEUCEMIA FELINA (FELV) - DNA PROVIRAL - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Desordens reprodutivas: Fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais em frasco estéril. Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total com EDTA (Tampa roxa) da fêmea (mãe). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	1
-----	--	---

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
--------	-------	------------

**817 VIRUS DA LEUCEMIA FELINA (FELV) - RNA VIRAL - REAL TIME PCR QUALITATIVO****Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).

Lesões bucais (estomatite, gengivite e outras): Swab orofaríngeo em frasco estéril ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

Desordens neurológicas: Líquor ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

Desordens reprodutivas: Fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais em frasco estéril.

Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total com EDTA (Tampa roxa) da fêmea (mãe).

Doença ocular (uveíte): Humor aquoso ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

Neoplasia: Biópsia de tumor, órgãos ou linfonodos em frasco estéril.

**Quantidade(s) necessária(s):**

No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). 1

No mínimo 0,6 mL de humor aquoso ou líquor.

Swab com material orgânico visível.

Possível analisar pool de até 3 amostras.

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Felina.

**821 VÍRUS DA LEUCEMIA FELINA (FELV) - RNA VIRAL - REAL TIME PCR QUANTITATIVO****Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).

Lesões bucais (estomatite, gengivite e outras): Swab orofaríngeo em frasco estéril ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

Desordens neurológicas: Líquor ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

Desordens reprodutivas: Fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais em frasco estéril.

Conteúdo estomacal fetal e/ou sangue total com EDTA (Tampa roxa) da fêmea (mãe).

Doença ocular (uveíte): Humor aquoso ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

Neoplasia: Biópsia de tumor, órgãos ou linfonodos em frasco estéril.

**Quantidade(s) necessária(s):**

No mínimo 0,5 mL de sangue total em EDTA ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). 1

No mínimo 0,6 mL de humor aquoso ou líquor.

Swab com material orgânico visível.

Possível analisar pool de até 3 amostras.

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Felina.



**BIOLOGIA  
MOLECULAR  
PCR  
SILVESTRE**

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1207	<b>BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Fezes ou swab retal em frasco estéril.            Tecido cerebral em frasco estéril.            Possível analisar pool de até 3 amostras.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Swab com material orgânico visível.            5g fezes.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Aves.</p>	1
1208	<b>BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Fezes ou swab retal em frasco estéril.            Tecido cerebral em frasco estéril.            Possível analisar pool de até 3 amostras.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Swab com material orgânico visível.            5g fezes.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Aves.</p>	1
1032	<b>CHLAMYDOPHILA PSITTACI - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Swab de coana ou orofaríngeo em frasco estéril.            Swab de cloaca, fezes, secreções, saliva, penas com bulbo, swab conjuntival, fragmento de órgão (baço, fígado e/ou saco aéreo) em frasco estéril ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            5g fezes.            No mínimo 10 penas com bulbo.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Aves.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1033	<b>CHLAMYDOPHILA PSITTACI - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Swab de coana ou orofaríngeo em frasco estéril.            Swab de cloaca, fezes, secreções, saliva, penas com bulbo, swab conjuntival, fragmento de órgão (baço, fígado e/ou saco aéreo) em frasco estéril ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            5g fezes.            No mínimo 10 penas com bulbo.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Aves.</p>	1
1024	<b>DOENCA DE BICO E PENAS DE PSITACIDEOS (CIRCOVIRUS PBFDV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Penas, fezes, swab oral e/ou cloacal, fragmento de órgãos (timo, Bursa de Fabricius, baço, fígado, pele) em frasco estéril.            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            5g fezes.            Swab com material orgânico visível.            No mínimo 10 penas com bulbo.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Aves.</p>	1
1025	<b>DOENCA DE BICO E PENAS DE PSITACIDEOS (CIRCOVIRUS PBFDV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Penas, fezes, swab oral e/ou cloacal, fragmento de órgãos (timo, Bursa de Fabricius, baço, fígado, pele) em frasco estéril.            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            5g fezes.            Swab com material orgânico visível.            No mínimo 10 penas com bulbo.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Aves.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1205	<b>ENCEPHALITOZOON CUNICULI - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Urina, Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), fezes ou swab retal em frasco estéril.            Tecido afetado (fígado, rim, placenta, olho ou fragmento de SNC) em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 2,0 mL de urina.            0,5 mL Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            5g fezes.            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina, Lagomorfos (Coelhos), roedores, aves e primatas não humanos.</p>	1
1206	<b>ENCEPHALITOZOON CUNICULI - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Urina, Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), fezes ou swab retal em frasco estéril.            Tecido afetado (fígado, rim, placenta, olho ou fragmento de SNC) em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 2,0 mL de urina.            0,5 mL Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            5g fezes.            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina, Lagomorfos (Coelhos), roedores, aves e primatas não humanos.</p>	1
1052	<b>HAEMOPROTEUS SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            Fragmento de órgão (fígado, baço) em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Aves, anfíbios, mamíferos e répteis.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1053	<b>HAEMOPROTEUS SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de órgão (fígado, baço) em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves, anfíbios, mamíferos e répteis.	
1043	<b>HERPESVÍRUS DE PACHECO (HERPESVÍRUS DOS PSITACÍDEOS 1 PSHV - 1) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Assintomáticos e portadores: Fezes ou swab de cloaca em frasco estéril. Sintomáticos: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), fezes, swab de cloaca, swab orofaríngeo, fragmento de órgão (fígado, rim, baço, intestino, paratireoide, ovário, medula óssea) em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	
	Swab com material orgânico visível.	1
	5g fezes.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.	
1054	<b>LEUCOCYTOZOOON SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de órgão (fígado, baço) em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos, aves e répteis.	
1055	<b>LEUCOCYTOZOOON SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de órgão (fígado, baço) em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos, aves e répteis.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1018	<b>LISTERIA MONOCYTOGENES - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Desordens neurológicas: Líquor em frasco estéril.            Desordens reprodutivas: Órgãos de feto abortado, placenta, material exsudativo, swab cervical/vaginal em frasco estéril.            Desordens sistêmicas: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            No mínimo 0,6 mL de líquor ou material exsudativo.            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Mamíferos, aves e peixes.</p>	1
1019	<b>LISTERIA MONOCYTOGENES - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Desordens neurológicas: Líquor em frasco estéril.            Desordens reprodutivas: Órgãos de feto abortado, placenta, material exsudativo, swab cervical/vaginal em frasco estéril.            Desordens sistêmicas: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            No mínimo 0,6 mL de líquor ou material exsudativo.            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Mamíferos, aves e peixes.</p>	1
1028	<b>MEGABACTÉRIA (MACRORHABDUS ORNITHOGASTER) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Fezes, swab cloacal, fragmento de ventrículo e/ou proventrículo (mucosa) em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.            5g fezes.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Aves.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1029	<b>MEGABACTÉRIA (MACRORHABDUS ORNITHOGASTER) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes, swab cloacal, fragmento de ventrículo e/ou proventrículo (mucosa) em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.	
1121	<b>MYXOMA VIRUS - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Quadro nodular: Fragmento de tecido com mixomatose nodular (pele, pálebra, mucosa genital ou órgãos internos como pulmões, fígado, baço e rins) em frasco estéril. Quadro respiratório: Swab nasal e/ou conjuntival em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Lagomorfos (Coelhos).	
1122	<b>MYXOMA VIRUS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Quadro nodular: Fragmento de tecido com mixomatose nodular (pele, pálebra, mucosa genital ou órgãos internos como pulmões, fígado, baço e rins) em frasco estéril. Quadro respiratório: Swab nasal e/ou conjuntival em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Lagomorfos (Coelhos).	
1066	<b>PAINEL CHECK-UP AVIÁRIO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Chlamydophila psittaci, Aspergillus spp., Mycoplasma spp., Salmonella spp.</i>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab de cloaca em frasco estéril. Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Fezes em frasco estéril. Fragmento de órgão (pulmão, pele, sacos aéreos, baço e fígado) em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.	
1070	<b>PAINEL DOENÇAS DE PENAS - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Poliomavírus aviário, Circovírus aviário.</i>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Penas ou fezes em frasco estéril. Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1073	<b>PAINEL DIARREIA AVIARIA - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Chlamydophila psittaci, Mycoplasma spp., Salmonella spp. e Megabactéria</i>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.	
1067	<b>PAINEL HEMOSPORÍDEOS AVIÁRIOS - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Plasmodium spp., Haemoproteus spp. e Leucocytozoon spp.</i>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de órgão (fígado ou baço) em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.	
1071	<b>PAINEL REPRODUÇÃO AVIÁRIO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Chlamydophila psittaci, Mycoplasma spp. e Salmonella spp.</i>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes em frasco estéril. Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). 5g fezes.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.	
1072	<b>PAINEL RESPIRATÓRIO AVIÁRIO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Chlamydophila psittaci, Mycoplasma spp. e Aspergillus spp.</i>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab de coana ou orofaríngeo em frasco estéril. Swab de cloaca, fezes, secreções, fragmento de órgão (pulmão, traqueia e/ou saco aéreo) em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1148	<b>PAINEL TOXINFECÇÃO CLOSTRIDIUM PERFRINGENS- REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b> <i>Clostridium perfringens</i> alfa toxina (CPA) e <i>Clostridium perfringens</i> enterotoxina (CPE).	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal (coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (coletor universal estéril).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.	
1068	<b>PAINEL TRIAGEM PSITACÍDEOS BÁSICO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Chlamydophila psittaci</i> , <i>Poliomavírus aviário</i> , <i>Doença do Bico e das Penas (Circovírus aviário)</i>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes em frasco estéril. Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). 5g fezes.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.	
1030	<b>POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), fezes, swab de cloaca, fragmento de órgão (baço, fígado, rim, proventrículo) ou líquidos cavitários em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). No mínimo 0,6 mL de líquido cavitário. 5g fezes. Swab com material orgânico visível.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1069	<b>PAINEL TRIAGEM PSITACÍDEOS COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b> <i>Chlamydophila psittaci, Poliomavírus aviário, Doença do Bico e das Penas (Circovírus aviário), Mycoplasma spp., Salmonella., Megabactéria, Herpesvírus de Pacheco</i> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes em frasco estéril. Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). 5g fezes.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.</p>	1
1046	<b>PLASMODIUM SPP - REAL TIME PCR QUALITATIVO:</b> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) ou fragmento de órgão (fígado, baço) em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves, primatas não humanos, répteis.</p>	1
1047	<b>PLASMODIUM SPP - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) ou fragmento de órgão (fígado, baço) em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves, primatas não humanos, répteis.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1031	<b>POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), fezes, swab de cloaca, fragmento de órgão (baço, fígado, rim, proventrículo) ou líquidos cavitários em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).            No mínimo 0,6 mL de líquido cavitário.            5g fezes.            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Aves</p>	1
875	<b>BORDETELLA BRONCHISEPTICA - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	1
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Swab profundo de faringe (Coletor universal estéril).            Swab conjuntival (Coletor universal estéril).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina, felina, suína, equina, lagomorfos (coelhos) e aves.</p> <p><b>Causa(s) de Rejeição:</b>            Swab em meio de cultura.</p>	
876	<b>BORDETELLA BRONCHISEPTICA - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	1
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Swab profundo de faringe (Coletor universal estéril).            Swab conjuntival (Coletor universal estéril).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina, felina, suína, equina, lagomorfos (coelhos) e aves.</p> <p><b>Causa(s) de Rejeição:</b>            Swab em meio de cultura.</p>	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
901	<b>CRYPTOCOCCUS SPP. (NEOFORMANS/GATTI) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Swab retal, fezes, swab orofaríngeo, líquor (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa).            Síndrome neurológica: líquor (Coletor universal estéril) e/ou sangue total em tubo (tampa roxa).            Síndrome ocular/respiratória: swab conjuntival, swab de faringe, swab nasal ou lavado brônquico (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa).            Síndrome cutânea: swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, aspirado de tecido ou fragmento de pele (Coletor universal estéril).            Micose sistêmica: sangue total em tubo (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.            5g fezes.            No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo.            No mínimo 0,6 mL de lavado</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Aves e mamíferos.</p>	1

900	<b>CRYPTOCOCCUS SPP. (NEOFORMANS/GATTII) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Swab retal, fezes, swab orofaríngeo, líquor (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa).            Síndrome neurológica: líquor (Coletor universal estéril) e/ou sangue total em tubo (tampa roxa).            Síndrome ocular/respiratória: swab conjuntival, swab de faringe, swab nasal ou lavado brônquico (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa).            Síndrome cutânea: swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, aspirado de tecido ou fragmento de pele (Coletor universal estéril).            Micose sistêmica: sangue total em tubo (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Swab com material orgânico visível.            5g fezes.            No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo.            No mínimo 0,6 mL de lavado</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Aves e mamíferos.</p>	1

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
898	<b>CRYPTOSPORIDIUM SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.	
922	<b>CRYPTOSPORIDIUM SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.	
1042	<b>HERPESVIRUS DE PACHECO (HERPESVIRUS DOS PSITACIDEOS, PSHV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Assintomáticos e portadores: Fezes ou swab de cloaca em frasco estéril. Sintomáticos: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa/rosa), fezes, swab de cloaca, swab orofaríngeo, fragmento de órgão (fígado, rim, baço, intestino, paratireoide, ovário, medula óssea) em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.	
1142	<b>SALMONELLA ENTERITIDIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Assintomáticos e portadores: Fezes ou swab de cloaca em frasco estéril. Sintomáticos: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), fezes, swab de cloaca, swab orofaríngeo, fragmento de órgão (fígado, rim, baço, intestino, paratireoide, ovário, medula óssea) em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1016	<b>SALMONELLA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes, swab ou fragmento (fígado, baço, coração, vesícula biliar, aparelho reprodutor, cecos) em frasco estéril. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 5g fezes. Swab com material orgânico visível. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves, mamíferos e répteis.	1
1017	<b>SALMONELLA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes, swab ou fragmento (fígado, baço, coração, vesícula biliar, aparelho reprodutor, cecos) em frasco estéril. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 5g fezes. Swab com material orgânico visível. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves, mamíferos e répteis.	1



---

**CITOLOGIA**

---

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
240	<b>CITOLOGIA AURICULAR</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Lâmina com esfregaço de ouvido por rolagem enviada em porta lâminas ou swab de ouvido em meio stuart.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1 lâmina ou 1 swab por ouvido.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies (exceto mamíferos aquáticos, répteis, anfíbios, aves e peixes).	
1261	<b>CITOLOGIA DE LINFONODO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Lâminas de punção de linfonodo fixadas ao ar e acondicionadas em porta lâminas ou embalagens rígidas.	
	Para quadros de linfadenomegalia e/ou suspeita de linfoma, enviar aspirado de até três linfonodos acometidos em lâmina para análise citológica, identificando os linfonodos aspirados nas lâminas.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Enviar em média 2-3 lâminas de cada linfonodo, até 3 linfonodos.	2
	<b>Forma(s) de envio:</b> Porta lâminas em temperatura ambiente.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
1170	<b>CITOLOGIA FECAL</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Lâminas com esfregaço de fezes no porta lâminas (preferencialmente) ou fezes frescas em frasco estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Lâminas com esfregaço de fezes ou 20g de fezes.	2
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado (fezes) e temperatura ambiente (Lâminas)	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
352	<b>CITOLOGIA VAGINAL (AVALIAÇÃO DO CICLO ESTRAL)</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Lâminas de esfregaço vaginal dentro do porta-lâminas.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 2-3 Lâminas.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	2
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
87	<b>CITOLOGIAS (1 LOCAL)</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Lâminas com esfregaço, imprint ou punção aspirativa por agulha fina (PAAF) do local lesionado (preferencialmente) ou líquidos em frasco/tubo estéril, sem conservantes ou anticoagulantes.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 2-3 Lâminas.	2
	<b>Forma(s) de envio:</b> Líquidos sob refrigeração. Lâminas em temperatura ambiente.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1386	<b>CITOLOGIAS (2 LOCAIS)</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Lâminas com esfregaço, imprint ou punção por agulha fina (PAF) do local lesionado (preferencialmente) ou líquidos em frasco/tubo estéril, sem conservantes ou anticoagulantes.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Lâminas com esfregaço, imprint ou punção por agulha fina (PAF) de cada local devidamente identificadas.	2
	<b>Forma(s) de envio:</b> Líquidos sob refrigeração. Lâminas em temperatura ambiente.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
1387	<b>CITOLOGIAS (3 LOCAIS)</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Lâminas com esfregaço, imprint ou punção por agulha fina (PAF) do local lesionado (preferencialmente) ou líquidos em frasco/tubo estéril, sem conservantes ou anticoagulantes.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Lâminas com esfregaço, imprint ou punção por agulha fina (PAF) de cada local devidamente identificadas.	2
	<b>Forma(s) de envio:</b> Líquidos sob refrigeração. Lâminas em temperatura ambiente.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
1388	<b>CITOLOGIAS (4 LOCAIS)</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Lâminas com esfregaço, imprint ou punção por agulha fina (PAF) do local lesionado (preferencialmente) ou líquidos em frasco/tubo estéril, sem conservantes ou anticoagulantes.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Lâminas com esfregaço, imprint ou punção por agulha fina (PAF) de cada local devidamente identificadas.	2
	<b>Forma(s) de envio:</b> Líquidos sob refrigeração. Lâminas em temperatura ambiente.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
1389	<b>CITOLOGIAS (5 LOCAIS)</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Lâminas com esfregaço, imprint ou punção por agulha fina (PAF) do local lesionado (preferencialmente) ou líquidos em frasco/tubo estéril, sem conservantes ou anticoagulantes.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Lâminas com esfregaço, imprint ou punção por agulha fina (PAF) de cada local devidamente identificadas.	2
	<b>Forma(s) de envio:</b> Líquidos sob refrigeração. Lâminas em temperatura ambiente.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
56	<b>GRAM - MICROSCOPIA DIRETA (OU GRAM DE GOTAS)</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Secreções, líquidos, lavados, urina ou fezes em coletor universal estéril ou secreção em swab fixada ao ar ou material enviado em lâmina acondicionada em porta lâminas.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1 lâmina ou 1 swab ou 2g de fezes ou 2,0 mL de urina ou líquidos ou lavados.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Lâmina em porta lâminas em temperatura ambiente. Amostras in natura ou swabs devem ser enviados sob refrigeração.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
408	<b>LEISHMANIA SP. - PESQUISA DE</b>  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Esfregaço sanguíneo, medula óssea ou punção aspirativa em lâminas. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 3 lâminas. <b>Forma(s) de envio:</b> Porta-lâminas em temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos.	2
132	<b>MIELOGRAMA</b>  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Punção de medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) Lâminas com material de medula óssea (esfregaço ou squash) Resultado de hemograma. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 6 lâminas de esfregaço ou squash com material medular e/ou medula óssea. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, Felina e Equina.	6
409	<b>MYCOPLASMA SPP. - PESQUISA DE</b>  <b>Preparo de Paciente:</b> Jejum não necessário. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Esfregaço sanguíneo em lâminas (preferencialmente), acondicionadas em porta lâminas ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 3 lâminas de esfregaço sanguíneo ou 1mL de sangue total. <b>Forma(s) de envio:</b> Lâminas em temperatura ambiente e/ou sangue refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente felina.	2
358	<b>PESQUISA DE HEMATOZOÁRIOS / INCLUSÕES</b>  <b>Preparo de Paciente:</b> Jejum não necessário. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Esfregaço sanguíneo em lâminas (preferencialmente), acondicionadas em porta lâminas ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 3 lâminas de esfregaço sanguíneo ou 1mL de sangue total. <b>Forma(s) de envio:</b> Lâminas em temperatura ambiente e/ou sangue refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	1
1228	<b>PESQUISA DE HEMOPARASITAS / INCLUSÕES - AVES</b>  <b>Preparo de Paciente:</b> Jejum não necessário. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Esfregaço sanguíneo em lâminas acondicionadas em porta lâminas (preferencialmente) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) ou sangue total em tubo com heparina (tampa verde). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 3 lâminas de esfregaço sanguíneo e/ou 0,5 mL de sangue total em tubo de EDTA ou heparina. <b>Forma(s) de envio:</b> Lâminas em temperatura ambiente e sangue total refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente aves.	1
451	<b>PESQUISA DE SPOROTHRIX SCHENCKII</b>  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab seco ou em meio stuart ou lâmina com esfregaço enviada em porta lâminas. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1 swab ou 01 lâmina. <b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e Felina.	1



---

**ANATOMIA  
PATHOLOGICA**

---

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1281	<b>CELLBLOCK</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lâminas de Citologia controle (confeccionar as lâminas antes da adição do formol)</li> <li>- Amostra de efusão no formol na proporção de 1:1 (1 parte de efusão para 1 parte de formol 10%)</li> <li>- Efusões hemorrágicas devem ser coletadas com EDTA para evitar formação de coágulo, e depois fixadas com formol na proporção de 1:1</li> </ul> <p>Temperatura ambiente.</p> <p><b>Aplicação:</b></p> <p>Exames de cell block seguem processamento histológico convencional e tem como objetivo principal investigação imunoistoquímica posterior. A citologia convencional pode trazer informações de igual relevância com menor prazo, sendo a correlação clínica-citológica elucidativa na maioria das vezes.</p> <p><b>Observação:</b></p> <p>As amostras ficam viáveis por até 3 dias e não necessita de refrigeração</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b></p> <p>Todas espécies</p>	10
1083	<b>DERMATOHISTOPATOLÓGICO</b>	8
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b></p> <p>Fragmentos de biópsia de pele fixados em formol apresentando quadros de dermatopatias não nodulares (lesões planas). Exemplos: dermatopatias seborreicas, alopecias, lesões pustulares, pápulo crostosas, despigmentantes, cicatriciais.</p> <p>As informações clínicas pertinentes e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou Whatsapp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b></p> <p>Enviar 3 a 5 fragmentos representativos da lesão, coletados preferencialmente por punch. As superfícies de corte devem compreender, sempre que possível, uma parte da lesão e outra do tecido normal adjacente.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b></p> <p>Amostras fixadas em formol 10% tamponado, temperatura ambiente</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b></p> <p>Canina e felina.</p>	
1355	<b>HISTOPATOLOGICO - AMPUTAÇÕES E TECIDOS ÓSSEOS</b>	10
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b></p> <p>Produtos de amputação de membros, falangectomia, mandibulectomia, maxilectomia.</p> <p>As superfícies de corte devem compreender, sempre que possível, uma parte da lesão e outra do tecido normal adjacente, evitando-se o centro e as bordas da lesão.</p> <p>As informações clínicas pertinentes e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou Whatsapp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b></p> <p>O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra) ou, ainda ser enviado na forma de bloco de parafina com o tecido desejado. Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas.</p> <p>Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos.</p> <p>Temperatura ambiente.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b></p> <p>Todas as espécies.</p>	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1354	<b>HISTOPATOLÓGICO - BAÇO INTEIRO</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Baço inteiro. Se muito grande, faça cortes transversais na peça para melhor fixação. As informações clínicas pertinentes e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou Whatsapp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra) ou, ainda ser enviado na forma de bloco de parafina com o tecido desejado. Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas. Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos. Temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies domésticas.	10
1372	<b>HISTOPATOLÓGICO - ATÉ 3 FRAGMENTOS DE NECROPSIA</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Amostras de até 3 tecidos/órgãos coletadas por meio de necroscopia. As informações clínicas pertinentes, relatório necroscópico e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou Whatsapp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Amostras fixadas em formol 10% tamponado, com identificação das margens cirúrgicas. O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra). Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas. Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos. Blocos parafinados identificados também podem ser aceitos. Temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies domésticas.	16
1270	<b>HISTOPATOLÓGICO ANIMAL SILVESTRE</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fragmento de tecido retirado por biópsia incisional ou excisional. As informações clínicas pertinentes e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou Whatsapp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra) ou, ainda ser enviado na forma de bloco de parafina com o tecido desejado. Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas. Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos. Blocos parafinados identificados também podem ser aceitos. Temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Animais exóticos, silvestres, não convencionais.	10

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
644	<b>HISTOPATOLÓGICO COM MARGEM CIRÚRGICA - 1 LOCAL</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Uma amostra de tecido que deve compreender a lesão e tecido normal adjacente. É necessário: identificar a localização anatômica da lesão, descrição e identificação das margens cirúrgicas pelo MV solicitante sinalizando margem cranial, caudal, rostral, etc por pintura das margens ou pontos cirúrgicos, por exemplo. As informações clínicas pertinentes e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou Whataspp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Amostras fixadas em formol 10% tamponado, com identificação das margens cirúrgicas. O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra). Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas. Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos. Blocos parafinados identificados também podem ser aceitos. Temperatura ambiente.	8
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
1356	<b>HISTOPATOLOGICO COM MARGEM CIRURGICA - 2 LOCAIS</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Duas amostras de tecidos. Cada fragmento deve compreender a lesão e tecido normal adjacente. É necessário: identificar a localização anatômica da lesão, descrição e identificação das margens cirúrgicas pelo MV solicitante sinalizando margem cranial, caudal, rostral, etc por pintura das margens ou pontos cirúrgicos, por exemplo. As informações clínicas pertinentes e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou Whataspp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Amostras fixadas em formol 10% tamponado, com identificação das margens cirúrgicas. O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra). Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas. Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos. Blocos parafinados identificados também podem ser aceitos. Temperatura ambiente.	8
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
1357	<b>HISTOPATOLÓGICO COM MARGEM CIRÚRGICA - 3 LOCAIS</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Três amostras de tecidos. Cada fragmento deve compreender a lesão e tecido normal adjacente. É necessário: identificar a localização anatômica da lesão, descrição e identificação das margens cirúrgicas pelo MV solicitante sinalizando margem cranial, caudal, rostral, etc por pintura das margens ou pontos cirúrgicos, por exemplo. As informações clínicas pertinentes e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou Whataspp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Amostras fixadas em formol 10% tamponado, com identificação das margens cirúrgicas. O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra). Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas. Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos. Blocos parafinados identificados também podem ser aceitos. Temperatura ambiente.	8
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
--------	-------	------------

**1358 HISTOPATOLÓGICO COM MARGEM CIRÚRGICA - 4 LOCAIS****Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Quatro amostras de tecidos. Cada fragmento deve compreender a lesão e tecido normal adjacente. É necessário: identificar a localização anatômica da lesão, descrição e identificação das margens cirúrgicas pelo MV solicitante sinalizando margem cranial, caudal, rostral, etc por pintura das margens ou pontos cirúrgicos, por exemplo.

As informações clínicas pertinentes e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou Whataspp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online.

**Forma(s) de envio:**

Amostras fixadas em formol 10% tamponado, com identificação das margens cirúrgicas. O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra). Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas.

8

Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos.

Blocos parafinados identificados também podem ser aceitos.

Temperatura ambiente.

**Espécie(s) atendida(s):**

Todas as espécies.

**1359 HISTOPATOLOGICO COM MARGEM CIRURGICA - 5 LOCAIS****Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Cinco amostras de tecidos. Cada fragmento deve compreender a lesão e tecido normal adjacente. É necessário: identificar a localização anatômica da lesão, descrição e identificação das margens cirúrgicas pelo MV solicitante sinalizando margem cranial, caudal, rostral, etc por pintura das margens ou pontos cirúrgicos, por exemplo.

As informações clínicas pertinentes e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou Whataspp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online.

8

**Forma(s) de envio:**

Amostras fixadas em formol 10% tamponado, com identificação das margens cirúrgicas. O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra). Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas.

Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos.

Blocos parafinados identificados também podem ser aceitos.

Temperatura ambiente.

**Espécie(s) atendida(s):**

Todas as espécies.

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1271	<b>HISTOPATOLÓGICO DE ATÉ 7 FRAGMENTOS DE NECROPSIA</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Amostras de até 7 tecidos/órgãos coletadas por meio de necroscopia.            As informações clínicas pertinentes, relatório necroscópico e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou WhatsApp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Amostras fixadas em formol 10% tamponado, com identificação das margens cirúrgicas.            O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra). Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas.            Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos.            Blocos parafinados identificados também podem ser aceitos.            Temperatura ambiente.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Todas as espécies.</p>	16
314	<b>HISTOPATOLÓGICO DE BIÓPSIA TECSA I (ENDOSCOPIA-COLONOSCOPIA-RINOSCOPIA ATE 3 LOCAIS)</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Fragmentos de biópsia incisional coletados de até 3 locais por endoscopia, colonoscopia, rinoscopia, cistoscopia. As amostras devem ser identificadas com o local de coleta. Exemplo: Estômago (já inclui pesquisa de Helicobacter spp.), duodeno, jejuno, íleo, cólon, ou narina direita e esquerda.            As informações clínicas pertinentes são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Diversos fragmentos de até 3 locais.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Amostras fixadas em formol 10% tamponado</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Todas as espécies.</p> <p><b>Método:</b>            Microscopia, coloração de Hematoxilina-Eosina, coloração especial (quando aplicável)</p>	8
1241	<b>HISTOPATOLÓGICO DE BIÓPSIA TECSA II - ENDOSCOPIA-COLONOSCOPIA RINOSCOPIA (MAIS DE 3 LOCAIS)</b>	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Fragmentos de biópsia incisional coletados de 3 a 6 locais por endoscopia, colonoscopia, rinoscopia, cistoscopia. As amostras devem ser identificadas com o local de coleta. Exemplo: Estômago (já inclui pesquisa de Helicobacter spp.), duodeno, jejuno, íleo, cólon, ou narina direita e esquerda.            As informações clínicas pertinentes são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Diversos fragmentos de até 6 locais.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Amostras fixadas em formol 10% tamponado</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Todas as espécies.</p>	8

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1360	<b>HISTOPATOLÓGICO DE CADEIA MAMÁRIA - 3 MAMAS OU CADEIA MAMÁRIA UNILATERAL</b>  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Produto de mastectomia unilateral ou 3 mamas bilaterais na mesma peça cirúrgica. Em peças com nódulos muito grandes, faça cortes transversais na peça para melhor fixação. Inclui avaliação de margens e linfonodos satélites presentes na peça. Adicione um código 86 para linfonodos adicionais, que sejam enviados separados da peça. As informações clínicas pertinentes e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou Whataspp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online. <b>Forma(s) de envio:</b> Amostras fixadas em formol 10% tamponado, com identificação das margens cirúrgicas. O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra). Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas. Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos. Blocos parafinados identificados também podem ser aceitos. Temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	8
1361	<b>HISTOPATOLÓGICO DE CADEIA MAMÁRIA BILATERAL</b>  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Produto de mastectomia bilateral ou mais de 4 mamas na mesma peça cirúrgica. Em peças com nódulos muito grandes, faça cortes transversais na peça para melhor fixação. Inclui avaliação de margens e linfonodos satélites presentes na peça. Adicione um código 86 para linfonodos adicionais, que sejam enviados separados da peça. As informações clínicas pertinentes e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou Whataspp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online. <b>Forma(s) de envio:</b> Amostras fixadas em formol 10% tamponado, com identificação das margens cirúrgicas. O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra). Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas. Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos. Blocos parafinados identificados também podem ser aceitos. Temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	10

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1240	<b>HISTOPATOLÓGICO DE PEÇA CIRÚRGICA</b>  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Produtos de enucleação, lobectomia hepática ou pulmonar, orquiectomias, OSH, nefrectomia, colecistectomia, enterectomia. As superfícies de corte devem compreender, sempre que possível, uma parte da lesão e outra do tecido normal adjacente, evitando-se o centro e as bordas da lesão. As informações clínicas pertinentes e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou WhatsApp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online. <b>Forma(s) de envio:</b> Amostras fixadas em formol 10% tamponado. O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra). Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas. Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos. Blocos parafinados identificados também podem ser aceitos. Temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	8
1362	<b>HISTOPATOLÓGICO DE SEGMENTO MAMÁRIO - 2 MAMAS</b>  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Segmento mamário com 2 mamas (unilateral ou bilateral). As superfícies de corte devem compreender, sempre que possível, uma parte da lesão e outra do tecido normal adjacente, evitando-se o centro e as bordas da lesão. Inclui avaliação de margens e linfonodos satélites presentes na peça. Adicione um código 86 para linfonodos adicionais, que sejam enviados separados da peça. As informações clínicas pertinentes e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou WhatsApp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online. <b>Forma(s) de envio:</b> Amostras fixadas em formol 10% tamponado, com identificação das margens cirúrgicas. O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra). Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas. Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos. Blocos parafinados identificados também podem ser aceitos. Temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	8

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
86	<b>HISTOPATOLÓGICO MASSA/NÓDULO SEM AVALIAÇÃO DE MARGEM - 1 LOCAL</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Um fragmento de tecido retirado por biópsia incisional ou excisional, com um nódulo (incluindo 1 mama); fragmento de baço, fígado, pulmão; linfonodo inteiro; biópsias ósseas ou de medula óssea. Sempre que possível, deve compreender a lesão e tecido normal adjacente. É necessário: identificar a localização anatômica da lesão e coleta. As informações clínicas pertinentes e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou Whataspp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Amostras fixadas em formol 10% tamponado. O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra). Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas. Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos. Blocos parafinados identificados também podem ser aceitos. Temperatura ambiente.	8
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
1363	<b>HISTOPATOLOGICO MASSA/NODULO SEM AVALIAÇÃO DE MARGEM - 2 LOCAIS</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Dois fragmentos de tecidos retirados por biópsia incisional ou excisional do mesmo paciente. Amostras podem ser: nódulo cutâneo; fragmento de baço, fígado, pulmão; linfonodo inteiro; biópsias ósseas ou de medula óssea. Sempre que possível, deve compreender a lesão e tecido normal adjacente. É necessário: identificar a localização anatômica da lesão e coleta. As informações clínicas pertinentes e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou Whataspp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Amostras fixadas em formol 10% tamponado. O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra). Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas. Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos. Blocos parafinados identificados também podem ser aceitos. Temperatura ambiente.	8
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
1364	<b>HISTOPATOLÓGICO MASSA/NÓDULO SEM AVALIAÇÃO DE MARGEM - 3 LOCAIS</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Três fragmentos de tecidos retirados por biópsia incisional ou excisional do mesmo paciente. Amostras podem ser: nódulo cutâneo; fragmento de baço, fígado, pulmão; linfonodo inteiro; biópsias ósseas ou de medula óssea. Sempre que possível, deve compreender a lesão e tecido normal adjacente. É necessário: identificar a localização anatômica da lesão e coleta. As informações clínicas pertinentes e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou Whataspp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Amostras fixadas em formol 10% tamponado. O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra). Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas. Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos. Blocos parafinados identificados também podem ser aceitos. Temperatura ambiente.	8
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1365	<b>HISTOPATOLÓGICO MASSA/NÓDULO SEM AVALIAÇÃO DE MARGEM - 4 LOCAIS</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Quatro fragmentos de tecidos retirados por biópsia incisional ou excisional do mesmo paciente. Amostras podem ser: nódulo cutâneo; fragmento de baço, fígado, pulmão; linfonodo inteiro; biópsias ósseas ou de medula óssea. Sempre que possível, deve compreender a lesão e tecido normal adjacente. É necessário: identificar a localização anatômica da lesão e coleta. As informações clínicas pertinentes e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou Whatsapp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Amostras fixadas em formol 10% tamponado. O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra). Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas. Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos. Blocos parafinados identificados também podem ser aceitos. Temperatura ambiente.	8
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
1366	<b>HISTOPATOLÓGICO MASSA/NÓDULO SEM AVALIAÇÃO DE MARGEM - 5 LOCAIS</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Cinco fragmentos de tecidos retirados por biópsia incisional ou excisional do mesmo paciente. Amostras podem ser: nódulo cutâneo; fragmento de baço, fígado, pulmão; linfonodo inteiro; biópsias ósseas ou de medula óssea. Sempre que possível, deve compreender a lesão e tecido normal adjacente. É necessário: identificar a localização anatômica da lesão e coleta. As informações clínicas pertinentes e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou Whatsapp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Amostras fixadas em formol 10% tamponado. O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra). Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas. Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos. Blocos parafinados identificados também podem ser aceitos. Temperatura ambiente.	8
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
1248	<b>IMUNOISTOQUÍMICA- PAINEL PROGNÓSTICO MASTOCITOMA</b>	
	Consulte os marcadores do painel em nosso site, na área do cliente	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina previamente selecionado do fragmento de tecido a ser analisado e respectiva lâmina HE, laudo histopatológico do caso, histórico clínico, localização e evolução da lesão. Visa identificar fatores prognósticos e preditivos específicos para a neoplasia, de acordo com informações comprovadas em literatura.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	16
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1349	<b>IMUNOISTOQUÍMICA - 1 MARCADOR</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina previamente selecionado do fragmento de tecido a ser analisado e respectiva lâmina HE, laudo histopatológico do caso, histórico clínico, localização e evolução da lesão. <b>Indicação:</b> Determinar o marcador a ser utilizado na requisição (ex: C-Kit, CD3, CD20, Ki-67, entre outros; consulte a disponibilidade). <b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	16
1237	<b>IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL ADRENAL</b> <i>Consulte os marcadores do painel em nosso site, na área do cliente</i>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina previamente selecionado do fragmento de tecido a ser analisado e respectiva lâmina HE, laudo histopatológico do caso, histórico clínico, localização e evolução da lesão. <b>Indicação:</b> Visa identificar a histogênese e fatores prognósticos para os casos de tumores adrenais, de acordo com informações comprovadas em literatura. <b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Caninos e felinos	16
1368	<b>IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL DIAGNÓSTICO DE 7 A 9 MARCADORES</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina previamente selecionado do fragmento de tecido a ser analisado e respectiva lâmina HE, laudo histopatológico do caso, histórico clínico e evolução da lesão. O exame visa identificar a histogênese de neoplasias morfológicamente pouco diferenciadas. Nesse painel, nossa equipe de patologistas seleciona marcadores de acordo com o direcionamento clínico e morfológico. <b>Indicação:</b> Eventualmente, se esse número de marcadores não for suficiente para concluir a histogênese, outros marcadores podem ser sugeridos para serem adicionados à investigação (um código 1349 por marcador adicional). <b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	16
648	<b>IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL DIAGNÓSTICO ATÉ 6 MARCADORES</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina previamente selecionado do fragmento de tecido a ser analisado e respectiva lâmina HE, laudo histopatológico do caso, histórico clínico e evolução da lesão. O exame visa identificar a histogênese de neoplasias morfológicamente pouco diferenciadas. Nesse painel, nossa equipe de patologistas seleciona marcadores de acordo com o direcionamento clínico e morfológico. <b>Indicação:</b> Eventualmente, se esse número de marcadores não for suficiente para concluir a histogênese, outros marcadores podem ser sugeridos para serem adicionados à investigação (um código 1349 por marcador adicional). <b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	16

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1371	<b>IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL DIAGNÓSTICO DE 10 A 14 MARCADORES</b>  <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina previamente selecionado do fragmento de tecido a ser analisado e respectiva lâmina HE, laudo histopatológico do caso, histórico clínico e evolução da lesão. O exame visa identificar a histogênese de neoplasias morfológicamente pouco diferenciadas. Nesse painel, nossa equipe de patologistas seleciona marcadores de acordo com o direcionamento clínico e morfológico. Eventualmente, se esse número de marcadores não for suficiente para concluir a histogênese, outros marcadores podem ser sugeridos para serem adicionados à investigação (um código 1349 por marcador adicional). <b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	16
1367	<b>IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL LINFOMA</b>  Consulte os marcadores do painel em nosso site, na área do cliente <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina previamente selecionado do fragmento de tecido a ser analisado e respectiva lâmina HE, laudo histopatológico do caso, histórico clínico, localização e evolução da lesão. <b>Indicação:</b> Visa identificar a histogênese e fatores prognósticos para os casos de linfoma, de acordo com informações comprovadas em literatura. <b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Caninos e felinos	16
1279	<b>IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL PREDITIVO KINASES</b>  Consulte os marcadores do painel em nosso site, na área do cliente <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina previamente selecionado do fragmento de tecido a ser analisado e respectiva lâmina HE, laudo histopatológico do caso, histórico clínico, localização e evolução da lesão. <b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	16
1250	<b>IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL PROGNÓSTICO CARCINOMAS</b>  Consulte os marcadores do painel em nosso site, na área do cliente <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina previamente selecionado do fragmento de tecido a ser analisado e respectiva lâmina HE, laudo histopatológico do caso, histórico clínico, localização e evolução da lesão. <b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	16

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1238	<b>IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL PROGNÓSTICO DE SARCOMA</b> <i>Consulte os marcadores do painel em nosso site, na área do cliente</i>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina previamente selecionado do fragmento de tecido a ser analisado e respectiva lâmina HE, laudo histopatológico do caso, histórico clínico, localização e evolução da lesão. <b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	16
1239	<b>IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL PROGNÓSTICO HEPATOCARCINOMA</b> <i>Consulte os marcadores do painel em nosso site, na área do cliente</i>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina previamente selecionado do fragmento de tecido a ser analisado e respectiva lâmina HE, laudo histopatológico do caso, histórico clínico, localização e evolução da lesão. <b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	16
659	<b>IMUNOISTOQUÍMICA - PAINEL PROGNÓSTICO LESÕES MELANOCÍTICAS/MELANOMAS</b> <i>Consulte os marcadores do painel em nosso site, na área do cliente</i>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina previamente selecionado do fragmento de tecido a ser analisado e respectiva lâmina HE, laudo histopatológico do caso, histórico clínico, localização e evolução da lesão. <b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	16
456	<b>IMUNOISTOQUÍMICA - PESQUISA DE LEISHMANIA</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina previamente selecionado do fragmento de tecido a ser analisado e respectiva lâmina HE, laudo histopatológico do caso, histórico clínico, localização e evolução da lesão ou fragmento de tecido ou pele fixado em formol 10% . <b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	16
1236	<b>IMUNOISTOQUÍMICA - QUIMIORRESISTÊNCIA DE TUMORES</b> <i>Consulte os marcadores do painel em nosso site, na área do cliente</i>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina previamente selecionado do fragmento de tecido a ser analisado e respectiva lâmina HE, laudo histopatológico do caso, histórico clínico, localização e evolução da lesão. <b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	16
653	<b>IMUNOISTOQUÍMICA - TOXOPLASMA GONDII</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina previamente selecionado do fragmento de tecido a ser analisado e respectiva lâmina HE, laudo histopatológico do caso, histórico clínico, localização e evolução da lesão ou fragmento de pele fixado em formol 10% . <b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	16

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
838	<b>IMUNOISTOQUÍMICA PAINEL PROGNÓSTICO TUMOR MAMÁRIO</b> <i>Consulte os marcadores do painel em nosso site, na área do cliente</i>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina previamente selecionado do fragmento de tecido a ser analisado e respectiva lâmina HE, laudo histopatológico do caso, histórico clínico, localização e evolução da lesão.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	16
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	
1252	<b>INCLUSÃO DE MARGEM CIRÚRGICA</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Disponível para análises histopatológicas realizadas no TECSA. Para solicitação, encaminhe um email para <a href="mailto:sac@tecsa.com.br">sac@tecsa.com.br</a> juntamente do laudo histopatológico.	8
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
1194	<b>PAINEL PCR C-KIT +IMUNOISTOQUÍMICA PARA MASTOCITOMA</b> <i>Imunoistoquímica prognóstico mastocitoma e PCR para oncogene C-kit em mastocitoma.</i>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> 1 Bloco de parafina e respectiva lâmina HE representante da lesão para análise imunoistoquímica, laudo histopatológico e histórico clínico com evolução da lesão. Avaliação prognóstica e preditiva para mastocitoma.	
	Combina os achados proteicos do exame imunoistoquímico com os achados genéticos da investigação de mutações no exon 11 do gene C-Kit.	16
	<b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	
1282	<b>RODANINA, COLORACAO HISTOLOGICA ESPECIAL</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina, lâmina HE correspondente, histórico clínico e laudo histopatológico.	
	<b>Aplicação:</b> Coloração histológica utilizada para pesquisa e avaliação de acúmulo de cobre em amostras provenientes de biópsias hepáticas.	16
	<b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	
1369	<b>TRIAGEM PARA PAINEL DE IMUNOISTOQUÍMICA</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco(s) de parafina selecionado(s) do fragmento de tecido a ser analisado e respectiva(s) lâmina HE, laudo histopatológico do caso, histórico clínico, localização e evolução da lesão. Neste exame de triagem, a partir das lâminas HE enviadas, selecionamos o melhor bloco para realização da imunoistoquímica ou verificamos se o bloco encaminhado corresponde à lesão descrita em laudo histopatológico e indicamos o código de painel imunoistoquímico que mais se encaixaria no caso, antes de seguir com o exame de imunoistoquímica.	
	Eventualmente, no momento da análise imunoistoquímica, outros marcadores podem ser sugeridos, visto que alguns casos podem ter comportamentos imprevisíveis nesta investigação.	16
	<b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	



---

# MICROBIOLOGIA

---

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
354	<b>ÁCAROS - PESQUISA DE</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Pelos, crostas em coletor universal e raspado cutâneo (superficial e profundo) entre lâminas (vedadas com fita adesiva em suas bordas em porta lâminas).	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Tufo de pelos e crostas e/ou 2 lâminas com pelos e pele.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
625	<b>ANTIFUNGIGRAMA</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Amostra de fungo isolado em cultivo positivo prévio no Tecsa. O fungo isolado no laboratório permanece disponível para a realização do teste por 5 dias.	5
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
393	<b>COPROCULTURA COM ANTIBIOTIGRAMA</b>	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento.	
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Fezes em coletor universal estéril ou transferidos para um swab em meio de transporte Cary Blair.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1 swab em meio de transporte Cary Blair ou 5g de fezes frescas.	5
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
54	<b>CULTURA AEROBIOS C/ ANTIBIOTIGRAMA</b>	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento.	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Secreções ou líquidos orgânicos: acondicionados em swab com meio stuart ou tubo de transporte sem aditivos (tampa branca). Fezes: acondicionados em frasco estéril.	
	Fragmentos de tecidos, material cirúrgico (parafusos, pinos, etc): tubo de transporte sem aditivos (tampa branca) contendo solução salina estéril 0,9%, o suficiente para cobrir o material.	5
	<b>Quantidade necessária:</b> 1 swab, 5,0g de fezes ou 3,0 mL de líquido.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
576	<b>CULTURA (AERÓBIOS E ANAERÓBIOS) COM ANTIBIOPRIMA</b>	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento.	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Anaeróbios: Líquidos e secreções obtidos por punção, fragmentos de tecido e material cirúrgico (ex: parafusos, placas) acondicionados em recipientes contendo meio tioglicolato, que possui redutor de oxigênio. Aeróbios: Secreções ou líquidos orgânicos: acondicionados em swab com meio stuart ou tubo de transporte sem aditivos (tampa branca). Fezes: acondicionados em frasco estéril. Fragmentos de tecidos, material cirúrgico (parafusos, pinos, etc): tubo de transporte sem aditivos (tampa branca) contendo solução salina estéril 0,9%, o suficiente para cobrir o material.	5
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1 swab, 5g de fezes ou 5 mL de líquido.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
254	<b>CULTURA ANAERÓBIA</b>	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento.	
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Líquidos e secreções obtidos por punção, fragmentos de tecido e material cirúrgico (ex: parafusos, placas) acondicionados em recipientes contendo meio tioglicolato, que possui redutor de oxigênio.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de líquido/secreção ou 1 fragmento/material cirúrgico em quantidade visível.	5
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
1088	<b>CULTURA AUTOMATIZADA COM ANTIBIOPRIMA - QUANTITATIVO (MIC)</b>	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento.	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Secreções ou líquidos orgânicos: acondicionados em swab com meio stuart ou tubo de transporte sem aditivos (tampa branca). Fezes: acondicionados em frasco estéril. Fragmentos de tecidos, material cirúrgico (parafusos, pinos, etc): tubo de transporte sem aditivos (tampa branca) contendo solução salina estéril 0,9%, o suficiente para cobrir o material.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1 swab, 5,0g de fezes ou 3,0 mL de líquido.	4
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
255	<b>CULTURA DE FUNGOS</b>  <b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antifúngicos respeitando o período de carência de acordo com o fabricante. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Secreções ou líquidos orgânicos: acondicionados em swab com meio stuart ou tubo de transporte sem aditivos (tampa branca). Fezes: acondicionados em frasco estéril. Pele e pelos acondicionados em coletor universal estéril ou envelopes ou tubo de transporte. Fragmentos de tecidos, material cirúrgico (parafusos, pinos, etc): tubo de transporte sem aditivos (tampa branca) contendo solução salina estéril 0,9%, o suficiente para cobrir o material. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1 swab, 5,0g de fezes ou 2,0 mL de líquido. <b>Forma(s) de envio:</b> Pelo e pele: temperatura ambiente. Demais amostras: Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	21
933	<b>CULTURA OFTALMOLÓGICA COM ANTI BIOGRAMA</b>  <b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento. <b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Secreção ocular em swab com meio de transporte ou aspirados em coletor universal estéril ou swab em meio stuart. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1 swab ou 1,0 mL de líquido. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	5
1310	<b>CULTURA DE FUNGOS - IDENTIFICAÇÃO - KIT DERMATÓFITOS TECSA</b>  <b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antifúngicos. <b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Pelos e crostas em kit de dermatófitos TECSA. <b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos.	10

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
58	<b>HEMOCULTURA COM ANTIBIOGRAMA</b>	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento.	
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Sangue total em frasco de hemocultura.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Animais de pequeno porte 2,0 mL e animais de grande porte 5,0 mL.	8
	<b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
942	<b>HEMOCULTURA COM ANTIBIOGRAMA - ACOMPANHAMENTO PARCIAL</b>	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento.	
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Sangue total em frasco de hemocultura.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Animais de pequeno porte 2,0 mL e animais de grande porte 5,0 mL.	7
	<b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
766	<b>OTOCULTURA C/ ANTIBIOGRAMA - CULTURA DE SECREÇÃO AURICULAR</b>	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento.	
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Secreção de conduto auditivo coletada em swab com meio stuart.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1 swab.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	5
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos.	
	<b>Causas de rejeição:</b> Swab seco e esfregaços em lâminas.	
55	<b>PESQUISA DIRETA P/ FUNGOS (MICOLÓGICO DIRETO)</b>	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Raspado cutâneo enviado em lâmina acondicionada em porta lâminas ou pelos em coletor estéril.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1 tufo de pelos ou 01 lâmina.	1
	<b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1089	<b>UROCULTURA COM ANTIPOGRAMA AUTOMATIZADA - QUANTITATIVO (MIC)</b>	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento.	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Urina preferencialmente coletada por cistocentese e enviada em tubo com ácido bórico (preferencialmente) ou em coletor universal estéril ou laminocultivo.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 4,0 mL de urina.	4
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
410	<b>IDENTIFICAÇÃO E ANTIPOGRAMA - UROCULTURA (ENVIADO NO MEIO VETCHECK )</b>	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento.	
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Urina em kit de meio urocultura TECSA.	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	4
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
184	<b>UROCULTURA COM ANTIPOGRAMA</b>	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento.	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Urina preferencialmente coletada por cistocentese e enviada em tubo com ácido bórico (preferencialmente) ou em coletor universal estéril ou laminocultivo.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 4,0 mL.	4
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	
1318	<b>CULTURA AUTOMATIZADA COM ANTIPOGRAMA QUANTITATIVO (MIC) - ADICIONAL (MESMO PACIENTE)</b>	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento.	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Secrões ou líquidos orgânicos: acondicionados em swab com meio stuart ou tubo de transporte sem aditivos (tampa branca). Fezes: acondicionados em frasco estéril. Fragmentos de tecidos, material cirúrgico (parafusos, pinos, etc): tubo de transporte sem aditivos (tampa branca) contendo solução salina estéril 0,9%, o suficiente para cobrir o material.	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1 swab, 5,0g de fezes ou 3,0 mL de líquido.	4
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1301	<b>CULTURA DE AERÓBIOS C/ ANTIBIOPRAGMA ADICIONAL (MESMO PACIENTE)</b>  <b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Secreções ou líquidos orgânicos: acondicionados em swab com meio stuart ou tubo de transporte sem aditivos (tampa branca). Fezes: acondicionados em frasco estéril. Fragmentos de tecidos, material cirúrgico (parafusos, pinos, etc): tubo de transporte sem aditivos (tampa branca) contendo solução salina estéril 0,9%, o suficiente para cobrir o material. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1 swab, 5,0g de fezes ou 3,0 mL de líquido. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	5
1303	<b>CULTURA OFTALMOLÓGICA C/ ANTIBIOPRAGMA ADICIONAL (MESMO PACIENTE)</b>  <b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento. <b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Secreção ocular em swab com meio de transporte ou aspirados em coletor universal estéril ou swab em meio stuart. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1 swab ou 1,0 mL de líquido. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies. <b>Causas de rejeição:</b> Swab seco, lâminas com esfregações e volume insuficiente.	5
287	<b>ISOLAMENTO DE SALMONELLA SPP</b>  <b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Órgãos e fezes em recipiente estéril ou swab em meio stuart. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 5g de fezes, 1 swab ou 12g de órgãos. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.	5

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS
1302	OTOCULTURA C/ ANTIPOGRAMA ADICIONAL (MESMO PACIENTE)	

**Preparo de Paciente:**  
Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento.

**Amostra e recipiente de acondicionamento:**  
Secreção de conduto auditivo coletada em swab com meio stuart.

**Quantidade(s) necessária(s):**  
1 swab.

**Forma(s) de envio:**  
Refrigerado.

**Espécie(s) atendida(s):**  
Mamíferos.

**Causas de rejeição:**  
Swab seco e esfregaços em lâminas.

## 60 PESQUISA DE ECTOPARASITAS

<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>	
Raspado de pele (superficial ou profundo) e pelos enviados em lâminas vedadas em suas extremidades, acondicionadas em porta lâminas.	
<b>Quantidade(s) necessária(s):</b>	
1 tufo de pelos ou crostas ou 1 lâmina.	2
<b>Forma(s) de envio:</b>	
Temperatura ambiente.	
<b>Espécie(s) atendida(s):</b>	
Todas as espécies.	



---

# IMUNOLOGIA

---

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
253	<b>ANTICORPO ANTINUCLEAR (ANA)</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	4	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.		
327	<b>BABESIA - IGG - METODO ELISA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro ou plasma em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
632	<b>BABESIA - IGM - METODO ELISA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro ou plasma em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
224	<b>BORDETELLA BRONCHISEPTICA(TOSSE DOS CANIS) - SOROLOGIA RIFI</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	5	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
76	<b>BRUCELOSE CANINA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	4	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
227	<b>BRUCELOSE EQUINA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo, com gel separador (tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	4	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Equina.		
1108	<b>CHECKUP VACINAL PARA RAIWA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/ amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro.	7	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerada.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos.		
	<b>Causa(s) de Rejeição:</b> Volume insuficiente, hemólise moderada a intensa, intensa lipemia.		
537	<b>CINOMOSE - PESQUISA DO ANTÍGENO VIRAL</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA(tampa roxa), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou soro em tubo de transporte (tampa branca).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total, swab com material visível, 1,0 mL de urina ou 0,6 mL de líquor.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
239	<b>CINOMOSE + PARVOVIROSE - IGM</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma ou 1,5 mL de sangue total em tubo com EDTA.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
670	CINOMOSE IGG + PARVOVIROSE IGG + HEPATITE INFECCIOSA CANINA IGG		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro e 1,0 mL de sangue total em tubo com EDTA.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
857	COMBO 4 EM 1 - EHRLICHIA - LEISHMANIA - DIROFILARIA - ANAPLASMA		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro ou plasma em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma ou 2,0 mL de sangue total em EDTA.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
361	CORONAVIRUS FELINO - DOT ELISA (PERITONITE INFECCIOSA FELINA - PIF)		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma ou 1,5 mL de sangue total em tubo com EDTA.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.		
357	DIROFILARIOSE		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma ou 1,5 mL de sangue total em tubo com EDTA.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
84	DIROFILARIOSE + DOENÇA LYME + EHRLICHIA + ANAPLASMA		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma ou 1,5 mL de sangue total em tubo com EDTA.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS	VALORES
256	<b>DOENÇA DE LYME</b>			
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.			
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma ou 1,5 mL de sangue total em tubo com EDTA.			
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).			
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.			
667	<b>EHRLICHIA - IGG ELISA</b>			
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.			
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro ou plasma em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	2		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma.			
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).			
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.			
666	<b>EHRLICHIA - IGM ELISA</b>			
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.			
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro ou plasma em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	2		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma.			
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).			
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.			
328	<b>EHRLICHIA CANIS - IGG SEMI-QUANTITATIVO</b>			
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.			
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma ou 1,5 mL de sangue total em tubo com EDTA.			
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).			
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.			
1094	<b>ENCEFALOMIELITE EQUINA - SOROLOGIA</b>			
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.			
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). Líquor em tubo de transporte (tampa branca).	10		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.			
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerada.			
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Equina.			

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1130	ESPOROTRICOSE - SOROLOGIA - TITULAÇÃO		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	5	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerada.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.		
371	FeLV - LEUCEMIA FELINA		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma ou 1,5 mL de sangue total em tubo com EDTA.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.		
274	FIV - IMUNODEFICIÊNCIA FELINA		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma ou 1,5 mL de sangue total em tubo com EDTA.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.		
271	FIV / FELV - LEUCEMIA E IMUNODEFICIENCIA FELINA - IMUNOCROMATOGRAFIA		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma ou 1,5 mL de sangue total em tubo com EDTA.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.		
539	GIARDIA - PESQUISA DE ANTÍGENO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes frescas.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1g de fezes.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina. e felina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
858	<b>EHRLICHIA + ANAPLASMA - MÉTODO: IMUNOCROMATOGRAFIA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro ou plasma em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma ou 2,0 mL de sangue total em EDTA.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
536	<b>HERPESVÍRUS 1 E 2 PRIMATAS</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Necessário jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).	10	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerada.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Primate.		
420	<b>HERPESVÍRUS EQUINO</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela).	7	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Equina.		
1003	<b>INSULINA ENDÓGENA BOVINA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo (Tampa vermelha).	5	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Bovina.		
1000	<b>INSULINA ENDÓGENA CANINA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo (Tampa vermelha).	5	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1002	<b>INSULINA ENDÓGENA EQUINA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo (Tampa vermelha).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	5	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Equina.		
1001	<b>INSULINA ENDÓGENA FELINA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo (Tampa vermelha).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	5	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.		
865	<b>LEISHMANIA INFANTUM - MÉTODO: IMUNOCROMATOGRAFIA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro ou plasma em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma ou 2,0 mL de sangue total em EDTA.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
611	<b>LEISHMANIOSE CANINA DILUIÇÃO TOTAL (INCLUSÃO)</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo, com gel separador (tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
677	<b>LEISHMANIOSE CANINA - MÉTODO: ELISA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo, com gel separador (tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
447	LEISHMANIOSE CANINA - METODO: ELISA + RIFI COM DILUICAO TOTAL (PLENA)	2	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
747	LEISHMANIOSE CANINA - RIFI DILUIÇÃO TOTAL	2	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
83	LEISHMANIOSE CANINA - ELISA + RIFI	1	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
676	LEISHMANIOSE CANINA - RIFI	1	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
553	LEISHMANIOSE FELINA - METODO: ELISA + RIFI COM DILUICAO TOTAL (PLENA)		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro). <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	4	  
290	LEISHMANIOSE FELINA - ELISA + RIFI		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro). <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina	4	  
866	LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA - SOROLOGIA PADRAO LACEN/FUNED OT 001/2016		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro). <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	1	  
978	LEPTOSPIROSE POR MICROAGLUTINAÇÃO - DILUIÇÃO TOTAL		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro). <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos.	5	  
81	LEPTOSPIROSE POR MICROAGLUTINAÇÃO - TRIAGEM		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro). <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos.	2	  

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
302	NEOSPORA CANINUM - MÉTODO IFI		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	5	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.		
300	NEOSPORA EQUINA		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	5	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Equina.		
672	PANLEUCOPENIA FELINA - MÉTODO: IMUNOCROMATOGRAFIA		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes frescas ou swab retal em frasco estéril		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 5g de fezes		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado	1	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.		
538	PARVOVIROSE - PESQUISA DO ANTÍGENO VIRAL		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes frescas em frasco estéril		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1g de fezes		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	1	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
975	PERFIL ALERGENOS AMBIENTAIS E ALIMENTARES - CANINO		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro.	7	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1102	<b>PERFIL ALÉRGENOS AMBIENTAIS E ALIMENTARES - FELINO</b>		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.</p>	7	  
316	<b>PERFIL COMPLEMENTAR PARA LEISHMANIOSE</b> <i>Hemograma, Ureia, Creatinina, ALT, Proteína total e frações e Leishmaniose Canina. RIFI + ELISA</i>		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo, com gel separador (tampa vermelha/amarela), sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro, 1,0 mL de sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.</p>	1	   
668	<b>PERFIL DOENÇA TRANSMITIDA PELO CARRAPATO</b> <i>Ehrlichia IgG, Ehrlichia IgM, Babesia IgM, Babesia IgG</i>		
	<p>Exames incluídos: Babesia IgG, Babesia IgM, Ehrlichia IgG e Ehrlichia IgM</p> <p><b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro ou plasma em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.</p>	2	   
578	<b>RELAXINA CANINA - DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DE GESTAÇÃO CANINA</b>		
	<p><b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador(tampa vermelha/amarela).</p> <p><b>Quantidade necessária:</b> 0,5 mL de soro ou 1,5 mL de sangue total.</p> <p><b>Formas de envio:</b> Refrigerada.</p> <p><b>Espécies atendidas:</b> Canina.</p>	1	  
365	<b>RHODOCOCUS - MÉTODO: IMUNODIFUSÃO</b>		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Necessário jejum de 8 horas.</p> <p><b>Amostras e recipiente para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue total em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).</p> <p><b>Quantidade necessária:</b> 0,5 mL de soro.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Equinos.</p>	6	  

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
359	<b>ROTAVIRUS - METODO: IMUNOCROMATOGRAFIA</b>		
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Fezes frescas (coletor universal), sem conservantes. <b>Quantidade necessária:</b> 1g de fezes. <b>Formas de envio:</b> Refrigerada. <b>Espécies atendidas:</b> Canina, bovina e suína.	3	
1196	<b>ENCEFALOMIELITE PROTOZOÁRIA EQUINA (EPM) - SARCOCYSTIS NEURONA</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro e/ou Líquor em tubo de transporte (tampa branca). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro e/ou 1,0 mL de líquor. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Equina.	10	 
688	<b>TESTE ALERGICO ALERGIA A MALASSEZIA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro). <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	7	  
684	<b>TESTE ALERGICO ALERGIA A PICADA (SALIVA) DE PULGA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro). <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	7	  
686	<b>TESTE ALERGICO PAINEL C/ 24 ALERGENOS AMBIENTAIS</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro). <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, Felina e Equina.	7	  

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
971	<b>TESTE DE REAÇÃO ALIMENTAR CANINO (FOOD REACTION TEST HESKA)</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro.	7	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
1090	<b>TESTE DE REAÇÃO ALIMENTAR FELINO (FOOD REACTION TEST HESKA)</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro.	7	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.		
305	<b>TOXOPLASMOSE + CLAMIDIOSE FELINAS</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro ou plasma em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma ou 1,5 mL de sangue total em tubo com EDTA.	4	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.		
307	<b>TOXOPLASMOSE CANINA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	4	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
309	<b>TOXOPLASMOSE EQUINA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	5	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Equina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
82	<b>TOXOPLASMOSE FELINA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	4	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.		
709	<b>TRYPANOSOMA CRUZI - SOROLOGIA (CANINA)</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	5	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
995	<b>VIAGEM INTERNACIONAL - LEISHMANIOSE - ELISA + RIFI</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		



---

## PARASITOLOGIA

---

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1171	<b>COPROLÓGICO FUNCIONAL</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes frescas em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 5g de fezes.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	2	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.		
62	<b>EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES - AVES E RÉPTEIS</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes acondicionadas em frasco estéril		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 10g de fezes.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	2	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e Répteis.		
1195	<b>COPROPARASITOLÓGICO - PESQUISA DE OVOS PESADOS</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes frescas em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 20g de fezes.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	1	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.		
	<b>Causa(s) de Rejeição:</b> Fezes em meio de conservação.		
135	<b>EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES - MIF - AVES E REPTÉIS</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes colhidas em frascos com meio MIF (mercúrio, iodo e formol) ou TF-Test®		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 10g de fezes.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	2	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e Répteis.		
191	<b>EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES - MIF - PET E MAMÍFEROS</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes colhidas em frascos com meio MIF (mercúrio, iodo e formol) ou TF-Test®.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 10g de fezes.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	1	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, Felina e Equina.		
421	<b>EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES - OPG</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes acondicionadas em frasco estéril		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 10g de fezes.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	1	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Equina e animais de produção.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
387	<b>EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES - PESQUISA DE LARVAS</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes acondicionadas em frasco estéril		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 10g de fezes.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	2	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas.		
63	<b>EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES - PET E MAMÍFEROS</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes acondicionadas em frasco estéril		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 10g de fezes.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	1	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, Felina e Equina.		
1076	<b>PARASITOLÓGICO PARAGIARDIA - MÉTODO FAUST</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes acondicionadas em frasco com MIF, podendo coletar amostras em dias alternados em três frascos distintos, devidamente identificados		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 2,0g de fezes em cada frasco	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, Felina e Equina.		
360	<b>PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes acondicionadas em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 10g de fezes..		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	1	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas.		
	<b>Causa(s) de Rejeição:</b> Volume insuficiente.		
736	<b>TRICOGRAMA (AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA MICROSCÓPICA DE PELOS)</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Pelos secos acondicionados em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 50 pelos.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	3	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, Felina e Equina.		



# HORMÔNIOS

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
218	<b>ACTH - HORMÔNIO ADRENOCORTICOTRÓFICO - CLIA</b> <b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 4 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Plasma em tubo de transporte coletado de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de plasma. <b>Forma(s) de envio:</b> Obrigatoriamente congelada. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	5	
1176	<b>ALDOSTERONA BASAL - RIE</b> <b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar de 6 a 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	8	
1182	<b>ALDOSTERONA BASAL + PÓS-ACTH - RIE</b> <b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar de 6 a 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro em cada tubo (basal e pós-ACTH) <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	8	
807	<b>ANTICORPO ANTI-TIREOGLOBULINA - CLIA</b> <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	6	
630	<b>CORTISOL 2 DOSAGENS - BASAL E PÓS ESTÍMULO COM ACTH - RIE</b> <b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum alimentar entre 6 a 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro em cada tubo (basal e pós). <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	2	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1174	<b>ANTICORPO ANTI-RECEPTOR DE ACETILCOLINA - RIE</b>		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,5 mL de soro</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. Congelar a amostra quando o envio para o laboratório ultrapassar 48 horas da coleta.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina</p>	30	
631	<b>CORTISOL 2 DOSAGENS - BASAL E PÓS ESTÍMULO COM ACTH - CLIA</b>	1	  
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar de 6 a 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro em cada tubo (basal e pós).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>		
620	<b>CORTISOL 2 DOSAGENS - BASAL E PÓS SUPRESSÃO COM DEXAMETASONA - RIE</b>	2	  
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar de 6 a 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro em cada tubo (basal e pós supressão).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>		
156	<b>CORTISOL 3 DOSAGENS - BASAL, 4 E 8 HORAS PÓS SUPRESSÃO COM DEXAMETASONA - CLIA</b>	1	  
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar de 6 a 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro em cada tubo (basal + pós supressão 4 e 8 horas).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>		
621	<b>CORTISOL 3 DOSAGENS - BASAL, 4 E 8 HORAS PÓS SUPRESSÃO COM DEXAMETASONA - RIE</b>	2	  
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar de 6 a 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro em cada tubo (basal + pós supressão 4 e 8 horas).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1328	<b>CORTISOL POS - ACTH - RIE</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar de 6 a 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro .	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
1329	<b>CORTISOL POS - ACTH - CLIA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar de 6 a 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
1334	<b>CORTISOL 2 DOSAGENS - BASAL E POS TRILOSTANO - CLIA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar de 6 a 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro em cada tubo (basal e pós).	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
1336	<b>CORTISOL POS TRILOSTANO - CLIA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar de 6 a 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1337	CORTISOL POS DEXAMETASONA - RIE		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar de 6 a 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
1338	CORTISOL POS DEXAMETASONA - CLIA		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar de 6 a 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
205	CORTISOL 2 DOSAGENS - BASAL E PÓS SUPRESSÃO COM DEXAMETASONA - CLIA		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar de 6 a 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro em cada tubo (basal e pós supressão).	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
619	CORTISOL BASAL - RIE		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar de 6 a 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		


CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
68	<b>CORTISOL BASAL - CLIA</b>		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar de 6 a 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>	1	  
70	<b>ESTRADIOL - CLIA</b>		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>	1	  
705	<b>IGF1 - SOMATOMEDINA C - CLIA</b>		
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Obrigatoriamente congelada.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.</p>	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
765	<b>PROGESTERONA - 17 HIDROXI - BASAL + PÓS ACTH - CLIA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar de 6 a 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro em cada tubo (basal e pós).		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	3	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
855	<b>PROGESTERONA - 17 HIDROXI - BASAL - CLIA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar de 6 a 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
1173	<b>PROTEÍNA RELACIONADA AO PARATORMÔNIO - PTHRP - RIE</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Coletar amostra em tubo com EDTA (tampa roxa) e separar o plasma no máximo 1 hora após a coleta.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de plasma	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.		
66	<b>T3 TOTAL - CLIA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
74	T4 LIVRE - CLIA		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
73	T4 LIVRE - RIE		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro ou plasma em EDTA acondicionado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro ou plasma em EDTA.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
626	T4 LIVRE - PÓS-DIÁLISE - RIE		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro ou plasma em EDTA acondicionado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro ou plasma em EDTA.	3	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
147	T4 TOTAL - RIE		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro ou plasma em EDTA acondicionado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro ou plasma em EDTA.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
164	T4 TOTAL - CLIA		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>	3	  
636	T4 TOTAL PÓS-LEVOTIROXINA - CLIA		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>	1	  
637	T4 TOTAL PÓS-LEVOTIROXINA - RIE		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro ou plasma em EDTA acondicionado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro ou plasma em EDTA.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>	2	 
154	TESTOSTERONA - CLIA		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro acondicionado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>	1	  

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
845	TSH - HORMÔNIO ESTIMULANTE DA TIREOIDE - CLIA	1	
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar de 6 a 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>		
1292	PARATORMÔNIO (PTH) E CÁLCIO IÔNICO - CLIA	30	
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável 8 horas de jejum.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,5 mL de soro.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>		
69	PROGESTERONA - CLIA	1	
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>		

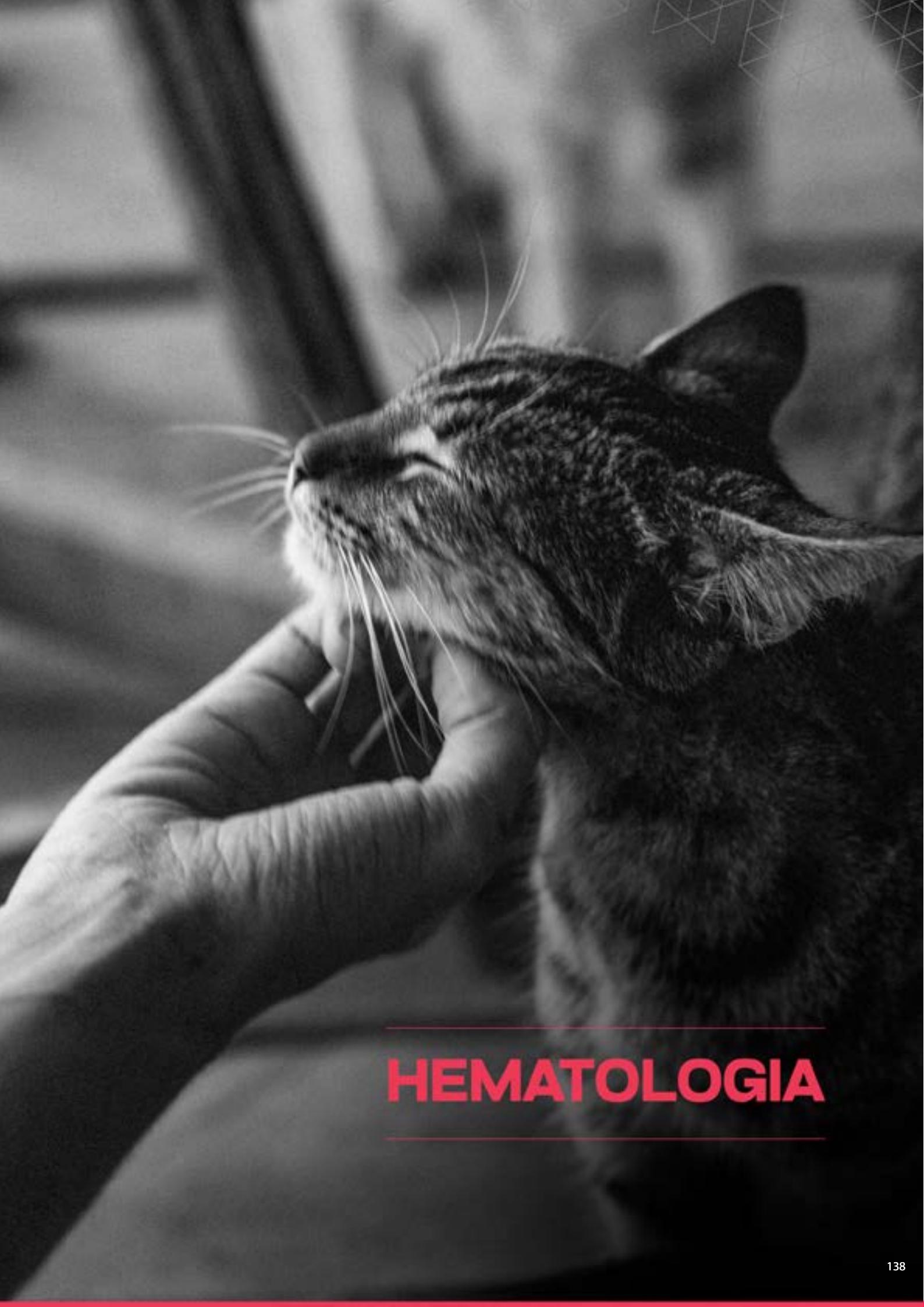

---

# **HEMATOLOGIA**

---

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
814	COOMBS DIRETO (ANEMIA HEMOLÍTICA IMUNOMEDIADA) – CANINO		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente para canina.</p>	1	
267	ERITROGRAMA - AVES E RÉPTEIS		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Aves: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) Répteis: Sangue total em tubo com heparina sódio/lítio (tampa verde).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e Répteis.</p>	2	 
266	ERITROGRAMA - MAMÍFEROS SILVESTRES		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Animais Silvestres. convencionais).</p>	1	
40	ERITROGRAMA - PET		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
372	<b>ERITROGRAMA - EQUINO</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Respeitar a proporção anticoagulante/sangue; atentar-se ao volume indicado pelo tubo utilizado.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Equina.		
42	<b>HEMATÓCRITO</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
39	<b>HEMOGRAMA COMPLETO</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
469	<b>HEMOGRAMA COMPLETO- CAMUNDONGO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	2	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente Camundongos.		
44	<b>HEMOGRAMA COMPLETO - FELINO</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente felina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
442	<b>HEMOGRAMA COMPLETO - GALLUS SP.</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Respeitar a proporção anticoagulante/sangue; atentar-se ao volume indicado pelo tubo utilizado.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Galinhas.		
512	<b>HEMOGRAMA COMPLETO - PAVÃO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Pavão		
457	<b>HEMOGRAMA COMPLETO - RATITAS</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo de heparina (tampa verde).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente Ratitas.		
510	<b>HEMOGRAMA COMPLETO - ARARA CANINDÉ</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Arara canindé.		
434	<b>HEMOGRAMA COMPLETO - ARARAJUBA</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Ararajuba.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
143	<b>HEMOGRAMA COMPLETO - SILVESTRES</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Anfíbios: Sangue total em heparina (tampa verde) Aves: Preferencialmente Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) Mamíferos: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) Peixes: Sangue total em heparina (tampa verde) Répteis: Sangue total em heparina (tampa verde)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Respeitar a proporção anticoagulante/sangue; atentar-se ao volume indicado pelo tubo utilizado.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Animais Silvestres.		
482	<b>HEMOGRAMA COMPLETO - CAPRINO</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	21	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente Caprina.		
146	<b>HEMOGRAMA COMPLETO - EQUINO</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente equina.		
448	<b>HEMOGRAMA COMPLETO - RATOS</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente Ratos.		
541	<b>HEMOGRAMA COMPLETO - TAPIRUS TERRESTRIS (ANTA)</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente Anta.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
511	<b>HEMOGRAMA COMPLETO - TUCANO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	2	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Tucano.		
613	<b>HEMOGRAMA COMPLETO - CEBUS CAPUCINUS</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente Macaco Prego.		
542	<b>HEMOGRAMA COMPLETO - LAMA GLAMA - LHAMA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente Lhama.		
983	<b>HEMOGRAMA E PROTEÍNA PLASMÁTICA TOTAL</b>		
	<b>Exames inclusos:</b> Hemograma, proteína total plasmática.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
291	<b>LEUCOGRAMA - AVES E RÉPTEIS</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Aves: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) Répteis: Sangue total em tubo com heparina sódio/lítio (tampa verde)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	2	 
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e répteis.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
41	<b>LEUCOGRAMA - PET E ANIMAIS SILVESTRES</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Aves: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) Mamíferos: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) Répteis: Sangue total em tubo com heparina sódio/lítio (tampa verde). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas(consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).	1	
132	<b>MIELOGRAMA</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Punção de medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) Lâminas com material de medula óssea (esfregaço ou squash) Resultado de hemograma. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 6 lâminas de esfregaço ou squash com material medular e/ou medula óssea. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, Felina e Equina.	6	 
409	<b>MYCOPLASMA SPP. - PESQUISA DE</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum não necessário. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Esfregaço sanguíneo em lâminas (preferencialmente), acondicionadas em porta lâminas ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 3 lâminas de esfregaço sanguíneo ou 1mL de sangue total. <b>Forma(s) de envio:</b> Lâminas em temperatura ambiente e/ou sangue refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente felina.	2	 
358	<b>PESQUISA DE HEMATOZOÁRIOS / INCLUSÕES</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum não necessário. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Esfregaço sanguíneo em lâminas (preferencialmente), acondicionadas em porta lâminas ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 3 lâminas de esfregaço sanguíneo ou 1mL de sangue total. <b>Forma(s) de envio:</b> Lâminas em temperatura ambiente e/ou sangue refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	1	 
1228	<b>PESQUISA DE HEMOPARASITAS / INCLUSÕES - AVES</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum não necessário. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Esfregaço sanguíneo em lâminas acondicionadas em porta lâminas (preferencialmente) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) ou sangue total em tubo com heparina (tampa verde). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 3 lâminas de esfregaço sanguíneo e/ou 0,5 mL de sangue total em tubo de EDTA ou heparina. <b>Forma(s) de envio:</b> Lâminas em temperatura ambiente e sangue total refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente aves.	1	 

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1169	PESQUISA DE MICROFILÁRIA - MÉTODO KNOTT MODIFICADO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 2,0 mL de sangue total.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
43	CONTAGEM DE PLAQUETAS		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
246	RETICULÓCITOS - AVES E RÉPTEIS - CONTAGEM DE :		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Aves: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) Répteis: Sangue total em tubo com heparina sódio/lítio (tampa verde).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e Reptéis.		
	<b>Causa(s) de Rejeição:</b> Volume insuficiente, hemólise moderada a intensa e amostra coagulada.		
717	CONTAGEM DIFERENCIAL DE RETICULOCITOS FELINO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente felina.		
245	CONTAGEM DE RETICULOCITOS PET		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
808	TESTE DE REACAO CRUZADA PARA TRANSFUSAO EM CÃES	0	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela) + sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,3 mL de soro ou 1,0 mL de sangue total (receptor) + 0,5 mL de sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) (doador).	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente canina.		
1100	TESTE DE REAÇÃO CRUZADA PARA TRANSFUSÃO FELINO	0	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela) + sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,3 mL de soro ou 1,0 mL de sangue total (receptor) + 0,5 mL de sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) (doador).	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente felina.		
1112	TIPAGEM SANGUÍNEA +TESTE DE COMPATIBILIDADE FELINO	1	
	Exames inclusos: Tipagem sanguínea de gatos e teste de reação cruzada para transfusão em felinos.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela) + sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,3 mL de soro (receptor) + 0,5 mL de sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) (doador).	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente para felina.		
713	TIPAGEM SANGUÍNEA DE CÃES	0	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente canina.		
710	TIPAGEM SANGUÍNEA DE GATOS	0	
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade necessária:</b> 0,5 mL de sangue total.	0	
	<b>Formas de envio:</b> Refrigerada		
	<b>Espécies atendidas:</b> Felina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
414	<b>CONTAGEM DE RETICULOCITOS - PET - SEM ONUS</b>		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Não é necessário jejum.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa)</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, Felina e Equina.</p>	2	
713	<b>TIPAGEM SANGUÍNEA DE CÃES</b>		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente canina.</p>	0	
710	<b>TIPAGEM SANGUÍNEA DE GATOS</b>		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente felina.</p>	0	



---

# BIOQUÍMICA

---

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
216	<b>ÁCIDO FÓLICO</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum de 4 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro acondicionado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	2	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
217	<b>ÁCIDO LÁTICO - LACTATO</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum de 6 - 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Plasma Fluoretado (preferencialmente) enviado em tubo de transporte ou sangue total em tubo com com fluoreto de sódio (tampa cinza).	1	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de plasma fluoretado.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
197	<b>ÁCIDO ÚRICO</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar de 4 horas. Para aves, répteis e pequenos mamíferos não há necessidade de jejum.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total com ativador de coágulo, gel separador, EDTA, heparina de lítio ou fluoreto de sódio (tubo tampa vermelha/amarela/roxa/verde/cinza)	1	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,4 mL de soro ou plasma.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
980	<b>ÁCIDOS BILIARES</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Necessário jejum de 12 horas (para amostra pré-prandial). Para a amostra pós-prandial: alimentar o animal normalmente, de acordo com sua rotina diária para estimular a contração da vesícula biliar. Aguardar 2 horas e fazer nova coleta.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro ou plasma de EDTA em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total com ativador de coágulo, gel separador ((tubo tampa vermelha/amarela) ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) .	1	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina, equina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
979	<b>ÁCIDOS BILIARES - JEJUM E PÓS PRANDIAL</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Necessário jejum de 12 horas (para amostra pré-prandial). Para a amostra pós-prandial: alimentar o animal normalmente, de acordo com sua rotina diária para estimular a contração da vesícula biliar. Aguardar 2 horas e fazer nova coleta.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro ou plasma de EDTA em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total com ativador de coágulo, gel separador ((tubo tampa vermelha/amarela) ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) .	1	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina, equina.		
443	<b>ALBUMINA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum alimentar entre 4 a 6 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total com ativador de coágulo ou gel separador (tubo tampa vermelha/amarela)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
112	<b>ALT (TGP)</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6-8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina .		
94	<b>AMILASE</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6-8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina .		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
111	AST (TGO)		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6-8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
95	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6-8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela), protegido da luz.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina .		
96	CÁLCIO		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6-8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina .		
545	CÁLCIO IÔNICO		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6-8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
231	CAPACIDADE DE LIGAÇÃO DE FERRO		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Necessário jejum entre 6 e 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
171	<b>CLORETO (CLORO)</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6-8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
842	<b>COBRE</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Necessário jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), eppendorf ou microtubos sem aditivos.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	12	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.		
243	<b>COLESTEROL TOTAL</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 12 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
97	<b>COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES (TOTAL+LDL+VLDL+HDL)</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 12 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
1308	<b>COLESTEROL TOTAL, HDL E TRIGLICERÍDES</b>		
	<b>Exames inclusos:</b> Colesterol total, HDL e triglicerídeos.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum alimentar de 12 horas.		
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerada.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
244	<b>COLINESTERASE</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	7	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos, aves e répteis.		
99	<b>CPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CK TOTAL)</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
98	<b>CREATININA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
124	<b>CURVA GLICÊMICA (ATÉ 6 DETERMINAÇÕES)</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Plasma fluoretado em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue total em tubo com fluoreto se sódio (tampa cinza).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de plasma por amostra.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
1158	<b>DIMERO - D</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Plasma Citratado (preferencialmente) ou sangue total em tubo de citrato de sódio (tampa azul).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de plasma citratado.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente canina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
264	ELETROFORESE DE PROTEÍNAS		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	4	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina, equina e bovina.		
374	FATOR REUMATÓIDE CANINO		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue total em tubo de tampa vermelha, sangue total em tubo com gel separador.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente canina.		
1293	FERRITINA		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável 8 horas de jejum.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca) ou plasma em heparina de lítio (tampa verde).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro/ plasma	30	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Congelado		
	<b>Espécies atendida:</b> Canina		
273	FERRO SÉRICO		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
186	FIBRINOGENIO		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Plasma citratado (preferencialmente) ou sangue total em tubo com citrato de sódio (tampa azul).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de plasma citratado.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
101	<b>FOSFATASE ALCALINA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6-8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
1099	<b>FOSFATASE ALCALINA E FRAÇÕES</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Necessário jejum de 4 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	15	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.		
102	<b>FÓSFORO</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6-8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
103	<b>FRUTOSAMINA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
104	<b>GAMA GT</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
105	<b>GLICOSE</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Plasma fluoretado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com fluoreto de sódio (tampa cinza).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de plasma.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
1188	<b>GLICOSE - GLICEMIA (SORO)</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente), ou sangue total com ativador de coágulo ou gel separador (tubo tampa vermelha/amarela)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
681	<b>GLICEMIA ( GLICOSE ) DE AVES SILVESTRES</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Plasma fluoretado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em fluoreto de sódio (tubo tampa cinza)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,2 mL de plasma.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves (consultar disponibilidade de referências).		
277	<b>GLICOHEMOGLOBINA - HEMOGLOBINA GLICOSILADA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) ou heparina de Lítio (tampa verde).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 ml de plasma.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
	<b>Método:</b> Colorimetria/Turbidimetria.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1119	<b>HAPTOGLOBINA</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	7	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
	<b>Método:</b> Turbidimetria.		
381	<b>HDL - COLESTEROL FRAÇÃO HDL</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
281	<b>IMUNOGLOBULINA G - IGG</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerada.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).		
282	<b>IMUNOGLOBULINA M - IGM</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerada.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas (consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
288	<b>LDH - DESIDROGENASE LÁTICA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
106	<b>LIPASE</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador (tampa vermelha/tampa amarela) ou sangue total em tubo com heparina de lítio (tampa verde).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro/plasma heparinizado.	3	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
627	<b>LIPASEIMUNORREAIVA CANINA (LIPASE ESPECÍFICA CANINA)</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente), ou sangue total com ativador de coágulo ou gel separador (tubo tampa vermelha/amarela)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente canina.		
764	<b>LIPASE IMUNORREAIVA FELINA (LIPASE ESPECÍFICA FELINA)</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente), ou sangue total com ativador de coágulo ou gel separador (tubo tampa vermelha/amarela)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente felina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
107	LÍPIDES TOTAIS		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
	<b>Método:</b> Colorimetria		
388	MAGNÉSIO		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
108	POTÁSSIO		
	<b>Preparo do paciente:</b> Desejável jejum de 08 horas.		
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo, gel separador ou heparina (tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade necessária:</b> 0,5 mL de soro.	0	
	<b>Formas de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécies atendidas:</b> Canina, felina e equina.		
860	PRO BNP CANINO - MARCADOR CARDÍACO		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente), ou sangue total com ativador de coágulo ou gel separador (tubo tampa vermelha/amarela)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	3	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou Congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente canina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
966	<b>PRO BNP FELINO - MARCADOR CARDÍACO</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente), ou sangue total com ativador de coágulo ou gel separador (tubo tampa vermelha/amarela)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	3	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente felina		
535	<b>PROTEÍNA C REATIVA CANINO</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou Congelado		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente canina.		
984	<b>PROTEÍNA TOTAL PLASMÁTICA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Plasma em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com EDTA ou heparina (tubo tampa roxa/verde).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de plasma.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
382	<b>PROTEÍNAS TOTAIS</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total com ativador de coágulo ou gel separador (tubo tampa vermelha/amarela)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
109	<b>PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente), ou sangue total com ativador de coágulo ou gel separador (tubo tampa vermelha/amarela)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1235	<b>RELAÇÃO UREIA/CREATININA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
572	<b>RELAÇÃO UREIA/CREATININA (CHECK UP GLOBAL)</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
909	<b>SDMA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	3	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou Congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.		
110	<b>SÓDIO</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
	<b>Método:</b> Eletrodo íon seletivo.		
1096	<b>SSA - SORO AMILÓIDE A - FELINO</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro ou Plasma heparinizado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo de heparina (verde) ou sangue em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha); tubo com gel separador (tampa amarela).	1	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro ou plasma heparinizado		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente felina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
346	<b>TEMPO DE PROTROMBINA (TP)</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Plasma citratado (preferencialmente) ou sangue total em tubo com citrato de sódio (tampa azul).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de plasma citratado		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	0	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
1257	<b>TEMPO DE TROMBINA (TT)</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Plasma em tubo com citrato de Sódio (tampa azul). A amostra deve ser coletada e centrifugada em, no máximo, 20 minutos após a coleta. Separar o plasma e congelar.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 de plasma.	3	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.		
347	<b>TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA)</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Plasma citratado (preferencialmente) ou sangue total em tubo com citrato de sódio (tampa azul).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de plasma citratado	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
311	<b>TRANSFERRINA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Necessário jejum entre 6 e 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	2	  
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
113	<b>TRIGLICERÍDEOS</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 12 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	  
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
868	<b>TRIPSINOGENIO (TLI) - TRIPSINA IMUNORREATIVA CANINA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro acondicionado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente Canina.	1	  
1185	<b>TRIPSINOGENIO (TLI) - TRIPSINA IMUNORREATIVA FELINA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 a 12 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente para felina.	30	  
859	<b>TROPONINA CANINA I ( MARCADOR CARDÍACO )</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 4 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Plasma em tubo de transporte (preferencialmente) ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL plasma. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou Congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente canina	1	 
114	<b>UREIA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	0	  
1256	<b>VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com citrato de Sódio (tampa azul) (preferencialmente) ou EDTA (tampa roxa). Estabilidade: 24h de 2 a 8°C <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 2,0 mL de sangue total. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	3	 

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
317	VITAMINA A - (RETINOL)		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,6 mL de soro.	8	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
318	VITAMINA B12 - CIANOCOBALAMINA		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum de 4 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
1381	VITAMINA D TOTAL E FRACOES - HPLC		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente), ou sangue total com ativador de coágulo ou gel separador (tubo tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total.	15	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
1382	VITAMINA D (1,25 DIXIDROXI VITAMINA D) - HPLC		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente), ou sangue total com ativador de coágulo ou gel separador (tubo tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro ou 3,0 mL de sangue total.	15	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
843	ZINCO		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Necessário jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), eppendorf ou microtubos sem aditivos.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro.	12	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.		



# UROANÁLISE

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
219	<b>CÁLCULO URINÁRIO - ANÁLISE DE</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Cálculo urinário em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Peso mínimo de 0,04g.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	2	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas.		
982	<b>CRISTALOGRAFIA DE CÁLCULOS URINÁRIOS</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Cálculo urinário em coletor universal estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Tamanho mínimo 1 mm.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.	30	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.		
977	<b>ELETROFORESE DE PROTEÍNAS URINÁRIAS</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Não realizar fluidoterapia 24 horas antes. Descartar infecção urinária antes de seguir com a análise.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Urina em frasco de tubo cônico (tampa amarela), coletor universal ou frasco/tubo estéril. Coletar, preferencialmente, por cistocentese. Evitar que o paciente urine 2h antes do exame. Para amostras com período superior a 24h de envio, é necessário centrifugar o material, separar o sobrenadante da urina e congelar a amostra.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 10,0 mL de urina.	30	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. Congelado: caso amostra com envio superior a 24h.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.		
193	<b>RELAÇÃO PROTÉINA CREATININA URINÁRIA</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Urina acondicionada em tubo estéril (tubo de transporte/ tubo falcon).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL urina.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	1	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
634	<b>RELAÇÃO CORTISOL CREATININA URINÁRIA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Urina acondicionada em tubo estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5mL urina.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	2	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
368	<b>SEDIMENTOSCOPIA DE URINA</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Urina acondicionada em tubo estéril (tubo sem aditivo, tubo falcon)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 5,0 mL urina.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	0	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas.		
234	<b>URINA ROTINA</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Urina acondicionada em tubo estéril (tubo sem aditivo, tubo falcon)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 5,0 mL urina.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	0	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas.		
438	<b>PROTEÍNA NA URINA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum desejável de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Urina em frasco estéril (tubo de trasnporte/tubo falcon).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de urina.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		



---

**DIVERSOS**

---

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
260	DIGOXINA - DOSAGEM DE		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela), sangue total em tubo de heparina (tampa verde).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro ou plasma heparinizado.	7	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.		
1172	BROMETO DE POTÁSSIO		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro.	30	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
1192	CITOMETRIA DE FLUXO 1		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Necessário jejum de 4 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), punção de linfonodos ou efusões em seringa tubo sem aditivo estéril ou coletor estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 2,0 mL de sangue total em tubo com EDTA ou 2,0 mL de efusões.	7	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.		
1191	CITOMETRIA DE FLUXO 2		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de medula em tubo com EDTA.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	7	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.		
1258	DOSAGEM DE COBRE EM TECIDOS		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Amostra de tecido (fígado ou outros) em solução fisiológica, acondicionada em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 2,0g de tecido	30	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
306	PACOTE TOXICOLÓGICO - PESQUISA DE 01 ITEM		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Contéudo estomacal, Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), fígado, rim (fragmento de órgãos), alimento suspeito.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 20 mL de sangue total e/ou 300 g de vísceras ou alimento suspeito.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas	35	
304	PACOTE TOXICOLÓGICO COMPLETO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Contéudo estomacal, Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), fígado, rim (fragmento de órgãos), alimento suspeito.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 20 mL de sangue total e/ou 300 g de vísceras ou alimento suspeito.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas.	35	
268	ESPERMOGRAMA		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomenda-se evitar acasalamento entre 3 e 5 dias antes da coleta.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sêmen acondicionado em Tubo com formol-citrato (tampa azul/tubo falcon) .		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1 ,0mL de sêmen	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
1260	FATOR VIII - TESTE DE ATIVIDADE		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Plasma em tubo com citrato de Sódio (tubo azul). A amostra deve ser coletada e centrifugada em, no máximo, 20 minutos após a coleta. Separar o plasma e congelar.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 de plasma.	30	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
997	<b>FENOBARBITAL - 2 DOSAGENS</b>		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro (para cada amostra).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>	1	  
100	<b>FENOBARBITAL - DOSAGEM DE</b>		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>	1	  
1313	<b>ÍNDICE DE DISBIOSE CANINA</b>		
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 5g fezes (sólidas, pastosas ou líquidas).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.</p>	25	
1314	<b>INDICE DE DISBIOSE FELINO</b>		
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 5g fezes (sólidas, pastosas ou líquidas).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.</p>	25	
1120	<b>LÍTIO</b>		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Realizar a coleta imediatamente antes da administração da próxima dose do medicamento ou conforme orientação do Médico Veterinário.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.</p>	4	  

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
139	LÍQUIDOS CAVITÁRIOS (PERITONEAL, PLEURAL OU PERICÁRDICO) E SINOVIAL -ANÁLISE DE		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Líquidos ou efusões cavitárias: amostras provenientes de cavidades naturais (pleural, peritoneal ou pericárdica), acondicionadas em dois tubos: um contendo EDTA (tampa roxa) e outro sem anticoagulante (tampa vermelha/ branca/ amarela) + duas lâminas pelo método de squash a partir da amostra recém coletada para preservar a integridade das células (preferencialmente). Líquido sinovial: devem ser acondicionadas apenas em um tubo transporte (tampa branca). Caso haja contaminação por sangue durante a coleta e risco de coagular a amostra, deve-se colocar a amostra em tubo com EDTA (tampa roxa). Preferencialmente, recomenda-se que também sejam enviadas de 1 a 3 lâminas preparadas por squash a partir da amostra de líquido sinovial recém coletada.	3	  
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Líquidos cavitários: mínimo 0,5 mL de líquido em cada tubo e duas lâminas. Líquido sinovial: mínimo 0,5 mL de líquido e duas lâminas.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado e lâminas em temperatura ambiente.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
169	LÍQUOR -ANALISE DE		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Em pequenos animais: líquor acondicionado em tubos de transporte (tampa branca, sem aditivo) numerados como 1, 2 e 3. Gotejar líquor nos três tubos na ordem, colocando de 3 a 4 gotas em cada*. Em grandes animais: colocar todo conteúdo aspirado em tubo de transporte (tampa branca, sem aditivo). Caso haja contaminação por sangue durante a coleta e risco de coagular a amostra, deve-se colocar a amostra em tubo com EDTA (tampa roxa).	1	  
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Pequenos animais: 0,5 ml de líquor (volume total nos três tubos enviados). Grandes animais: 0,5 mL de líquor (amostra única).		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
232	MARCADOR SOROLÓGICO PARA TUMOR DE MAMA (CEA)		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Necessário jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte ou sangue total com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	8	  
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
1311	PAINEL DISBIOSE CANINA		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 5g fezes (sólidas, pastosas ou líquidas).		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	10	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1312	<b>PAINEL DISBIOSE FELINO</b>		
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 5g fezes (sólidas, pastosas ou líquidas).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.</p>	10	
369	<b>SEXAGEM AVIÁRIA - PCR - POLYMERASE CHAIN REACTION</b>	7	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Amostras com bulbo de penas ou sangue em papel filtro.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Penas: Mínimo de 05 penas retiradas da região da asa e/ou cauda. Penas retiradas da região peitoral são necessárias 15 penas com bulbo. Sangue: 03 gotas de sangue em papel filtro. Esperar secar sem exposição a luz para envio.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Recipiente ou envelope escuro e fechado, evitando a exposição a luz.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.</p>		
1190	<b>ONCO MAPA</b>	28	
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Bloco de parafina previamente selecionado do fragmento de tecido a ser analisado e respectiva lâmina HE, laudo histopatológico do caso, histórico clínico, localização e evolução da lesão.</p> <p><b>Indicação:</b> Avaliação genética dos tumores de cães. Análise da expressão de genes responsáveis pela proliferação, progressão e resistência das células tumorais, visando estabelecer estratégias terapêuticas mais assertivas.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.</p>		



---

# TESTES GENÉTICOS

---

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
881	<b>ASTENIA REGIONAL DÉRMICA HEREDITÁRIA EQUINA</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) ou pelos com bulbo.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 2,0 mL de sangue ou 50 fios de pelos.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	15	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Equina.		
888	<b>ATROFIA RETINIANA PROGRESSIVA (PRCD-PRA) - CANINO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 2,0 mL de sangue total.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	15	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		
892	<b>CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA FELINA</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 2,0 mL de sangue total		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	15	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.		
889	<b>COLAPSO INDUZIDO POR EXERCÍCIO (EIC) - CANINO</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Necessário jejum de 3 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) ou esfregaço oral com swab sem meio ou escova cervical.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 2,0 mL de sangue total ou 3 swabs ou escovas.	12	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1159	DOENÇA DE VON WILLEBRAND TIPO 1		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de sangue total.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	15	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina		
891	DOENÇA DO RIM POLICÍSTICO EM FELINOS (PKD1) - FELINO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de sangue total.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	15	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.		
885	HIPERTERMIA MALIGNA		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa)ou pelos com bulbo.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 2,0 mL de sangue total ou 50 fios de pelos.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	15	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Equina.		
883	MIOPATIA POR ACÚMULO DE POLISSACARÍDEO 1		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa)ou pelos com bulbo em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 2,0 mL de sangue ou 50 fios de pelos.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.	15	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Equina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
890	PAINEL DOENÇAS GENÉTICAS CANINAS - SEQUENCIAMENTO GENÉTICO MÉTODO SANGER (CANINO)		
	<p><b>Exames incluídos:</b>            Atrofia retiniana progressiva (Canina) e Colapso induzido por exercício</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            3,0 mL de sangue total.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina.</p>	15	
884	PARALISIA PERIÓDICA HIPERCALÊMICA		
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) ou pelos com bulbo em frasco estéril.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            2,0 mL de sangue total ou 50 fios de pelos.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Equina.</p>	15	 
887	RESISTÊNCIA A DROGAS (MDR1) - CANINO		
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            0,5 mL de sangue total.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Canina.</p>	7	
882	SÍNDROME LETAL DO OVERO BRANCO		
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) ou pelos com bulbo.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            2,0 mL de sangue total ou 50 fios de pelos.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Equina.</p>	15	
1161	TESTE PARA MUTAÇÃO DO GENE BRAF PARA CARCINOMA DE VESÍCULA URINÁRIA E PROSTATA DE CÃES		
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Urina ou lavado vesical acondicionados em frasco estéril ou tubo sem aditivos (Tubo Tampa Branca).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            Mínimo 2,0 mL de urina ou lavado vesical.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado ou congelado (estabilidade de 3 dias sob refrigeração ou congelada por 30 dias).</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            canina.</p>	3	



---

# **ANIMAIS SILVESTRES**

---

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
267	<b>ERITROGRAMA - AVES E RÉPTEIS</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Aves: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) Répteis: Sangue total em tubo com heparina sódio/lítio (tampa verde).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e Répteis.		
143	<b>HEMOGRAMA COMPLETO - AVES E RÉPTEIS</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Anfíbios: Sangue total em heparina (tampa verde) Aves: Preferencialmente Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) Mamíferos: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) Peixes: Sangue total em heparina (tampa verde) Répteis: Sangue total em heparina (tampa verde)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Respeitar a proporção anticoagulante/sangue; atentar-se ao volume indicado pelo tubo utilizado.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Animais Silvestres.		
1270	<b>HISTOPATOLÓGICO ANIMAL SILVESTRE</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fragmento de tecido retirado por biópsia incisional ou excisional. As informações clínicas pertinentes e fotos são muito importantes para a agilidade e elucidação do caso. Encaminhe junto com a requisição ou via email ou Whataspp ao Atendimento ao cliente com a identificação do paciente, tutor e, se possível, número de registro do cadastro online.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> O material deverá ser fixado por período mínimo de 24 horas em solução de formol 10% tamponado (o formol deve corresponder a 10 vezes o volume da amostra) ou, ainda ser enviado na forma de bloco de parafina com o tecido desejado. Para peças maiores, faça cortes na peça com distância de cerca de 2cm entre eles para melhor penetração do formol e fixe por cerca de 48 horas. Para o envio, remova a peça do formol líquido, envolva-a em gaze ou compressa cirúrgica embebida em formol para evitar o ressecamento e coloque em embalagem de boca larga bem vedada para evitar vazamentos. Blocos parafinados identificados também podem ser aceitos. Temperatura ambiente.	10	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Animais exóticos, silvestres, não convencionais.		
291	<b>LEUCOGRAMA - AVES E RÉPTEIS</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Aves: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) Répteis: Sangue total em tubo com heparina sódio/lítio (tampa verde)		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total.	2	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e répteis.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1202	<b>PERFIL CHECK UP COMPLETO - AVES E RÉPTEIS</b> Hemograma completo, ácido úrico, AST, CPK, LDH, creatinina, colesterol total :		
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Aves: Sangue total em tubo(tampa roxa) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela) Répteis: Sangue total em tubo com heparina (tampa verde) + Soro em tubo de transporte ou sangue total em tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha) ou sangue total em tubo com gel separador (tampa amarela)	1	
	<b>Quantidade necessária:</b> 0,5 mL de sangue total + 1,0 mL de soro ou plasma ou 2,0 mL de sangue total em tubo tampa vermelha, amarela ou verde.		
	<b>Formas de envio:</b> Refrigerada		
	<b>Espécies atendidas:</b> Aves e Répteis.		
1201	<b>PERFIL CHECK UP SIMPLES - AVES E RÉPTEIS</b> Hemograma Completo, ácido úrico, AST, CPK		
	<b>Exames inclusos:</b> Hemograma, ácido úrico, AST e CPK		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) (aves) ou heparina (tampa verde) (répteis) e soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).	1	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL sangue com anticoagulante + 0,5 mL de soro .		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e répteis		
1204	<b>PERFIL HEPÁTICO - AVES E RÉPTEIS</b> AST, CPK e LDH.		
	<b>Exames inclusos:</b> AST, CPK e LDH.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).	0	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,3 mL de soro.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e répteis		
1203	<b>PERFIL RENAL - AVES E RÉPTEIS</b> Ácido úrico e creatinina		
	<b>Exames inclusos:</b> Ácido úrico e Creatinina		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).	1	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,2 mL de soro.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e répteis.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1228	PESQUISA DE HEMOPARASITAS / INCLUSÕES - AVES		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b> Jejum não necessário.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Esfregaço sanguíneo em lâminas acondicionadas em porta lâminas (preferencialmente) ou sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) ou sangue total em tubo com heparina (tampa verde).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 3 lâminas de esfregaço sanguíneo e/ou 0,5 mL de sangue total em tubo de EDTA ou heparina.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Lâminas em temperatura ambiente e sangue total refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente aves.</p>	1	  
369	SEXAGEM AVIÁRIA - PCR - POLYMERASE CHAIN REACTION		
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Amostras com bulbo de penas ou sangue em papel filtro.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Penas: Mínimo de 05 penas retiradas da região da asa e/ou cauda. Penas retiradas da região peitoral são necessárias 15 penas com bulbo. Sangue: 03 gotas de sangue em papel filtro. Esperar secar sem exposição a luz para envio.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Recipiente ou envelope escuro e fechado, evitando a exposição a luz.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.</p>	7	
1068	PAINEL TRIAGEM PSITACÍDEOS BÁSICO - REAL TIME PCR QUALITATIVO		
	<p>Exames inclusos: Chlamydophila psittaci, Poliomavírus aviário, Doença do Bico e das Penas (Circovírus aviário)</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes em frasco estéril. Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). 5g fezes.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.</p>	1	 
1069	PAINEL TRIAGEM PSITACÍDEOS COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO		
	<p>Exames inclusos: Chlamydophila psittaci, Poliomavírus aviário, Doença do Bico e das Penas (Circovírus aviário), Mycoplasma spp., Salmonella., Megabactéria, Herpesvírus de Pacheco</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes em frasco estéril. Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). 5g fezes.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.</p>	1	 

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1034	ASPERGILLUS SPP - REAL TIME PCR QUALITATIVO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab nasal, swab de lesão ou swab orofaríngeo (Coletor universal estéril). Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Cultura microbiológica. Fragmento de órgão (pulmão, pele, sacos aéreos) (Coletor universal estéril).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Swab com material orgânico visível.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e aves.		
1072	PAINEL RESPIRATÓRIO AVIÁRIO - REAL TIME PCR QUALITATIVO		
	<b>Exames inclusos:</b> Chlamydophila psittaci, Aspergillus spp., Mycoplasma spp.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab de coana ou orofaríngeo em frasco estéril. Swab de cloaca, fezes, secreções, fragmento de órgão (pulmão, traqueia e/ou saco aéreo) em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.		
1035	ASPERGILLUS SPP - REAL TIME PCR QUANTITATIVO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab nasal, swab de lesão ou swab orofaríngeo (Coletor universal estéril). Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Cultura microbiológica. Fragmento de órgão (pulmão, pele, sacos aéreos) (Coletor universal estéril).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Swab com material orgânico visível.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e aves.		
875	BORDETELLA BRONCHISEPTICA - REAL TIME PCR QUALITATIVO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab profundo de faringe (Coletor universal estéril). Swab conjuntival (Coletor universal estéril).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina, suína, equina, lagomorfos (coelhos) e aves.		
	<b>Causa(s) de Rejeição:</b> Swab em meio de cultura.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
876	<b>BORDETELLA BRONCHISEPTICA - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab profundo de faringe (Coletor universal estéril). Swab conjuntival (Coletor universal estéril).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina, suína, equina, lagomorfos (coelhos) e aves.		
	<b>Causa(s) de Rejeição:</b> Swab em meio de cultura.		
1207	<b>BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Fezes ou swab retal em frasco estéril. Tecido cerebral em frasco estéril. Possível analisar pool de até 3 amostras.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.		
1208	<b>BORNAVÍRUS AVIÁRIO (ABV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Fezes ou swab retal em frasco estéril. Tecido cerebral em frasco estéril. Possível analisar pool de até 3 amostras.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.		
961	<b>CAMPYLOBACTER SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Desordens gastrointestinais: fezes frescas ou swab retal (Coletor universal estéril). Desordens reprodutivas: fragmento de placenta, swab ou lavado prepucial/vaginal, sêmen, conteúdo estomacal de fetos abortados e/ou órgãos fetais (baço, fígado, rins) (Coletor universal estéril), Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) da fêmea (mãe).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. No mínimo 2,0 mL lavado prepucial/vaginal ou sêmen. 5g fezes. No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina, suína, bovina e aves.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
962	CAMPYLOBACTER SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Desordens gastrointestinais: fezes frescas ou swab retal (Coletor universal estéril). Desordens reprodutivas: fragmento de placenta, swab ou lavado prepucial/vaginal, sêmen, conteúdo estomacal de fetos abortados e/ou órgãos fetais (baço, fígado, rins) (Coletor universal estéril), Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) da fêmea (mãe). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. No mínimo 2,0 mL lavado prepucial/vaginal ou sêmen. 5g fezes. No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina, suína, bovina e aves.	1	
1060	CANDIDA SPP - REAL TIME PCR QUALITATIVO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab ou raspado cutâneo da região afetada (Coletor universal estéril). Pelos/penas com raízes/bulbos da região acometida (Coletor universal estéril). Urina, fezes ou fragmento de órgão (sistema digestório) (Coletor universal estéril). Cultura microbiológica. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Swab com material orgânico visível. No mínimo 2,0 mL de urina. 5g fezes. No mínimo 10 penas com bulbo ou tufo de pelos. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.	1	
1061	CANDIDA SPP - REAL TIME PCR QUANTITATIVO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab ou raspado cutâneo da região afetada (Coletor universal estéril). Pelos/penas com raízes/bulbos da região acometida (Coletor universal estéril). Urina, fezes ou fragmento de órgão (sistema digestório) (Coletor universal estéril). Cultura microbiológica. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Swab com material orgânico visível. No mínimo 2,0 mL de urina. 5g fezes. No mínimo 10 penas com bulbo ou tufo de pelos. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1032	<b>CHLAMYDOPHILA PSITTACI - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab de coana ou orofaríngeo em frasco estéril. Swab de cloaca, fezes, secreções, saliva, penas com bulbo, swab conjuntival, fragmento de órgão (baço, fígado e/ou saco aéreo) em frasco estéril ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). 5g fezes. No mínimo 10 penas com bulbo.	1	 
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.		
1033	<b>CHLAMYDOPHILA PSITTACI - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab de coana ou orofaríngeo em frasco estéril. Swab de cloaca, fezes, secreções, saliva, penas com bulbo, swab conjuntival, fragmento de órgão (baço, fígado e/ou saco aéreo) em frasco estéril ou Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). 5g fezes. No mínimo 10 penas com bulbo.	1	 
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.		
1144	<b>CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ALFA TOXINA ( CPA ) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (Coletor universal estéril).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	1	 
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.		
1145	<b>CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ALFA TOXINA ( CPA ) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (Coletor universal estéril).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	1	 
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1147	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ENTEROTOXINA (CPE) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO	1	 
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (Coletor universal estéril).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.		
1146	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ENTEROTOXINA (CPE) - REAL TIME PCR QUALITATIVO	1	 
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (Coletor universal estéril).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.		
1014	CLOSTRIDIUM SPP - REAL TIME PCR QUALITATIVO	1	 
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (Coletor universal estéril).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.		
1015	CLOSTRIDIUM SPP - REAL TIME PCR QUANTITATIVO	1	 
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Swab de lesão, swab de ambiente ou fragmento de órgãos (fígado e/ou rim) (Coletor universal estéril).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
900	<b>CRYPTOCOCCUS SPP. (NEOFORMANS/GATTII) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab retal, fezes, swab orofaríngeo, líquor (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa). Síndrome neurológica: líquor (Coletor universal estéril) e/ou sangue total em tubo (tampa roxa). Síndrome ocular/respiratória: swab conjuntival, swab de faringe, swab nasal ou lavado brônquico (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa). Síndrome cutânea: swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, aspirado de tecido ou fragmento de pele (Coletor universal estéril). Micose sistêmica: sangue total em tubo (tampa roxa).	1	  
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes. No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo. No mínimo 0,6 mL de lavado		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.		
901	<b>CRYPTOCOCCUS SPP. (NEOFORMANS/GATTII) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Swab retal, fezes, swab orofaríngeo, líquor (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa). Síndrome neurológica: líquor (Coletor universal estéril) e/ou sangue total em tubo (tampa roxa). Síndrome ocular/respiratória: swab conjuntival, swab de faringe, swab nasal ou lavado brônquico (Coletor universal estéril), sangue total em tubo (tampa roxa). Síndrome cutânea: swab de lesão cutânea, exsudato de lesão cutânea, aspirado de tecido ou fragmento de pele (Coletor universal estéril). Micose sistêmica: sangue total em tubo (tampa roxa).	1	  
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes. No mínimo 0,5 mL de sangue total em tubo. No mínimo 0,6 mL de lavado		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e mamíferos.		
1024	<b>DOENÇA DE BICO E PENAS DE PSITACÍDEOS (CIRCOVÍRUS PBFDV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Penas, fezes, swab oral e/ou cloacal, fragmento de órgãos (timo, Bursa de Fabricius, baço, fígado, pele) em frasco estéril. Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). 5g fezes.	1	  
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1025	DOENÇA DE BICO E PENAS DE PSITACÍDEOS (CIRCOVÍRUS PBFDV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Penas, fezes, swab oral e/ou cloacal, fragmento de órgãos (timo, Bursa de Fabricius, baço, fígado, pele) em frasco estéril. Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). 5g fezes. Swab com material orgânico visível. No mínimo 10 penas com bulbo.	1	 
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.		
1205	ENCEPHALITOZOON CUNICULI - REAL TIME PCR QUALITATIVO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Urina, Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), fezes ou swab retal em frasco estéril. Tecido afetado (fígado, rim, placenta, olho ou fragmento de SNC) em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 2,0 mL de urina. 0,5 mL Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). 5g fezes. Swab com material orgânico visível.	1	 
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, Lagomorfos (Coelhos), roedores, aves e primatas não humanos.		
1206	ENCEPHALITOZOON CUNICULI - REAL TIME PCR QUANTITATIVO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Urina, Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), fezes ou swab retal em frasco estéril. Tecido afetado (fígado, rim, placenta, olho ou fragmento de SNC) em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 2,0 mL de urina. 0,5 mL Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). 5g fezes. Swab com material orgânico visível.	1	 
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, Lagomorfos (Coelhos), roedores, aves e primatas não humanos.		
1052	HAEMOPROTEUS SPP - REAL TIME PCR QUALITATIVO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de órgão (fígado, baço) em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves, anfíbios, mamíferos e répteis.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1053	<b>HAEMOPROTEUS SPP - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de órgão (fígado, baço) em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves, anfíbios, mamíferos e répteis.		
1042	<b>HERPESVÍRUS DE PACHECO (HERPESVÍRUS DOS PSITACÍDEOS, PSHV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Assintomáticos e portadores: Fezes ou swab de cloaca em frasco estéril. Sintomáticos: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), fezes, swab de cloaca, swab orofaríngeo, fragmento de órgão (fígado, rim, baço, intestino, paratireoide, ovário, medula óssea) em frasco estéril.		  
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.		
1043	<b>HERPESVIRUS DE PACHECO (HERPESVIRUS DOS PSITACIDEOS, PSHV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Assintomáticos e portadores: Fezes ou swab de cloaca em frasco estéril. Sintomáticos: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), fezes, swab de cloaca, swab orofaríngeo, fragmento de órgão (fígado, rim, baço, intestino, paratireoide, ovário, medula óssea) em frasco estéril.		  
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Swab com material orgânico visível. 5g fezes.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.		
1054	<b>LEUCOCYTOZOON SPP - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de órgão (fígado, baço) em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos, aves e répteis.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1055	LEUCOCYTOZOOON SPP - REAL TIME PCR QUANTITATIVO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de órgão (fígado, baço) em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos, aves e répteis.		
1028	MEGABACTÉRIA (MACRORHABDUS ORNITHOGASTER) - REAL TIME PCR QUALITATIVO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes, swab cloacal, fragmento de ventrículo e/ou proventrículo (mucosa) em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.		
1029	MEGABACTÉRIA (MACRORHABDUS ORNITHOGASTER) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes, swab cloacal, fragmento de ventrículo e/ou proventrículo (mucosa) em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível. 5g fezes.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.		
1121	MYXOMA VÍRUS - REAL TIME PCR QUALITATIVO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Quadro nodular: Fragmento de tecido com mixomatose nodular (pele, pálpebra, mucosa genital ou órgãos internos como pulmões, fígado, baço e rins) em frasco estéril. Quadro respiratório: Swab nasal e/ou conjuntival em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Lagomorfos (Coelhos).		
1122	MYXOMA VIRUS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Quadro nodular: Fragmento de tecido com mixomatose nodular (pele, pálpebra, mucosa genital ou órgãos internos como pulmões, fígado, baço e rins) em frasco estéril. Quadro respiratório: Swab nasal e/ou conjuntival em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Swab com material orgânico visível.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.	1	
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Lagomorfos (Coelhos).		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1046	<b>PLASMODIUM SPP - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) ou fragmento de órgão (fígado, baço) em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves, primatas não humanos, répteis.		
1047	<b>PLASMODIUM SPP - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) ou fragmento de órgão (fígado, baço) em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves, primatas não humanos, répteis.		
1030	<b>POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), fezes, swab de cloaca, fragmento de órgão (baço, fígado, rim, proventrículo) ou líquidos cavitários em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). No mínimo 0,6 mL de líquido cavitário. 5g fezes. Swab com material orgânico visível.	1	  
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves		
1031	<b>POLIOMAVÍRUS AVIÁRIO (APV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), fezes, swab de cloaca, fragmento de órgão (baço, fígado, rim, proventrículo) ou líquidos cavitários em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). No mínimo 0,6 mL de líquido cavitário. 5g fezes. Swab com material orgânico visível.	1	 
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1016	SALMONELLA SPP - REAL TIME PCR QUALITATIVO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes, swab ou fragmento (fígado, baço, coração, vesícula biliar, aparelho reprodutor, cecos) em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 5g fezes. Swab com material orgânico visível.	1	 
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves, mamíferos e répteis.		
1017	SALMONELLA SPP - REAL TIME PCR QUANTITATIVO		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes, swab ou fragmento (fígado, baço, coração, vesícula biliar, aparelho reprodutor, cecos) em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 5g fezes. Swab com material orgânico visível.	1	 
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves, mamíferos e répteis.		
87	CITOLOGIAS (1 LOCAL)		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Lâminas com esfregaço, imprint ou punção aspirativa por agulha fina (PAAF) do local lesionado (preferencialmente) ou líquidos em frasco/tubo estéril, sem conservantes ou anticoagulantes.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 2-3 Lâminas.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Líquidos sob refrigeração. Lâminas em temperatura ambiente.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.		
536	HERPESVÍRUS 1 E 2 PRIMATAS		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Necessário jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (tampa branca), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		  
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerada.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Primatas.		
978	LEPTOSPIROSE POR MICROAGLUTINAÇÃO (DILUIÇÃO TOTAL)		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		  
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro).		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Mamíferos.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
354	<b>ÁCAROS - PESQUISA DE</b>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Pelos, crostas em coletor universal e raspado cutâneo (superficial e profundo) entre lâminas (vedadas com fita adesiva em suas bordas em porta lâminas).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> Tufo de pelos e crostas e/ou 2 lâminas com pelos e pele.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Temperatura ambiente.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.		
393	<b>COPROCULTURA COM ANTI BIOGRAMA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento.		
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Fezes em coletor universal estéril ou transferidos para um swab em meio de transporte Cary Blair.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1 swab em meio de transporte Cary Blair ou 5g de fezes frescas.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.		
254	<b>CULTURA DE ANAERÓBIOS</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento.		
	<b>Amostra e recipiente de acondicionamento:</b> Líquidos e secreções obtidos por punção, fragmentos de tecido e material cirúrgico (ex: parafusos, placas) acondicionados em recipientes contendo meio tioglicolato, que possui redutor de oxigênio.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de líquido/secreção ou 1 fragmento/material cirúrgico em quantidade visível.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.		
576	<b>CULTURA (AERÓBIOS E ANAERÓBIOS) COM ANTI BIOGRAMA</b>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante do medicamento.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Anaeróbios: Líquidos e secreções obtidos por punção, fragmentos de tecido e material cirúrgico (ex: parafusos, placas) acondicionados em recipientes contendo meio tioglicolato, que possui redutor de oxigênio. Aeróbios: Secreções ou líquidos orgânicos: acondicionados em swab com meio stuart ou tubo de transporte sem aditivos (tampa branca). Fezes: acondicionados em frasco estéril. Fragmentos de tecidos, material cirúrgico (parafusos, pinos, etc): tubo de transporte sem aditivos (tampa branca) contendo solução salina estéril 0,9%, o suficiente para cobrir o material.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1 swab, 5g de fezes ou 5 mL de líquido.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Todas as espécies.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
54	<b>CULTURA AEROBIOS C/ ANTI BIOGRAMA</b>		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b>            Animal deverá estar sem uso de antibioticoterapia respeitando o período de carência de acordo com o fabricante.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Secrções ou líquidos orgânicos: acondicionados em swab com meio stuart ou tubo de transporte sem aditivos (tampa branca).            Fezes: acondicionados em frasco estéril.            Fragmentos de tecidos, material cirúrgico (parafusos, pinos, etc): tubo de transporte sem aditivos (tampa branca) contendo solução salina estéril 0,9%, o suficiente para cobrir o material.</p> <p><b>Quantidade necessária:</b>            1 swab, 5,0g de fezes ou 3,0 mL de líquido.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Todas as espécies.</p>	5	  
255	<b>CULTURA DE FUNGOS</b>		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b>            Animal deverá estar sem uso de antifúngicos respeitando o período de carência de acordo com o fabricante.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Secrções ou líquidos orgânicos: acondicionados em swab com meio stuart ou tubo de transporte sem aditivos (tampa branca).            Fezes: acondicionados em frasco estéril.            Pele e pelos acondicionados em coletor universal estéril ou envelopes ou tubo de transporte.            Fragmentos de tecidos, material cirúrgico (parafusos, pinos, etc): tubo de transporte sem aditivos (tampa branca) contendo solução salina estéril 0,9%, o suficiente para cobrir o material.</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            1 swab, 5,0g de fezes ou 2,0 mL de líquido.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Pelo e pele: temperatura ambiente.            Demais amostras: Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Todas as espécies.</p>	21	  
266	<b>ERITROGRAMA - MAMÍFEROS SILVESTRES</b>		
	<p><b>Preparo de Paciente:</b>            Desejável jejum de 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            0,5 mL de sangue total.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Animais Silvestres. convencionais).</p>	1	
41	<b>LEUCOGRAMA - PET E ANIMAIS SILVESTRES</b>		
	<p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b>            Aves: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa)            Mamíferos: Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa)            Répteis: Sangue total em tubo com heparina sódio/lítio (tampa verde).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b>            0,5 mL de sangue total.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b>            Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b>            Todas(consultar disponibilidade de referências para espécies não convencionais).</p>	1	 

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
812	<b>PERFIL CHECK UP SILVESTRES</b> <i>Pesquisa de hematozoários/inclusões, hemograma, AST, ALT, ácido úrico, creatinina e fosfatase alcalina.</i>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum: Desejável de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela) + Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro + 0,5 mL de sangue total em tubo com EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Silvestres (consultar disponibilidade de referências para espécies).	1	
1222	<b>PERFIL CHECK-UP COMPLETO - LAGOMORFOS</b> <i>Hemograma, AST, fosfatase alcalina, ureia, creatinina, proteína total e frações.</i>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) e soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro + 0,5 mL sangue em tubo com EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Lagomorfos.	1	
1221	<b>PERFIL CHECK-UP SIMPLES - LAGOMORFOS</b> <i>Hemograma, AST, ureia, creatinina.</i>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) e soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro + 0,5 mL sangue em tubo com EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Lagomorfos.	1	
1216	<b>PERFIL CHECK-UP COMPLETO - ROEDORES</b> <i>Hemograma, CPK, AST, ALT, ureia, creatinina, bilirrubinas totais e frações e proteína total e frações.</i>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) e soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro + 0,5 mL sangue em tubo com EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Roedores.	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1215	<b>PERFIL CHECK-UP SIMPLES - ROEDORES</b> <i>Hemograma, AST, ureia e creatinina</i>		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) e soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro + 0,5 mL sangue em tubo com EDTA.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Roedores.		
1220	<b>PERFIL HEPÁTICO COMPLETO - ROEDORES</b> <i>AST, ALT, bilirrubinas totais e frações e proteína total e frações</i>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,4 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Roedores.		
1219	<b>PERFIL HEPÁTICO SIMPLES - ROEDORES</b> <i>AST e ALT</i>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,2 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Roedores.		
1218	<b>PERFIL RENAL COMPLETO - ROEDORES</b> <i>Ureia, creatinina, fósforo, potássio e sódio.</i>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,4 mL de soro.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Roedores.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1217	<b>PERFIL RENAL SIMPLES - ROEDORES</b> <i>Ureia e Creatinina.</i>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,2 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Roedores.	0	 
689	<b>PERFIL INFECÇÕES NEUROLÓGICAS CANINAS</b> <i>Neospora, Toxoplasmose e Cinomose.</i>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro). <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	4	 
1067	<b>PAINEL HEMOSPORÍDEOS AVIÁRIOS - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>		
	Exames inclusos: Plasmodium spp., Haemoproteus spp., Leucocytozoon spp. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). Fragmento de órgão (fígado ou baço) em frasco estéril. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.	1	
1071	<b>PAINEL REPRODUÇÃO AVIÁRIO - REAL TIME PCR QUALITATIVO</b>		
	Exames inclusos: Chlamydophila psittaci, Salmonella spp., Mycoplasma spp. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes em frasco estéril. Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). 5g fezes. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves.	1	 

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1066	PAINEL CHECK-UP AVIÁRIO - REAL TIME PCR QUALITATIVO		

**Exames inclusos:**

Chlamydophila psittaci, Aspergillus spp., Mycoplasma spp., Salmonella spp.

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Swab de cloaca em frasco estéril.

Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

Fezes em frasco estéril.

Fragmento de órgão (pulmão, pele, sacos aéreos, baço e fígado) em frasco estéril.

1

**Quantidade(s) necessária(s):**

No mínimo 0,5 mL de Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).

Swab com material orgânico visível.

5g de fezes.

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Aves.

1073	PAINEL DIARREIA AVIÁRIA - REAL TIME PCR QUALITATIVO
------	---

**Exames inclusos:**

Chlamydophila psittaci, Salmonella spp., Mycoplasma spp., Megabactéria.

**Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:**

Fezes ou swab retal em frasco estéril.

**Quantidade(s) necessária(s):**

Swab com material orgânico visível.

1

**Forma(s) de envio:**

Refrigerado ou congelado.

**Espécie(s) atendida(s):**

Aves.

A black and white photograph of a woman with long dark hair smiling warmly at the camera. She is holding a small, fluffy white dog, possibly a puppy, which is looking slightly away from the viewer. The background is soft and out of focus.

# **PERFIL TECSA FACILITADORES**

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
801	<b>CHECK UP GLOBAL PLUS</b> <i>Ureia, creatinina, ast (tgo), alt (tgp), fosfatase alcalina, gama gt, amilase, glicose, fosforo, cálcio, colesterol total, ácido úrico, cpk - creatinofosfoquinase (ck total), bilirrubinas totais e frações, proteína total e frações, relação ureia/creatinina (check up global), lipase, triglicerídeos.</i> <p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. Para análise de glicose Desejável Jejum alimentar entre 8 - 12 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela) + Plasma fluoretado (preferencialmente) ou sangue total em tubo com fluoreto de sódio (tampa cinza).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,2 mL de soro + 0,5 mL plasma fluoretado.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>	1	  
1004	<b>CHECK UP GLOBAL DE FUNÇÕES COM HEMOGRAMA (SEM GLICOSE)</b> <i>Hemograma completo, fosfatase alcalina, gama GT, AST, amilase, ureia, creatinina, fosforo, cálcio, proteína total e frações, colesterol total, ácido úrico, CPK - creatinofosfoquinase (ck total), bilirrubinas totais e frações, relação ureia/creatinina ALT.</i> <p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela) + sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 0,5 ml sangue total em tubo com EDTA.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>	0	  
788	<b>CHECK UP GLOBAL DE FUNÇÕES COM HEMOGRAMA</b> <i>Hemograma completo, fosfatase alcalina, gama gt - pet, ast (tgo), amilase, ureia, creatinina, glicose, fosforo, cálcio, proteína total e frações, colesterol total, ácido úrico, CPK creatinofosfoquinase (CK total), bilirrubinas totais e frações, relação ureia/creatinina (check up global), alt (tgp).</i> <p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. Para análise de glicose Desejável Jejum alimentar entre 8 - 12 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro e Plasma fluoretado em tubo de transporte + Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela) + sangue total em tubo de tampa cinza (fluoreto de sódio).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 0,5 plasma fluoretado + 0,5 ml sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>	0	  

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1304	<b>PERFIL BIOQUÍMICO AMPLIADO</b> <i>Ureia, creatinina, fósforo, cálcio, sódio, potássio, cloreto (cloro), ALT, AST, Gama GT, fosfatase alcalina, proteína total e frações, colesterol total, bilirrubinas totais e frações, triglicerídeos e glicose.</i> <p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum alimentar entre 6 - 8 horas. Para análise de glicose: desejável jejum alimentar entre 8 - 12 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro e plasma fluoretado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela) + sangue total em tubo de tampa de fluoreto de sódio (tampa cinza).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 0,3 mL de plasma fluoretado.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>	0	   
324	<b>PERFIL BIOQUÍMICO BÁSICO</b> <i>ALT, fosfatase alcalina, proteína total e frações, bilirrubina totais e frações, ureia, creatinina e colesterol total.</i> <p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.</p>	0	  
856	<b>PERFIL CHECK UP CARDIO - RENAL</b> <i>Hemograma, CPK, proteína C reativa, ALT, proteína total e frações, cálcio, ureia, creatinina, triglicerídeos, sódio, potássio, colesterol total e fosfatase alcalina.</i> <p><b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas.</p> <p><b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela) + Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).</p> <p><b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 0,5 ml de sangue total em tubo com EDTA.</p> <p><b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.</p> <p><b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.</p>	2	   

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1305	<b>PERFIL CHECK UP CARE AMPLIADO</b> <i>Hemograma, colesterol, triglicerídeos, proteína total e frações, bilirrubina totais e frações, Gama GT, fosfatase alcalina, AST, ALT, cloreto (cloro), potássio, fósforo, sódio, cálcio, creatinina, ureia, glicose.</i>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. Para análise de glicose Desejável Jejum alimentar entre 8 - 12 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro e Plasma fluoretado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela) + sangue total em tubo de tampa de fluoreto de sódio (tampa cinza). + sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	0	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 0,3 plasma fluoretado + 1,0 ml sangue total em tubo com EDTA.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
1306	<b>PERFIL CHECK UP CARE 3</b> <i>Hemograma, ureia, creatinina, proteína total e frações, ALT e AST, fosfatase alcalina, Gama GT, Bilirrubina totais e frações.</i>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador (Tampa vermelha/amarela), sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	0	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 3,0 ml sangue total em tubo com EDTA.		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
1202	<b>PERFIL CHECK UP COMPLETO - AVES E RÉPTEIS</b> <i>Hemograma, CPK, AST, ácido úrico, LDH, creatinina e colesterol total</i>		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) (aves) ou heparina (tampa verde) (répteis) e soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).	1	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL sangue com anticoagulante + 0,8 mL de soro .		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e répteis		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
233	<b>PERFIL CHECK UP DE EMERGÊNCIA</b> Hemograma, ureia, creatinina, ALT, Urina rotina.	0	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador (Tampa vermelha/amarela) + sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) + urina em frasco estéril. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,6 mL de soro + 0,5 ml sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) + 5,0 mL de urina. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
570	<b>PERFIL CHECK UP GLOBAL DE FUNÇÕES</b> Fosfatase alcalina, Gama GT, AST, ALT, amilase, ureia, creatinina, glicose, fósforo, cálcio, proteína total e frações, colesterol total, ácido úrico, CPK, bilirrubinas totais e frações e relação ureia/creatinina.	0	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. Para análise de glicose Desejável Jejum alimentar entre 8 - 12 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador (Tampa vermelha/amarela) + Plasma fluoretado (preferencialmente) ou sangue total em tubo de fluoreto de sódio (tampa cinza). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 0,5 mL plasma fluoretado. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	0	
812	<b>PERFIL CHECK UP SILVESTRES</b> Pesquisa de hematozoários/inclusões, hemograma, AST, ALT, ácido úrico, creatinina e fosfatase alcalina.	1	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum: Desejável de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela) + Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro + 0,5 mL de sangue total em tubo com EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Silvestres (consultar disponibilidade de referências para espécies).	1	
1216	<b>PERFIL CHECK-UP COMPLETO -ROEDORES</b> Hemograma, CPK, AST, ALT, ureia, creatinina, bilirrubinas totais e frações e proteína total e frações.	1	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) e soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro + 0,5 mL sangue em tubo com EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Roedores.	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1222	<b>PERFIL CHECK-UP COMPLETO - LAGOMORFOS</b> Hemograma, AST, fosfatase alcalina, ureia, creatinina, proteína total e frações.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) e soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro + 0,5 mL sangue em tubo com EDTA.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Lagomorfos.		
1201	<b>PERFIL CHECK-UP SIMPLES - AVES E RÉPTEIS</b> Hemograma, ácido úrico, AST e CPK		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) (aves) ou heparina (tampa verde) (répteis) e soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).	1	
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL sangue com anticoagulante + 0,5 mL de soro .		
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e répteis		
1221	<b>PERFIL CHECK-UP SIMPLES - LAGOMORFOS</b> Hemograma, AST, ureia, creatinina.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) e soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro + 0,5 mL sangue em tubo com EDTA.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Lagomorfos.		
1215	<b>PERFIL CHECK-UP SIMPLES - ROEDORES</b> Hemograma, AST, ureia e creatinina		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) e soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro + 0,5 mL sangue em tubo com EDTA.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Roedores.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
591	<b>PERFIL COAGULOGRAMA</b> Tempo de protrombina (PT), tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) e fibrinogênio.	0	
943	<b>PERFIL COMPLEMENTAR P/LEISHMANIOSE II</b> Hemograma, Ureia, Creatinina, ALT, Proteína total e frações e Leishmaniose Canina + ELISA + RIFI com diluição total	2	
326	<b>PERFIL COMPLETO PARA HEMOPARASITAS</b> Hemograma completo, pesquisa de Mycoplasma spp., Babesia IgG e IgM, Ehrlichia IgG e IgM.	2	
330	<b>PERFIL DIAGNÓSTICO COMPLETO DE LEISHMANIOSE</b> Hemograma completo, fosfatase alcalina, ALT, creatinina, Babesia IgM, eletroforese de proteínas, Ehrlichia IgG e Leishmaniose ELISA + RIFI.	2	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1223	<b>PERFIL DIAGNÓSTICO DIABETES MELLITUS</b> Frutosamina, glicose, glicohemoglobina, urina rotina colesterol total e fosfatase alcalina.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum: Desejável de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em fluoreto (tampa cinza), Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) e soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela), tubo com gel, urina em frasco estéril. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro + 0,5 mL de plasma fluoretado + 1,0 mL de sangue total em tubo com EDTA + 5,0 mL de urina. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina	2	
527	<b>PERFIL DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO LEPTOSPIROSE</b> Leptospirose por microaglutinação, AST, ALT, bilirrubinas totais e frações, fosfatase alcalina.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	2	
331	<b>PERFIL ELETROLÍTICO</b> Sódio, potássio, cloreto (cloro), cálcio.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,8 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	0	
1086	<b>PERFIL ELETROLÍTICO COMPLETO</b> Cálcio iônico, cloreto (cloro), magnésio, sódio, potássio e fósforo.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	0	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1331	<b>PERFIL ESTADIAMENTO LEISHMANIOSE</b> Hemograma completo, creatinina, ureia, proteína total e frações, relação proteína creatinina urinária, urina rotina, Leishmaniose Canina RIFI + ELISA diluição total, Leishmania infantum (chagasi) PCR Real Time Quantitativo. <b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela), medula em tubo com EDTA (tampa roxa), urina em frasco estéril. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total em tubo com EDTA + 1,0 mL de soro + 0,4 mL de medula óssea em tubo com EDTA + 5,0 mL de urina. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	2	   
533	<b>PERFIL FILHOTE 1 - CANINO</b> Hemograma completo, Cinomose e Parvovirose IgM e Parasitológico de Fezes. <b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela), sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) e Fezes. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 1,0 mL sangue total em tubo com EDTA + 10 g de fezes <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	1	    
534	<b>PERFIL FILHOTE 2 - CANINO</b> Hemograma completo, Cinomose, Parvovirose Hepatite infecciosa canina IgG e Parasitológico de Fezes, Pesquisa de hematozoários. <b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela), sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) e Fezes. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 1,0 mL sangue total em tubo com EDTA + 10 g de fezes <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	2	    
167	<b>PERFIL GERIÁTRICO I</b> Hemograma, glicose, ureia, creatinina e urina rotina. <b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. Para análise de glicose Desejável Jejum alimentar entre 8 - 12 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (tampa vermelha/amarela) + Plasma fluoretado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com fluoreto de sódio (tampa cinza) + sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) + urina em frasco estéril. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 0,5 mL de plasma fluoretado + 0,5 mL sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) + 5,0 mL de urina. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	0	     

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
332	<b>PERFIL GERIÁTRICO II</b> Hemograma, urina rotina, glicose, ureia, creatinina, T4 livre (CLIA) e ALT. <b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. Para análise de glicose Desejável Jejum alimentar entre 8 - 12 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro e Plasma fluoretado em tubo de transporte + Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) + urina. (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela/) + sangue total em tubo de tampa cinza (fluoreto de sódio). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 0,5 mL de plasma fluoretado + 0,5 ml sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) + 5,0 mL de urina. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	2	
944	<b>PERFIL GERIÁTRICO III- COM SDMA E PROBNP CANINO</b> Hemograma, urina rotina, glicose, ureia, creatinina, T4 livre (CLIA), ALT, SDMA, Pro BNP Canina <b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. Para análise de glicose Desejável Jejum alimentar entre 8 - 12 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela) + Plasma fluoretado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo de tampa cinza (fluoreto de sódio) + sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) + urina em frasco estéril (Tubo de transporte/tubo falcon). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 0,5 mL de plasma fluoretado + 0,5 ml sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) + 5 mL de urina. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	5	
333	<b>PERFIL HEPÁTICO</b> Bilirrubinas totais e frações, proteína total e frações, ALT, lípides totais, fosfatase alcalina e AST. <b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	0	
1204	<b>PERFIL HEPÁTICO - AVES E RÉPTEIS</b> AST, CPK e LDH. <b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,3 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e répteis	0	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
477	<b>PERFIL HEPÁTICO - CAMUNDONGO</b> Proteína total, Bilirrubina total, AST, ALT, fosfatase alcalina, lípidos totais.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,4 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Camundongo.	1	  
1220	<b>PERFIL HEPÁTICO COMPLETO - ROEDORES</b> AST, ALT, bilirrubinas totais e frações e proteína total e frações		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,4 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Roedores.	1	  
1219	<b>PERFIL HEPÁTICO SIMPLES - ROEDORES</b> AST e ALT		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,2 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Roedores.	1	  
334	<b>PERFIL HIPERADRENOCORTICISMO</b> Hemograma completo, ureia, cortisol basal, sódio e potássio.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa)+ soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 0,5 mL sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	1	   

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
373	<b>PERFIL HIPERTIREOIDISMO 1</b> Hemograma completo, TSH, T4 livre (CLIA), creatinina e ALT.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa)+ soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 0,5 mL sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	3	   
697	<b>PERFIL HIPERTIREOIDISMO 2</b> Hemograma completo, TSH, T4 livre pós-diálise, T4 total (RIE), creatinina e ALT.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo tampacom EDTA (tampa roxa) + soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 1,0 mL sangue total em EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	2	  
853	<b>PERFIL HIPOADRENOCORTICISMO</b> Hemograma completo, cortisol basal (CLIA), ureia, creatinina, glicose, proteína total e frações, sódio e potássio.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum alimentar de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela) + Plasma fluoretado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo de fluoreto de sódio (tampa cinza) + sangue total em tubo com EDTA. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 0,5 mL de plasma fluoretado + 0,5 mL sangue total em EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	1	   
336	<b>PERFIL HIPOTIREOIDISMO 1</b> Hemograma completo, TSH, T4 livre (CLIA), colesterol e fosfatase alcalina.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela) + Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 0,5 ml sangue total em EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	1	   

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
696	<b>PERFIL HIPOTIREOIDISMO 2</b> Hemograma completo, TSH, T4 livre pós-diálise (RIE), T4 total (RIE), colesterol e fosfatase alcalina.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) + soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 2,0 mL de soro + 2,0 mL sangue total em EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	2	   
582	<b>PERFIL LEISHMANIOSE (ELISA+ RIFI) E PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES</b> Leishmaniose ELISA + RIFI e Proteína total e frações.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela) <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	1	 
1199	<b>PERFIL METABÓLICO</b> Colesterol total, triglicerídeos e glicose.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. Para análise de glicose Desejável Jejum alimentar entre 8 - 12 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela) + sangue total em tubo com fluoreto de sódio (tampa cinza). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro + 0,5 mL plasma fluorescentado. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	0	   
337	<b>PERFIL MUSCULAR</b> CPK, LDH e AST.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	1	  

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
844	<b>PERFIL NUTRICIONAL - VITAMINAS, MINERAIS E HEMOGRAMA</b> Hemograma, vitamina A, vitamina B12, cobre, zinco, ácido fólico, cálcio, fósforo, sódio e magnésio. <b>Preparo de Paciente:</b> Jejum: Desejável de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo tampocom EDTA (tampa roxa) + soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 2,0 mL de soro + 1,0 mL sangue total em EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	12	   
339	<b>PERFIL OBESIDADE</b> Hemograma completo, cortisol (CLIA), colesterol total, glicose, ureia, creatinina, T4 livre (CLIA) e TSH. <b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. Para análise de glicose Desejável Jejum alimentar entre 8 - 12 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela) e sangue total em tubo com fluoreto de sódio (tampa cinza). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 0,5 mL plasma fluoretado + 3,0 ml sangue total em EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	2	    
1111	<b>PERFIL OBESIDADE II</b> Hemograma completo, cortisol (CLIA), glicose, ureia, creatinina, T4 livre (CLIA), TSH, triglicerídeos e glicohemoglobina. <b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. Para análise de glicose Desejável Jejum alimentar entre 8 - 12 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela) e sangue total em tubo com fluoreto de sódio (tampa cinza). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 0,5 mL plasma fluoretado + 3,0 ml sangue total em EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	2	    
1104	<b>PERFIL PRÉ-ANESTÉSICO FELINO</b> Hemograma, proteína total e frações, ureia, creatinina, ALT e Gama GT. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente), ou sangue total com ativador de coágulo, gel separador (tubo tampa vermelha/amarela) + sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,8 mL de soro + 0,5 mL de sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente felina.	0	   

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1164	<b>PERFIL PRÉ-CIRURGICO ESTENDIDO</b> Hemograma, ALT, fosfatase alcalina, ureia e creatinina.	0	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela) + sangue total em tubo com EDTA. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,4 mL de soro + 1,0 ml sangue total em tubo com EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
348	<b>PERFIL PRÉ-ANESTÉSICO I</b> Glicose, proteína total e frações, ureia, creatinina, fosfatase alcalina, ALT.	0	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. Para análise de glicose Desejável Jejum alimentar entre 8 - 12 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela) + Plasma fluoretado em tubo de transporte ou sangue total em tubo com fluoreto de sódio (tampa cinza). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro + 0,5 plasma fluoretado. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
836	<b>PERFIL PRÉ-ANESTÉSICO II</b> Hemograma, porteína total e frações, ureia, cretinina, fosfatase alcalina e ALT.	0	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela) + Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,6 mL de soro + 0,5 ml sangue total em tubo com EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
840	<b>PERFIL PRÉ-ANESTÉSICO III</b> Hemograma, Fosfatase Alcalina, Ureia, Creatinina, Glicose e ALT.	0	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela) + plasma fluoretado ou sangue total no fluoreto de sódio (tampa cinza) + Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 0,5 de plasma fluoretado + 0,5 ml sangue total em tubo com EDTA.. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1203	<b>PERFIL RENAL - AVES E RÉPTEIS</b> Ácido úrico e Creatinina		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,2 mL de soro.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Aves e répteis.		
349	<b>PERFIL RENAL BÁSICO</b> Creatinina e Ureia		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
869	<b>PERFIL RENAL COM HEMOGRAMA</b> Hemograma, ureia e creatinina.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela) + Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro + 0,5 mL sangue total em tubo com EDTA.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
837	<b>PERFIL RENAL COMPLETO</b> Ureia, creatinina, urina rotina e relação proteína creatinina urinária.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou tubo com gel separador (tampa vermelha/amarela) + urina em frasco estéril.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,2 mL de soro + 5,0 mL de urina.	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1218	<b>PERFIL RENAL COMPLETO - ROEDORES</b> Ureia, creatinina, fósforo, potássio e sódio.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,4 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Roedores.	0	
1225	<b>PERFIL RENAL GLOBAL</b> Ureia, creatinina, urina rotina, relação proteína creatinina urinária e SDMA.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum: Desejável de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total, colhido em tubo de tampa vermelha, Urina em frasco estéril <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro e 5,0 mL de urina. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	1	
908	<b>PERFIL RENAL PRECOCE - SDMA / DIMETILARGININA SIMÉTRICA</b> Creatinina, Ureia e SDMA		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	1	
1217	<b>PERFIL RENAL SIMPLES - ROEDORES</b> Ureia e Creatinina.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,2 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Roedores.	0	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
714	<b>PERFIL TIPAGEM SANGUÍNEA + HEMOGRAMA CANINO</b> Hemograma e Tipagem sanguínea felina	0	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente canina.		
711	<b>PERFIL TIPAGEM SANGUÍNEA + HEMOGRAMA FELINO</b> Hemograma e Tipagem sanguínea felina	0	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente felina.		
125	<b>PERFIL TIREOIDEANO 1</b> T4 livre, T4 total (CLIA) e TSH.	2	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum alimentar de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
695	<b>PERFIL TIREOIDEANO 2 - RIE</b> T4 livre (RIE), T4 total (RIE) e TSH.	2	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum alimentar de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
1272	<b>CITOLOGIA + PARR: DIAGNÓSTICO CITOMOLECULAR DE LINFOMAS</b>	7	
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Punção de linfonodos (porta lâmina com lâminas), líquidos cavitários (coletor universal estéril) ou lâminas de citologia coradas (porta lâmina com lâminas). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 5,0 mL de líquido cavitário e/ou 3 lâminas com material visível. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. Temperatura ambiente (lâminas) <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
702	<b>PERFIL TRIAGEM HORMONAL - FÉMEAS</b> T4 Total (RIE), Cortisol (RIE), Progesterona (CLIA), TSH (CLIA), Estradiol (CLIA).		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	2	
703	<b>PERFIL TRIAGEM HORMONAL - MACHOS</b> T4 Total (RIE), Cortisol (RIE), TSH (CLIA), Testosterona (CLIA)		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	2	
679	<b>PERFIL TRIAGEM FELINOS</b> Hemograma completo, Coronavírus Felino, Toxoplasmose Felina, FIV e FELV		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela) e sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 1,0 mL sangue total em tubo com EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	2	
235	<b>CHECK UP POS-OPERATÓRIO</b> Hemograma completo, ureia, creatinina, ALT, AST, urina rotina.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte + Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) + urina em frasco estéril (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,8 mL de soro + 0,5 ml sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) + 5,0 mL de urina. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
841	<b>PERFIL ESPECIAL 2</b> Hemograma, AST, ALT, ureia, creatinina, leishmaniose ELISA + RIFI		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela) + Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 0,5 mL sangue total em tubo com EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Exclusivamente canina.	1	   
1115	<b>PERFIL ACOMPANHAMENTO EPILEPSIA</b> Hemograma, ureia, creatinina, fosfatase alcalina, ALT, proteína total e frações, colesterol total, triglicerídeos, sódio, potássio, fósforo, cálcio, cálcio iônico, fenobarbital.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Jejum: Desejável de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo tampacom EDTA (tampa roxa) + soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 2,0 mL de soro + 1,0 mL sangue total em EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	1	   
1287	<b>PERFIL ACOMPANHAMENTO PARA DOENTE RENAL FELINO BÁSICO</b> Hemograma, sódio, potássio, cloreto, cálcio iônico, cálcio total, fósforo, ureia, creatinina, proteína total e frações, SDMA.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em EDTA (tampa roxa) + soro (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL sangue total em EDTA + 1,0 mL soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	1	   
1288	<b>PERFIL ACOMPANHAMENTO PARA DOENTE RENAL FELINO COMPLETO</b> Hemograma, sódio, potássio, cloreto, cálcio iônico, cálcio total, fósforo, ureia, creatinina, proteína total e frações, SDMA, urina rotina, relação proteína creatinina urinária, urocultura com antibiograma.		
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo com EDTA(tampa roxa) + soro (preferencialmente)ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador (Tampa vermelha/ amarela)+ urina. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL sangue total em tubo com EDTA + 1,0 mL soro + 5,0 mL urina. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	5	   

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
811	<b>PERFIL ANIMAL DE BIOTÉRIO</b> Hemograma, ureia, creatinina, AST, ALT, proteína total e colesterol total.	1	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente), ou sangue total com ativador de coágulo, gel separador (tampa vermelha/amarela) + sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,6 mL de soro + 0,5 mL de sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa).	1	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Roedores e logomorfos.		
1324	<b>PERFIL CHECK UP</b> Hemograma, ureia, creatinina, ALT, fosfatase alcalina, colesterol total, triglicerídeos	0	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador (Tampa vermelha/amarela), sangue total em EDTA.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 1,0 mL sangue total em tubo com EDTA.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		
1325	<b>PERFIL CHECK UP CARE 1</b> Hemograma, ureia, creatinina, proteína total e frações, ALT, fosfatase alcalina, colesterol total e triglicerídeos.	0	
	<b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador (Tampa vermelha/amarela), sangue total em EDTA.		
	<b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 1,0 mL de sangue total em tubo com EDTA.	0	
	<b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado.		
	<b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.		

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1326	<b>PERFIL CHECK UP CARE 2</b> Hemograma completo; Ureia; Creatinina; Proteína Total e Frações; Alt; Gama GT; Colesterol Total; Triglicerídeos. <b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador (Tampa vermelha/amarela), sangue total em EDTA. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 1,0 mL sangue total em tubo com EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	0	
1348	<b>PERFIL DIFERENCIAL PARA LEISHMANIOSE</b> Hemograma completo, Babesia IgG e IgM, Ehrlichia IgG e IgM, proteína total e frações, ureia, creatinina, fosfatase alcalina e Leishmaniose ELISA + RIFI (diluição total). <b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela) e Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 1,0 mL sangue total em tubo com EDTA. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	2	
1307	<b>PERFIL FUNÇÃO TIREOIDIANA</b> T4 livre pós-diálise, T4 total (RIE) e TSH. <b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum alimentar de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente), sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	3	
669	<b>PERFIL HEMOGRAMA E PESQUISA DE HEMATOZOÁRIOS</b> Hemograma completo e pesquisa de hematozoários/inclusões. <b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de sangue total. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	1	

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
1327	<b>EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES - OVOS E ANTÍGENO</b> Parasitológico de fezes e Giárdia.		
	<b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Fezes frescas (coletor universal), sem conservantes. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 10 g de fezes. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerada. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina e felina.	1	
1322	<b>PERFIL RENAL ABRANGENTE CANINA</b> Hemograma, ureia, creatinina, SDMA, urina rotina, relação proteína:creatinina, sódio, potássio, fósforo, magnésio, cálcio, albumina, Ehrlichia IgG e Leishmania IgG. <b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela) + sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) + urina acondicionada em frasco estéril. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 1,0 mL sangue total em EDTA + 5 mL de urina. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	2	    
1323	<b>PERFIL RENAL ABRANGENTE FELINO</b> Hemograma, ureia, creatinina, SDMA, urina rotina, relação proteína:creatinina, sódio, potássio, fósforo, magnésio, cálcio, albumina e T4 total (CLIA). <b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela) + sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) + urina acondicionada em frasco estéril. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro + 5,0 mL de urina. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Felina.	1	    
1321	<b>PERFIL RENAL PANORÂMICO</b> Hemograma, ureia, creatinina, SDMA, urina rotina, relação proteína:creatinina, sódio, potássio, fósforo, magnésio, cálcio e albumina. <b>Preparo de Paciente:</b> Desejável jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostras e recipiente para acondicionamento:</b> Soro (preferencialmente) ou sangue total em tubo com ativador de coágulo ou gel separador (Tampa vermelha/amarela) + sangue total em EDTA (Tampa roxa) + urina acondicionada em frasco estéril. <b>Quantidade necessária:</b> 1,0 mL de soro + 3,0 mL sangue total em EDTA + 5 mL de urina. <b>Formas de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécies atendidas:</b> Caninos e felinos	0	  

CÓDIGO	EXAME	DIAS ÚTEIS	MATERIAIS
350	<b>PERFIL REPRODUTIVO - CICLO ESTRAL</b> Hemograma, progesterona, brucelose, progesterona, citologia vaginal <b>Preparo de Paciente:</b> Desejável Jejum alimentar entre 6 - 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador (Tampa vermelha/amarela) + sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) + lâminas de esfregaço vaginal acondicionadas em porta lâminas. <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 1,0 mL de soro ou 2,0 mL de sangue total sem anticoagulante + 0,5 mL sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa) + 02 lâminas de esfregaço vaginal. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado. <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina, felina e equina.	3	   
689	<b>PERFIL INFECÇÕES NEUROLÓGICAS CANINAS</b> <i>Neospora, Toxoplasmose e Cinomose.</i> <b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas. <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro. <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro). <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	4	 
532	<b>PERFIL LEISHMANIOSE + HEMATOZOÁRIOS</b> <i>Leishmaniose ELISA + RIFI e Pesquisa de hematozoários</i> <b>Preparo de Paciente:</b> Recomendado jejum de 8 horas <b>Amostra(s) e recipiente(s) para acondicionamento:</b> Soro em tubo de transporte, sangue em tubo com ativador de coágulo ou com gel separador (Tampa vermelha/amarela) e sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa). <b>Quantidade(s) necessária(s):</b> 0,5 mL de soro e 1,0 mL de sangue total em tubo com EDTA <b>Forma(s) de envio:</b> Refrigerado ou congelado (soro). <b>Espécie(s) atendida(s):</b> Canina.	2	   

**TECSA®**  
laboratórios